

ACTIVA 700

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 271 PROGRAMMI

PRODOTTO PER LA BELLEZZA E LA FORMA FISICA, IDEATO CON PROGRAMMI SPECIFICI PER IL RASSODAMENTO, LA TONIFICAZIONE E IL RINGIOVANIMENTO. IO SPECIALE MANIPOLO G-TRODE (IN DOTAZIONE) RENDE ACTIVA 700 UN TOP DI GAMMA DELLA LINEA ELETTROSTIMOLAZIONE.

60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 53 SPORT | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 21 SPORT SPECIALI | 13 RUGHE-PELLE | 12 MICROCORRENTI | 12 TENS | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 100x160x35


Peso

gr 454

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Stimolatore ACTIVA 700
- 1 Manipolo G-Trode
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionoforesi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Confezione di gel
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

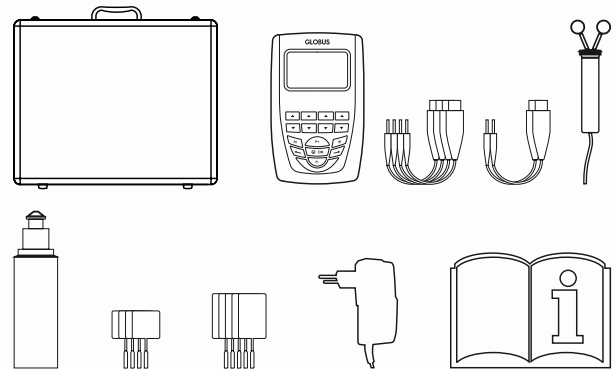

CE
0476



TENS



MENS



3S



RUN TIME



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



FUNZIONE 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCHRO STIM



WORK TIME



BATTERIA RICARICABILE

ACTIVA 700

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 271 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

FITNESS

Rassodamento

Rassodamento Bio-Pulse

Modellamento

Modellamento Bio-Pulse

Tonificazione

Aumento massa

Body sculpting

Definizione

Jogging

Fitness anaerobico

Fitness aerobico

Prevenzione crampi

BELLEZZA

Drenaggio

Drenaggio Bio-Pulse

Lipolisi

Lipolisi post-parto

Massaggio relax Bio-Pulse

Massaggio tonificante

Massaggio energetico

Massaggio connettivale

Braccia gonfie

Capillarizzazione viso

Definizione

Linea

Miglioramento tono pelle

Drenaggio post-parto

Rassodamento post-parto

Rassodamento seno

Modellamento seno

SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Riscaldamento pre-gara

Recupero attivo

Forza massima

Forza resistente

Forza esplosiva

Reattività

Recupero post-gara

Ipertrofia

SPORT SPECIALI

Corsa

Sci

Golf

REHAB

Atrofia quadricipite (con protesi al ginocchio)

Recupero post intervento LCA

Prevenzione sublussazione spalla

TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale

Tens antalgica modulata

Tens endorfinica

Dolori mestruali

Dolore cronico

Dolore cervicale

Dolore muscolare

Dolore ginocchio

Dolore spalla (sindrome scapolo-omerale)

Lombalgia cronica

Borsiti-tendiniti

Osteoartrite

RUGHE - PELLE G-PULSE

Microlifting seno

Microlifting décolleté

Microlifting viso

Elasticità pelle

Inestetismi cellulite

Collagene Bioskin

Rughe

Rughe occhi

Rughe di espressione

Smagliature

Rinforzo unghie

Bio peeling

Ematoma

MICROCORRENTI

Epicondilitis

Periartrite scapolo-omerale

Contusione

Sciatalgia

Lombalgia

Dolore acuto

Dolore articolare

Torcicollo

Colpo di frusta

Distorsione spalla

Distorsione ginocchio

Infiammazione tendinea

INCONTINENZA

Incontinenza mista

Incontinenza da stress

Incontinenza URGE

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 36 combinazioni di parametri.

I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2.

La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.