


LE PRINCIPALI AREE ANATOMICHE

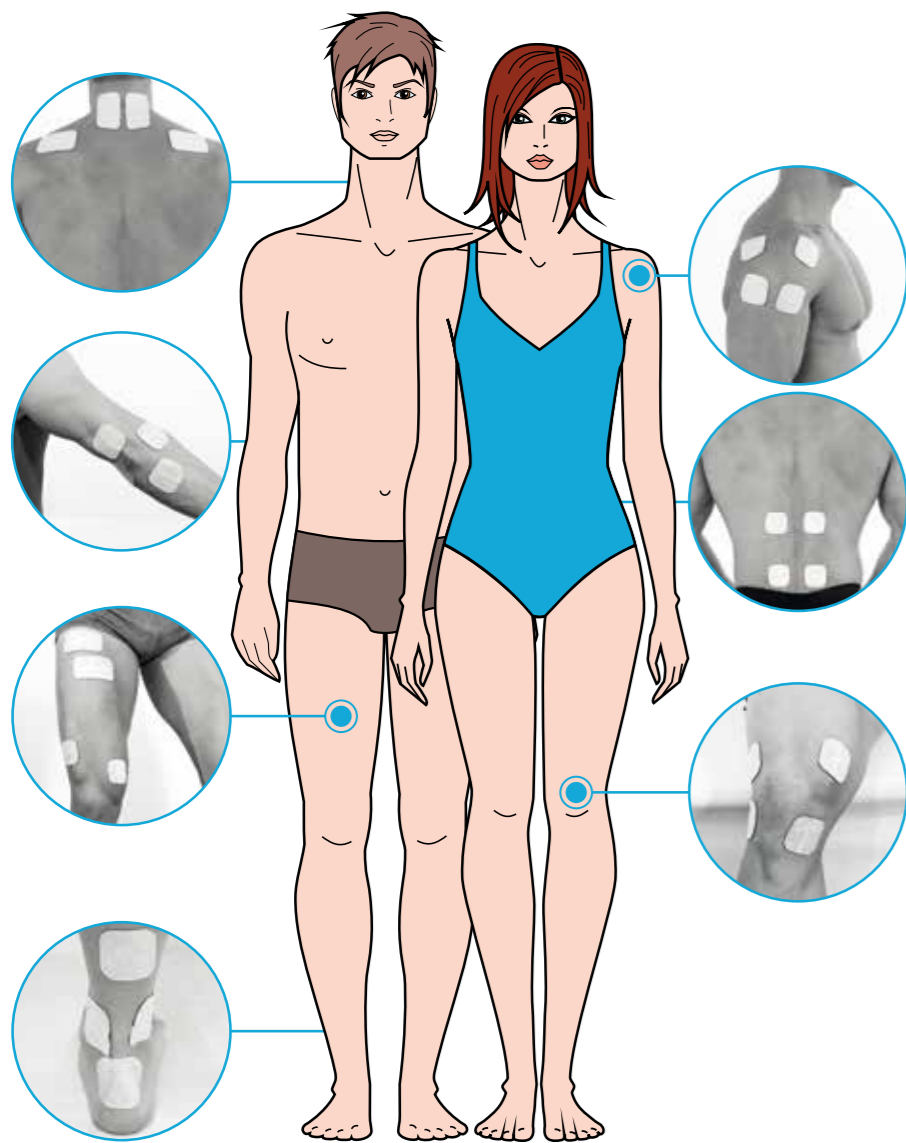

ESEMPI DI POSIZIONAMENTO ELETTRODI

IL RIMEDIO PER VARIE PATOLOGIE

RIGENERAZIONE TESSUTI INFIAMMATI CON LE MICROCORRENTI

Le Microcorrenti sono straordinarie per i loro effetti benefici su disturbi muscolari e patologie muscolo-scheletriche di natura infiammatoria. Si chiamano Microcorrenti perché hanno un'intensità bassissima e una volta applicati gli elettrodi sul corpo e azionato l'elettrostimolatore, non si avvertirà nessuna sensazione di pizzicore sulla pelle, ma le onde penetreranno all'interno della zona dolente ristabilendo l'equilibrio elettrico delle cellule infiammate. Si può dire che le Microcorrenti agiscono direttamente sulla causa del dolore mentre le Tens sui sintomi. Per questo utilizzandole con costanza per cicli periodici, sono un ottimo alleato contro i dolori!

INCONTINENZA

Gli elettrostimolatori della linea GLOBUS hanno programmi adatti a trattare l'incontinenza urinaria e fecale.

Spesso queste problematiche nascono da una riduzione del tono muscolare del pavimento pelvico (i muscoli che sostengono gli organi pelvici). Non dobbiamo pensare che questi disturbi siano tipici solo dell'invecchiamento, a volte possono essere situazioni temporanee dopo la gravidanza o in seguito a interventi chirurgici, altre volte compaiono solamente durante uno sforzo improvviso. In tutti questi casi l'utilizzo dell'elettrostimolatore GLOBUS in abbinata alle sonde vaginali o anali (accessori opzionali) possono risolvere la situazione. IL TUTTO NELL'INTIMITÀ DI CASA PROPRIA.



Le apposite sonde per elettrostimolazione vanno utilizzate in combinazione con i programmi specifici presenti sul dispositivo.

RINFORZO MUSCOLI DENERVATI

I muscoli che hanno subito una totale o parziale denervazione non possono essere rinforzati tramite una normale corrente neuromuscolare ma hanno bisogno di un'onda particolare che vada a stimolare direttamente le fibre muscolari e non il nervo motore, come accade in un muscolo sano. I nostri dispositivi **GENESY 3000**, **GENESY 1500** e **GENESY 600** prevedono alcuni programmi specifici per il trattamento del muscolo con diversi gradi di denervazione.

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



ACQUISTA O **NOLEGGIA**
IL TUO DISPOSITIVO PER
L' Elettroterapia

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ELETTROTHERAPIA

- MAL DI SCHIENA • DOLORI CERVICALI
- DOLORI ARTICOLARI • INCONTINENZA



DOMINO SRL - 31013 Codognè (TV) - ITALIA - Tel. (+39) 0438.7933 | [YouTube](#) [in](#) [f](#) [@](#)
globuscorporation.com

Materiale informativo riservato agli operatori del settore.
Immagini e caratteristiche tecniche riportate in questo depliant non sono vincolanti e possono essere modificate in ogni momento dal produttore, senza l'obbligo di preavviso. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e trattamenti, per guardare i video dei prodotti e conoscere i nostri rivenditori, visita il sito.

TRATTAMENTI EFFICACI PER

RIDUZIONE DEL DOLORE

Grazie alle correnti Tens è possibile ottenere un immediato sollievo dal dolore di diversa natura. L'elettrostimolatore emette dei piccoli impulsi di corrente che, attraverso l'applicazione di elettrodi sulla pelle, alleviano il dolore.

La corrente Tens si può applicare anche tutti i giorni e durante il suo utilizzo si avvertirà un leggero formicolio sulla parte trattata. L'effetto analgesico è molto rapido ed è praticamente privo di effetti collaterali.

Le correnti Tens sono il trattamento ideale per dolori cervicali, lombalgie, sofferenze alle ginocchia o alle spalle. **PROVALE!**




Se soffri di lombalgia puoi acquistare la fascia opzionale, che ti permetterà di effettuare dei trattamenti Tens in modo molto semplice e confortevole. Con la stessa fascia è possibile inoltre effettuare dei programmi per il rinforzo della muscolatura addominale.

RECUPERO MUSCOLARE

In seguito a traumi o patologie croniche, può capitare di avere una perdita importante del tono muscolare. Questa situazione è particolarmente evidente prima e dopo interventi chirurgici agli arti inferiori ma può essere anche una conseguenza di artrosi, infiammazioni, condropatie, ecc.

In questi casi non è semplice riuscire a recuperare il tono muscolare solamente con l'esercizio fisico perché il movimento può essere complicato e doloroso. L'elettrostimolazione, invece, permette di fare un lavoro muscolare molto intenso, rimanendo praticamente seduti a CASA PROPRIA!

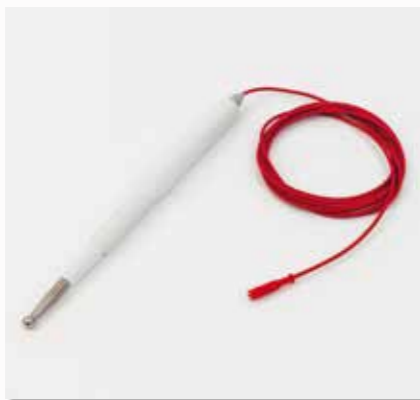

La penna (accessorio opzionale) permette di identificare i punti motori sulla superficie muscolare. L'applicazione degli elettrodi in corrispondenza dei punti motori produce una migliore contrazione muscolare.

I TOP DI GAMMA

Questi elettrostimolatori sono rivolti a personale medico e fisioterapico che utilizza il dispositivo per scopi professionali. Gli elettrostimolatori **GENESY 3000** e **GENESY 1500** hanno tutte le correnti utilizzate in riabilitazione oltre che diverse funzioni che consentono di personalizzare la stimolazione in base alle esigenze del paziente.

GENESY 3000

- 423 PROGRAMMI
- **PRODOTTO INDICATO PER IL PROFESSIONISTA DELLA RIABILITAZIONE**
- **TUTTI I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI IN BASE ALLE SINGOLE ESIGENZE**
- **IL DISPOSITIVO INCLUDE ANCHE CORRENTI INTERFERENZIALI E KOTZ**



SPECIFICHE

Intensità: 0-120mA per canale
Frequenza: 0,3-150Hz
Larghezza impulso: 40-450Hz

PROGRAMMI

236 MENÙ ELETTROTHERAPIA | 53 SPORT
33 DOLORE | 29 FITNESS
23 MICROCORRENTI | 16 BELLEZZA
11 REHAB | 9 DENERVATO
9 INTERFERENZIALI
3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

GENESY 1500

- 414 PROGRAMMI
- **PRODOTTO PORTATILE PROFESSIONALE, RIVOLTO A MEDICI E FISIOTERAPISTI**
- **INCLUDE FUNZIONALITÀ DI START AND STOP DEL PROGRAMMA (FUNZIONE ACTION NOW) PARTICOLARMENTE UTILE DURANTE LA RIEDUCAZIONE MOTORIA**
- **IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI IN POCO SPAZIO**



SPECIFICHE

Intensità: 0-120mA per canale
Frequenza: 0,3-150Hz
Larghezza impulso: 40-450Hz

PROGRAMMI

92 MENÙ ELETTROTHERAPIA | 84 ACTION NOW
54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
53 SPORT | 33 DOLORE | 29 FITNESS
23 MICROCORRENTI | 16 BELLEZZA | 11 REHAB
9 DENERVATO | 6 INTERFERENZIALI
3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

COMPLETI E MANEGGEVOLI

Questa linea di elettrostimolatori a 4 canali è consigliata ad un pubblico domiciliare esigente, che intende avere un prodotto professionale e allo stesso tempo semplice nel suo utilizzo, adatto alle diverse necessità familiari. Questi elettrostimolatori contengono anche le Microcorrenti, utilissime correnti ideali per trattare diversi tipi di problemi muscolo-scheletrici.

GENESY 600

- 149 PROGRAMMI
- **ELETTROSTIMOLATORE DOMICILIARE TOP DI GAMMA**
- **INCLUDE ANCHE PROGRAMMI PER IL MUSCOLO DENERVATO**



SPECIFICHE

Intensità: 0-120mA per canale
Frequenza: 0,3-150Hz
Larghezza impulso: 40-450Hz

PROGRAMMI

53 SPORT | 29 FITNESS | 20 DOLORE
12 MICROCORRENTI
12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
11 REHAB | 7 ACTION NOW | 3 DENERVATO
1 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

GENESY 300 PRO

- 91 PROGRAMMI
- **COMPLETO DEI MIGLIORI PROGRAMMI PER IL DOLORE E LA CURA DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI**
- **POSSIBILITÀ DI CREARE E MEMORIZZARE NUOVI PROGRAMMI**



SPECIFICHE

Intensità: 0-120mA per canale
Frequenza: 0,3-150Hz
Larghezza impulso: 40-450Hz

PROGRAMMI

29 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE
20 DOLORE | 22 SPORT
12 MICROCORRENTI | 6 REHAB
1 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

FACILITÀ D'USO

Con la linea di elettrostimolatori a 2 canali è possibile effettuare i principali trattamenti analgesici per lombalgia, cervicalgia, artrosi, dolori muscolari. Il **GENESY S2** inoltre presenta una vasta libreria di programmi per la riabilitazione muscolare, ideali dopo un trauma o un intervento chirurgico.

GENESY S2

- 60 PROGRAMMI
- **COMPLETO DI APPLICAZIONI PER IL DOLORE E PER IL RINFORZO MUSCOLARE**
- **ADATTO A TRATTAMENTI PER IL RINFORZO DEL PAVIMENTO PELVICO**



SPECIFICHE

Intensità: 0-100mA per canale
Frequenza: 1-150Hz
Larghezza impulso: 50-400Hz

PROGRAMMI

16 TENS E DOLORE | 12 SPORT
11 REHAB | 9 PREVENZIONE
8 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE
3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

DUO TENS

- 20 PROGRAMMI
- **SEMPLICITÀ DI UTILIZZO**
- **CONTIENE I PRINCIPALI PROGRAMMI ANTALGICI**



SPECIFICHE

Intensità: 0-100mA per canale
Frequenza: 1-150Hz
Larghezza impulso: 50-400Hz

PROGRAMMI

16 TENS E DOLORE | 3 SPORT
1 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE