

# PRESSCARE G-SPORT<sup>3</sup>

## PRESOTERAPIA | 3 PROGRAMAS DE INFLACIÓN


DISPOSITIVO PARA LA COMPRESIÓN NEUMÁTICA DISEÑADO PARA LOS DEPORTISTAS, CREADO PARA ACELERAR LA RECUPERACIÓN MUSCULAR Y LA FATIGA TRAS ENTRENAMIENTO O COMPETICIÓN. LIGERO Y TRANSPORTABLE, LA POWER BANK QUE INCLUYE PERMITE REALIZAR UN TRATAMIENTO INCLUSO AL TERMINAR UNA COMPETICIÓN, DIRECTAMENTE EN LA PISTA.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Salidas</b>
2
<b>Programas</b>
3
<b>Presión</b>
0-180 mmHg ±10%
<b>Temporizador</b>
hasta 99 min
<b>Alimentación</b>
- A red, 100-240 V AC, 50-60 Hz - Baterías recargables (Power Bank)
<b>Tamaño</b>
180x190x135 mm
<b>Peso</b>
3 Kg

### DOTACIÓN

· 1 Bolso
· 1 Unidad de motor G-SPORT <sup>3</sup>
· 2 Funda de pierna tamaño "S" o "M" o "L"
· 2 Cables para la conexión
· 1 Alimentador
· 1 Power Bank
· 1 Manual operativo

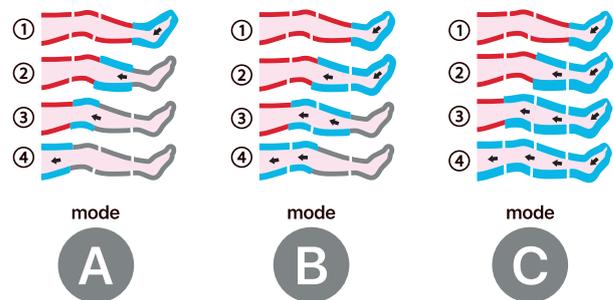

**MODE A:** la secuencia del programa infla y desinfla las secciones de la pierna de una en una, empezando en la zona más baja (pie o mano) hasta llegar a la zona más alta.

**MODE B:** la secuencia del programa infla dos cámaras a la vez, simulando la función de un masaje manual.

**MODE C:** la secuencia del programa ejerce la presión empezando por los pies y manteniendo infladas las cámaras hasta inflar toda la pierna (o brazo o abdomen) hasta la ingle.



# PRESSCARE G-SPORT<sup>3</sup>

## PRESOTERAPIA | 3 PROGRAMAS DE INFLACIÓN

### TAMAÑO DE ACCESORIOS (4 SECCIONES)


Rev. Es\_01\_2022

FUNDAS DE PIERNA TALLA "S"	(A) LONGITUD INGLE - TALÓN 72 cm (B) CIRCUNFERENCIA MUSLO 60 cm con EXTENSIÓN 70 cm (C) CIRCUNFERENCIA TOBILLO 37 cm con EXTENSIÓN 42 cm
-------------------------------	--


FUNDAS DE PIERNA TALLA "M"	(A) LONGITUD INGLE - TALÓN 82 cm (B) CIRCUNFERENCIA MUSLO 67 cm con EXTENSIÓN 77 cm (C) CIRCUNFERENCIA TOBILLO 37 cm con EXTENSIÓN 42 cm
-------------------------------	--

FUNDAS DE PIERNA TALLA "L"	(A) LONGITUD INGLE - TALÓN 92 cm (B) CIRCUNFERENCIA MUSLO 74 cm con EXTENSIÓN 84 cm (C) CIRCUNFERENCIA TOBILLO 40 cm con EXTENSIÓN 45 cm
-------------------------------	--

FUNDA DE BRAZO	(A) 84 cm - (B) 63 cm (C) CIRCUNFERENCIA HOMBRO 43 cm con EXTENSIÓN 53 cm (D) CIRCUNFERENCIA MUÑECA 31 cm con EXTENSIÓN 36 cm
----------------	---

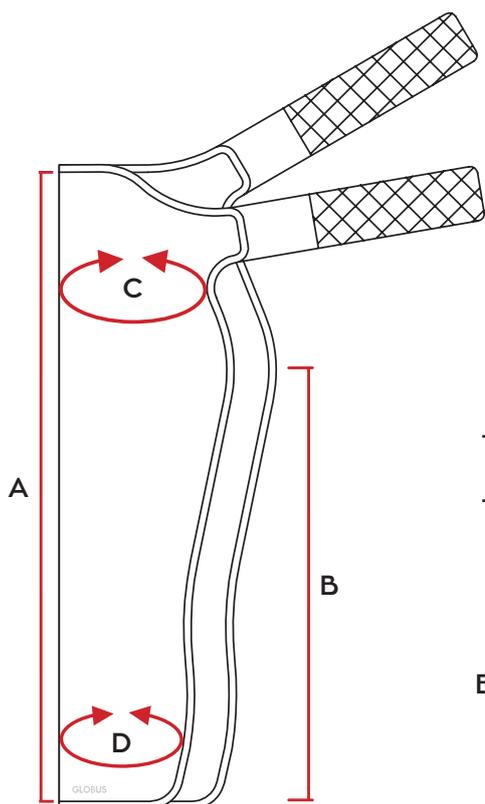

BANDA ABDOMINAL	(A) 133 cm - (B) 38 cm CIRCUNFERENCIA ABDOMEN da 82 cm a 114 cm
-----------------	--

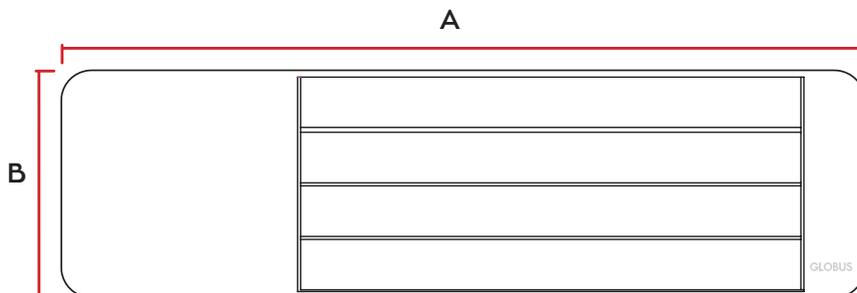

CABLE DIVISOR para usar tres accesorios al mismo tiempo	CABLE INDIVIDUAL
---	------------------

NOTA: Todas las **EXTENSIONES** deben considerarse un accesorio opcional disponible bajo pedido.

Los **ACCESORIOS**, según el tipo de configuración pueden ser opcionales o suministrados