

SWING PRO

ELECTROTERRAPIA 4 CANALES | 400 PROGRAMAS

IDEAL PARA EL GOLFISTA AMATEUR Y PROFESIONAL.

84 ACTION NOW | 60 BELLEZA | 58 FITNESS | 53 DEPORTE | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
36 DEPORTES ESPECIALES | 23 MICROCORRIENTES | 13 ARRUGAS-PIEL | 12 TENS Y DOLOR | 3 REHAB
3 INCONTINENCIA | 1 IONOFORESIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

0,3-150 Hz *

Amplitud de impulso

40-450 µs *

Potencia

0-120 mA por canal

Alimentación

Baterías recargables

Tamaño

100x160x35 mm

Peso

450 gr

* De acuerdo al tipo de corriente




CE
0476



DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Electro-estimulador SWING PRO
- 1 Manípulo G-Trode
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorriente e ionoforesis
- 4 Electrodo autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodo autoadhesivos rectangulares
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual operativo

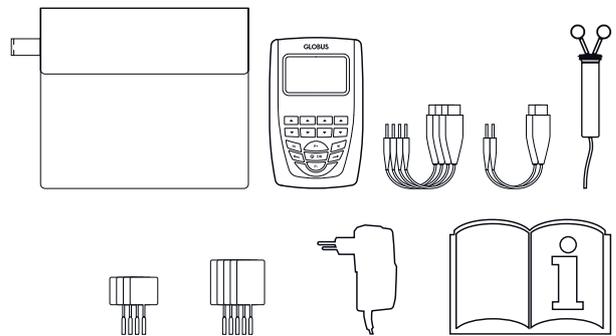

- TENS TENS
- MENS MENS
- IONO IONO
- 3S 3S
- FN ACTION NOW
- RUN TIME RUN TIME
- LAST 10 LAST 10
- FUNCIÓN FAVORITOS FAVORITES
- AUTO STIM AUTO STIM
- MULTI USER MULTI USER
- PROGRAMABLE PROGRAMABLE
- STIM LOCK STIM LOCK
- FUNCIÓN 2+2 FUNCIÓN 2+2
- MY TRAINER MY TRAINER
- SYNCHRO STIM SYNCHRO STIM
- WORK TIME WORK TIME
- BATERÍA RECARGABLE BATTERY RECHARGEABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

SWING PRO

ELECTROTERRAPIA 4 CANALES | 400 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

DEPORTE

Capilarización
Calentamiento
Calentamiento pre-competición
Recuperación activa
Fuerza máxima
Fuerza resistente
Fuerza explosiva
Resistencia aeróbica
Reactividad
Recuperación post-competición
Descontracturante
Hipertrofia

FITNESS

Reafirmación
Reafirmación Bio-Pulse
Modelado
Modelado Bio-Pulse
Tonificación
Aumento masa
Modelado cuerpo
Definición
Jogging
Fitness anaeróbico
Fitness aeróbico
Prevención calambres

BELLEZA

Drenaje
Drenaje Bio-Pulse
Lipolisis
Lipolisis postparto
Masaje relajante Bio-Pulse
Masaje energizante
Masaje tonificante
Masaje conectival
Brazos hinchados
Capilarización cara
Mejora tono piel
Drenaje postparto
Reafirmación postparto
Reafirmación senos
Modelado senos
Efecto Lifting
Definición

ARRUGAS - PIEL G-PULSE

Microlifting senos
Microlifting escote
Microlifting cara
Elasticidad piel
Imperfecciones celulitis
Colágeno BioSkin
Arrugas
Arrugas ojos
Arrugas de expresión
Estrías
Fortalecimiento uñas
Bio peeling
Hematoma

REHAB

Atrofia cuádriceps (con prótesis rodilla)
Recuperación post LCA
Prevención subluxación hombro

TENS Y DOLOR

Tens antálgico convencional
Tens antálgico modulado
Tens endorfinico
Dolor menstrual
Dolor crónico
Dolor cervical
Dolor muscular
Dolor rodilla
Periartritis escapulo-humeral
Lumbalgia crónica
Bursitis-tendinitis
Osteoartritis

MICROCORRIENTES

Epicondilitis
Periartritis escapulo-humeral
Restablecimiento muscular
Contusión
Edema
Úlcera piel
Ciática
Lumbalgia
Neuralgia braquial
Dolor agudo
Dolor articular
Torlcolis
Latigazo cervical
Espondilosis cervical
Distorsión hombro
Túnel carpiano
Distorsión rodilla
Osteoartritis
Distorsión tobillo
Inflamación tendón Aquiles
Inflamación tendón rotuliano
Inflamación manguito rotador
Inflamación tendón

INCONTINENCIA

Incontinencia mixta
Incontinencia estrés
Incontinencia urge

IONOFORESIS

DEPORTES ESPECIALES

- GOLF

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista de los programas "3s" incluye 54 combinaciones de parámetros.

Los programas "3S" están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Serial Sequential Stimulation permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados.

ACTION NOW

Action now

La lista de los programas Action Now incluye 84 combinaciones de parámetros.

Los programas Action Now son particularmente indicados para poder asociar y sincronizar la estimulación eléctrica con una acción voluntaria