

PRESSCARE G-SPORT³

PRESSOTHÉRAPIE | 3 PROGRAMMES D'INFLATION


DISPOSITIF DE COMPRESSION PNEUMATIQUE ADRESSÉ AUX SPORTIFS POUR LA RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE DE VITESSE ET LA FORCE POST-ENTRAÎNEMENT ET COMPÉTITION. LÉGÈRE ET TRANSPORTABLE PARTOUT, LA BANQUE DE PUISSANCE EST ÉQUIPÉE POUR EFFECTUER UN TRAITEMENT MÊME IMMÉDIATEMENT APRÈS UNE COMPÉTITION, DIRECTEMENT AU BORD DU TERRAIN.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sortie
2
Programmes
3
Pression
0-180 mmHg ±10%
Minuterie
jusqu'à 99 minutes
Alimentation
- Secteur, 100-240 V AC, 50-60 Hz - Batterie recharg. (Banque de puissance)
Taille
180x190x135 mm
Poids
3 Kg

EQUIPEMENT

- 1 Sacochette de transport
- 1 Unité de moteur G-SPORT³
- 2 Botte taille "S" ou taille "M" ou taille "L"
- 2 Câbles pour connecter
- 1 Alimentateur
- 1 Banque de puissance
- 1 Manuel d'utilisation

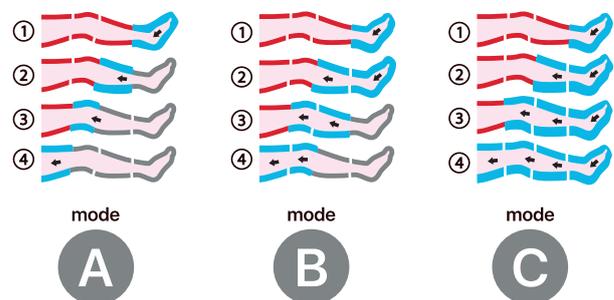

MODE A: la séquence du programme prévoit le gonflement et le dégonflement de la botte un secteur à la fois, à partir de la partie la plus distale (pied ou main) jusqu'à la partie la plus proximale.

MODE B: la séquence du programme prévoit le gonflement de deux chambres à la fois, en simulant la fonction des bottes à chambres superposées.

MODE C: la séquence du programme effectue la pression à partir du pied et en gardant les chambres précédentes gonflées jusqu'au moment où la jambe entière (ou bras ou abdomen) est gonflée au niveau de l'aîne.




PRESSCARE G-SPORT³


PRESSOTHÉRAPIE | 3 PROGRAMMES D'INFLATION

TAILLE DES ACCESSOIRES (4 SECTIONS)

BOTTES TAILLE "S"	(A) LONGUEUR AINE - TALON 72 cm (B) TOUR DE CUISSE 60 cm avec EXTENSION 70 cm (C) CIRCONFÉRENCE CHEVILLE 37 cm avec EXTENSION 42 cm
BOTTES TAILLE "M"	(A) LONGUEUR AINE - TALON 82 cm (B) TOUR DE CUISSE 67 cm avec EXTENSION 77 cm (C) CIRCONFÉRENCE CHEVILLE 37 cm avec EXTENSION 42 cm
BOTTES TAILLE "L"	(A) LONGUEUR AINE - TALON 92 cm (B) TOUR DE CUISSE 74 cm avec EXTENSION 84 cm (C) CIRCONFÉRENCE CHEVILLE 40 cm avec EXTENSION 45 cm
MANCHON	(A) 84 cm - (B) 63 cm (C) CIRCONFÉRENCE ÉPAULE 43 cm avec EXTENSION 53 cm (D) CIRCONFÉRENCE POIGNET 31 cm avec EXTENSION 36 cm

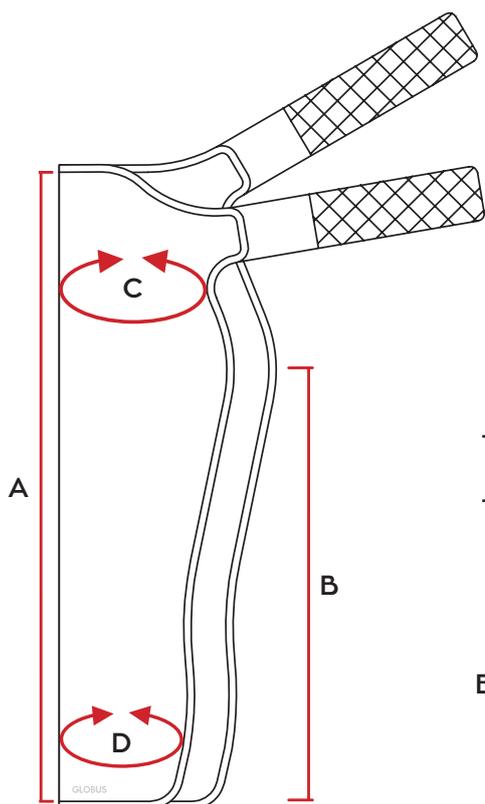

BANDE ABDOMINALE	(A) 133 cm - (B) 38 cm CIRCONFÉRENCE ABDOMINALE de 82 cm à 114 cm
------------------	--

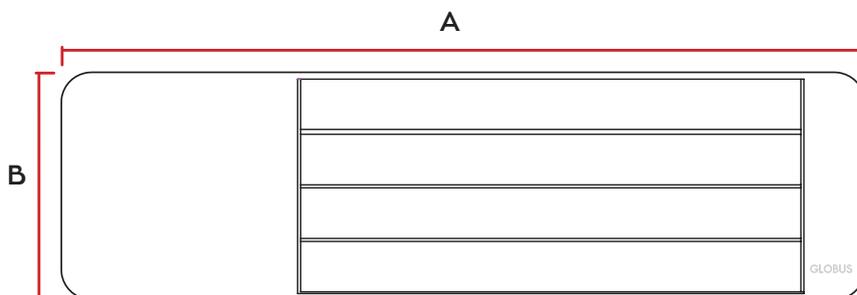

CÂBLE DOUBLEUR pour utiliser trois accessoires en même temps	CÂBLE UNIQUE
--	--------------

N.B. Toutes les **EXTENSIONS** doivent être considérées comme un accessoire optionnel disponible sur demande.

Les **ACCESSOIRES**, selon le type de configuration, peuvent être en option ou fournis.