

# GENESY 600

## ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 149 PROGRAMMES

PRODUIT PROFESSIONNEL À QUATRE CANAUX POUR LES UTILISATEURS EXIGEANTS ET POUR LES PROFESSIONNELS DE LA REHABILITATION.

53 SPORT | 29 FITNESS | 20 DOULEUR | 12 MICRO-COURANTS | 12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 11 REHAB  
7 ACTION NOW | 3 DENÉRVÉ | 1 INCONTINENCE | 1 IONOPHORÈSE

### TECHNICAL FEATURES

#### Écran

Taille de la zone visible 2,6"

#### Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

#### Fréquence

0,3-150 Hz \*

#### Largeur d'impulsion

40-450 µs \*

#### Puissance

0-120 mA chaque canal

#### Alimentation

Batterie rechargeable

#### Taille

100x160x35 mm



#### Poids

450 gr


\* Selon le type de courant

### EQUIPEMENT

- 1 Sacochette de transport
- 1 Électrostimulateur GENESY 600
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation

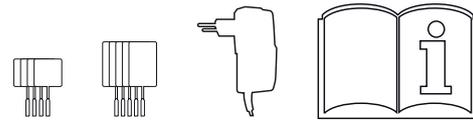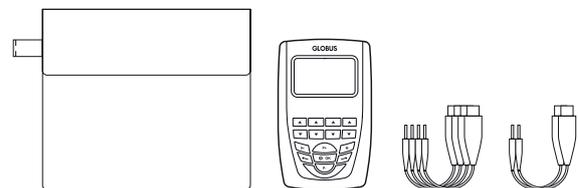

CE  
0476

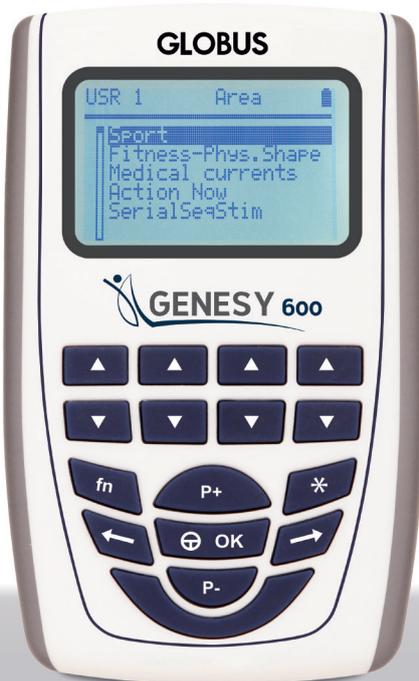

TENS TENS

MENS EMS

IONO IONO

3S 3S

ACTION NOW ACTION NOW

RUN TIME RUN TIME

LAST 10 LAST 10

FAVORIS FAVORIS

MULTI USER MULTI USER

PROGRAMMABLE PROGRAMMABLE

STIM LOCK STIM LOCK

2+2 FONCTION 2+2

MY TRAINER MY TRAINER

AUTO STIM AUTO STIM

SYNCHRO STIM SYNCHRO STIM

WORK TIME WORK TIME

BATTERIE RECHARGEABLE BATTERIE RECHARGEABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# GENESY 600

## ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 149 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

Rev. Fr\_05\_2022

#### RÉHABILITATION

Cheville gonflées

Atrophie

Hémiplégie membres supérieurs

Hémiplégie membres inférieurs

Rétablissement post-intervention LCA

Rétablissement fonctionnel

Rééducation cheville

Rééducation jambe

Spasmes musculaires

Prévention subluxation de l'épaule

Renforcement vaste

Agoniste/Antagoniste

Recherche points moteurs

Renforcement musculaire

#### DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle

Tens antalgique basse fréquence

Douleurs menstruelles

Tens antalgique modulée

Douleur genou

Tens des endorphines

Douleur post-intervention

Douleur chronique

Syndrome scapulo-huméral

Canal carpien

Douleur trapèze

Tendinite coiffe rotateurs

Douleur musculaire

Sciatalgie

Lombalgie chronique

Douleurs cervicales

Bursites – tendinites

Fractures osseuses

Épicondylite

Ostéoarthrite

#### IONOPHORÈSE

Ionophorèse

#### INCONTINENCE

Incontinence mixte

#### MICRO-COURANTS

Épicondylite

Périarthrite scapulo-humérale

Contusion

Sciatalgie

Lombalgie

Douleur aiguë

Douleur articulaire

Torticolis

Coup de lapin

Entorse à l'épaule

Entorse genou

Inflammation tendineuse

#### DENERVÉ

Triangulaire (bas niveau dénervation)

Trapézoïdal (moyen niveau dénervation)

Rectangulaire (haut niveau dénervation)

#### SPORT

Capillarisation

Echauffement

Echauffement pré-compétition

Récupération active

Force maximale

Force résistante

Force explosive

Résistance Aérobique

Réactivité

Récupération post-compétition

Décontractant

Hypertrophie

#### FITNESS

Raffermissment

Raffermissment Bio-Pulse

Modelage

Modelage Bio-Pulse

Tonification

Augmentation masse

Modelage corps

Définition

Jogging

Fitness anaérobie

Fitness aérobie

Prévention crampes

#### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La liste des programmes "3S" comprend 12 combinaisons de paramètres.

Les programmes "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées.

#### ACTION NOW

La liste de programmes Action Now comprend 7 combinaisons de paramètres.

Les programmes Action Now sont particulièrement utiles pour associer et synchroniser la stimulation électrique avec une action volontaire.