

PREMIUM 400

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 258 PROGRAMMES

AVEC PLUS DE 250 PROGRAMMES PORTABLES, LE PREMIUM 400 EST L'ELECTROSTIMULATEUR IDEAL POUR LE SPORT ET POUR LA BEAUTE, POUR ELLE ET LUI.

58 FITNESS | 53 SPORT | 44 SPORTS SPÉCIAUX | 36 BEAUTÉ | 23 MICRO-COURANTS | 18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
12 TENS - DOULEUR | 7 ACTION NOW | 3 INCONTINENCE | 1 IONOPHORÈSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille de la zone visible 2,6"

Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

Fréquence

0,3-150 Hz *

Largeur d'impulsion

40-450 µs *

Puissance

0-120 mA chaque canal

Alimentation

Batterie rechargeable

Taille

100x160x35 mm


Poids

450 gr

* selon le type de courant

EQUIPEMENT

- 1 Sacoche de transport
- 1 Électrostimulateur PREMIUM 4000
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation

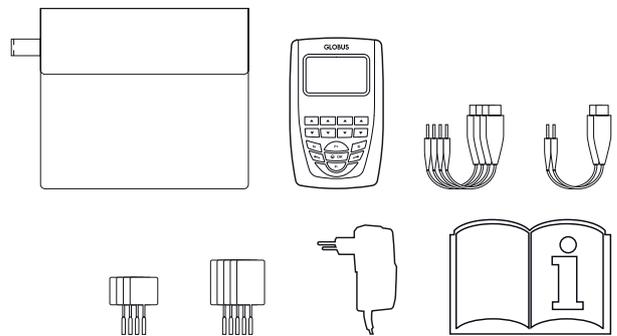

CE
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FAVORIS



MULTI USER



PROGRAMMABLE



STIM LOCK



FONCTION 2+2



MY TRAINER



SYNCHRO STIM



WORK TIME



BATTERY RECHARGEABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PREMIUM 400

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 258 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

SPORT

Capillarisation

Echauffement

Echauffement pre-compétition

Récupération active

Force maximale

Force résistante

Force explosive

Résistance aérobie

Réactivité

Récupération post-compétition

Décontractant

Hypertrophie

SPORTS SPÉCIAUX

Course

Ski de fond

Arts martiaux

Tennis

Football

Cyclisme

FITNESS

Raffermissement

Raffermissement Bio-Pulse

Modelage

Modelage Bio-Pulse

Tonification

Augmentation masse

Modelage corps

Définition

Jogging

Fitness anaérobie

Fitness aérobie

Prévention crampes

BEAUTÉ

Drainage

Drainage Bio Pulse

Lipolyse

Lipolyse post-accouchement

Massage tonifiant

Massage connectif

Bras gonflés

Capillarisation du visage

Amélioration ton de la peau

Drainage post-accouchement

Raffermissement post-accouchement

Raffermissement du sein

Modelage du sein

Effet lifting

RÉHABILITATION

Atrophie du quadric. (avec prot. au genou)

Rétablissement post-int. LCA

Prévention subluxation de l'épaule

TENS / DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle

Tens antalgique modulée

Tens des endorphines

Douleurs menstruelles

Douleur chronique

Douleurs cervicales

Douleur musculaire

Douleur genou

Périarthrite scapulo-humérale

Lombalgie chronique

Bursites - tendinites

Ostéoarthrite

MICRO-COURANTS

Epicondylite

Périarthrite s-h

Rétablissement musculaire

Contusion

Œdème

Ulcère de la peau

Sciatalgie

Lombalgie

Néuralgie brachiale

Douleur aiguë

Douleur articulaire

Torticolis

Coup de lapin

Spondylolyse cervicale

Entorse à l'épaule

Canal carpien

Entorse au genou

Ostéarthrite

Entorse cheville

Inflammation tendon d'Achille

Inflammation tendon rotule

Inflammation coiffe rotateurs

Inflammation tendineuse

INCONTINENCE

Incontinence mixte

Incontinence d'effort

Incontinence par urgence

IONOPHORÈSE

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La liste des programmes "3S" comprend 18 combinaisons de paramètres.

Les programmes "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées.

ACTION NOW

La liste de programmes Action Now comprend 7 combinaisons de paramètres.

Cette modalité est conseillée surtout dans le domaine sportif, pour une préparation athlétique où on souhaite ajouter la contraction musculaire provoquée par un stimulateur à l'effort exercé avec des surcharges en forme dynamique aussi bien qu'isométrique.