


KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO




MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

IL NUOVO KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO OLTRE AL DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA, CON I NUOVI PROGRAMMI DEDICATI AL CAVALLO, COMPRENDE GLI ACCESSORI PENSATI PER IL SUO TRATTAMENTO: COPERTA E COPRICOLLO TERAPEUTICI, SOLENOIDI FLESSIBILI CON RELATIVI CAVI SDOPPIATORI, UNA PRATICA CUSTODIA PORTA DISPOSITIVO E UNA FASCIA REGOLABILE UTILE PER FISSARE IL DISPOSITIVO AL CAVALLO. COMPLETANO IL KIT UNA COMODA BORSA PER IL TRASPORTO E DOPPIO PACCO BATTERIA. MAGNETOVET 4000 HORSE È IL NUOVO DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA A CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ELEVATA INTENSITÀ, PENSATO APPPOSITAMENTE PER IL TRATTAMENTO DEL CAVALLO. I QUATTRO CANALI DI USCITA CONSENTONO DI COLLEGARE I SOLENOIDI INSERITI NELLA COPERTA E NEL COPRICOLLO TERAPEUTICI, PERMETTENDO DI TRATTARE L'INTERA COLONNA VERTEBRALE DEL CAVALLO.

COPERTA TERAPEUTICA

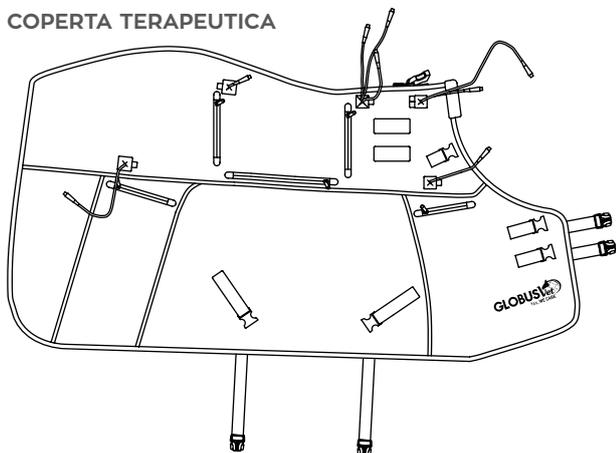

COPRICOLLO TERAPEUTICO

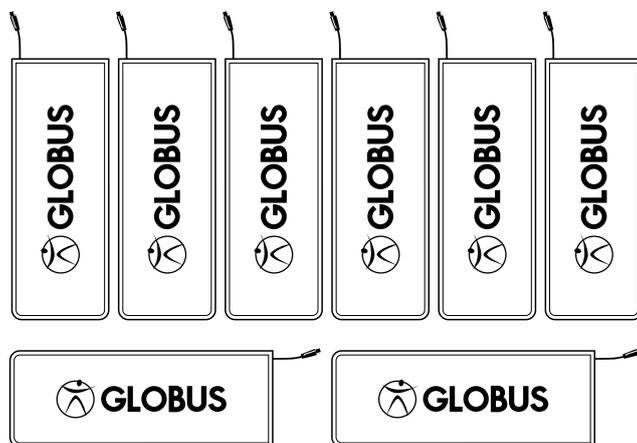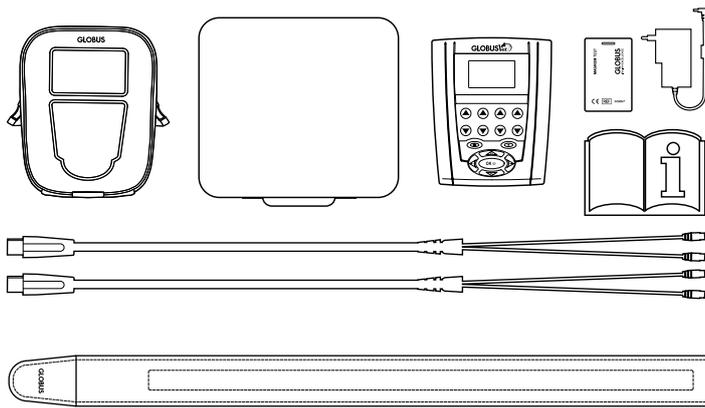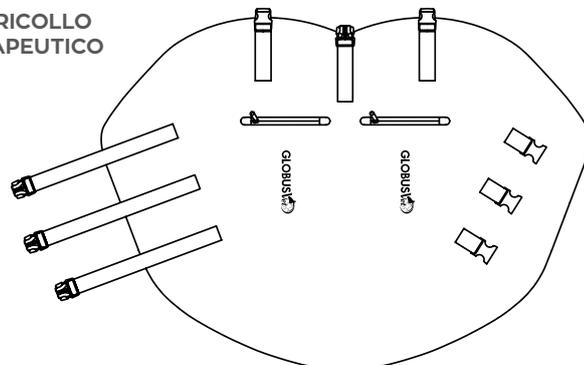

DOTAZIONE DI SERIE | Cod. G6593

- 1 Coperta terapeutica
- 1 Copricollo terapeutico
- 1 Custodia con tracolla per MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Borsa antiurto per trasporto dispositivo
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Pacco batteria (già all'interno del dispositivo)
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo
- 8 Solenoidi flessibili 40x15 cm per coperta e/o copricollo
- 2 Cavi sdoppiatori
- 1 Fascia velcrabile per fissaggio custodia
- 1 Borsone per trasporto Kit



DISPONIBILE SU RICHIESTA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI COMPATIBILI CON MAGNETOVET 4000 HORSE, OLTRE A QUELLI PRESENTI ALL'INTERNO DEL KIT

KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

Rev.It_04_2024

DISPOSITIVO MAGNETOVET 4000 HORSE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Canali

4

Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex
800 Gauss di media totali (per 4 canali)

Le potenze dichiarate si riferiscono agli accessori con due bobine. Nel caso di accessori con più bobine la potenza viene uniformemente distribuita

Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria 4000mAh incluso

Dimensioni

17x22x6 cm

Peso

1,37 Kg

ELENCO PROGRAMMI CAVALLO

I PROGRAMMI SONO SUDDIVISI PER I DISTRETTI ANATOMICI DI COLLO, DORSO E ARTI

Artrosi

Artrite

Frattura

Ritardo Consolidamento Frattura

Discopatia

Tendinopatia

Ferite

Ulcere

Antinfiammatorio

Trauma

Contusione

Edema osseo

Relax muscolare

Decontratturante

Attivazione PRE gara

Recupero POST gara

Lesione muscolare

ELENCO PROGRAMMI CANE/GATTO

I PROGRAMMI PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA CUCCIA TERAPEUTICA O DEI SOLENOIDI FLESSIBILI A 2 BOBINE, 30x10 cm

Frattura

Osteoartrosi

Discopatia

Cicattrizzazione

Dolore infiammatorio

CE



2+2 FUNZIONE 2+2

Last10 LAST 10

P10 PROGRAMMABILE

BATTERY PACCO BATTERIA

POWER ALIMENTAZIONE A RETE

KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

COPERTA TERAPEUTICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENTE, LAVABILE

Dimensioni

142 cm lunghezza dal garrese (A) alla coda (B)

Peso

1,80 Kg (senza solenoidi)

Taglia

Unica

Cinghie

5 di fissaggio, regolabili

3 di collegamento al copricollo terapeutico

Tasche

8 per inserimento solenoidi flessibili 40x15 cm a 4 bobine
2 centrali porta cavi

Maniglie

3 per il posizionamento della coperta

Cavi e prolunghie

Inclusi

Materiale

96% poliestere, 4% polipropilene



COPRICOLLO TERAPEUTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENTE, LAVABILE

Dimensioni

121 cm lunghezza dalle orecchie (A) al garrese (B)

Peso

560 gr (senza solenoidi)

Taglia

Unica

Cinghie

3 di fissaggio, regolabili

3 di collegamento alla coperta terapeutica

Tasche

2 per l'inserimento dei solenoidi flessibili 40x15 cm
a 4 bobine

Cavi e prolunghie

Inclusi

Materiale

94% poliestere, 3% polipropilene,
3% polietilene espanso



KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

Rev.It_04_2024



OPZIONI DI ACQUISTO

Cod. G6256 GAMBALE TERAPEUTICO ANTERIORE

**Cod. G6591 GAMBALE TERAPEUTICO ANTERIORE
CON SOLENOIDI A 2 BOBINE INCLUSE**



Cod. G6255 GAMBALE TERAPEUTICO POSTERIORE

**Cod. G6592 GAMBALE TERAPEUTICO POSTERIORE
CON SOLENOIDI A 4 BOBINE INCLUSE**



 **DOMINO S.R.L.**
Via Vittorio Veneto, 52
31013 Codognè (TV) - ITALY

 (+39) 0438 7933

 globuscorporation.com