

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

KINEO

MEDICAL

BEAUTY

SPORT

VET

CATALOGO 2024

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

CONTENUTI

CHI SIAMO	04
■ KINEO INTELLIGENT LOAD	06
■ MEDICAL	18
- TECAR TERAPIA	20
- MAGNETOTERAPIA	28
- ELETTROTHERAPIA	40
- ULTRASUONOTERAPIA	50
- LASER TERAPIA per fisioterapia	54
- LASER TERAPIA per podologia	64
- PRESSOTERAPIA	70
■ BEAUTY & WELLNESS	74
- TECAR BEAUTY	76
- ELETTROSTIMOLAZIONE	86
- RADIOFREQUENZA	98
- ULTRASUONO	102
■ SPORT	108
- ELETTROSTIMOLAZIONE	110
- PRESSOTERAPIA	118
- RELAX	120
- PEDANA VIBRANTE	124
- SPARAPALLONI	126
■ ACCESSORI	134
- TECAR TERAPIA E TECAR BEAUTY	136
- MAGNETOTERAPIA	144
- ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE	147
- ULTRASUONOTERAPIA	151
- LASER TERAPIA	152
- RADIOFREQUENZA	153
- PRESSOTERAPIA	154
- SPARAPALLONI	156
■ VETERINARIA	158
- TECAR TERAPIA	160
- MAGNETOTERAPIA	162
- ELETTROTHERAPIA	168
- ULTRASUONOTERAPIA	172
- LASER TERAPIA	174
- ACCESSORI	178
■ LEGENDA PUNTI FORZA	182

CHI SIAMO

GLOBUS è un'azienda leader mondiale nella produzione di apparecchiature elettromedicali portatili da oltre 30 anni. La nostra vasta gamma comprende linee complete di prodotti per elettroterapia, diatermia, ultrasuonoterapia, magnetoterapia, laserterapia, pedane vibranti e un sistema di valutazione funzionale.

LA NOSTRA MISSION

La mission di **GLOBUS** è quella di contribuire alla promozione della salute e del benessere nel mondo fornendo prodotti di alta qualità ai professionisti della riabilitazione e della fisioterapia, così come agli utenti privati, che desiderino migliorare la propria qualità della vita in totale sicurezza beneficiando delle più moderne tecnologie disponibili oggi sul mercato.

LA NOSTRA STORIA

GLOBUS è stata fondata nel 1984 a Codognè, in provincia di Treviso, dal suo attuale Presidente e Amministratore Delegato, Pierpaolo Lucchetta, bronzo nella pallavolo alle olimpiadi di Los Angeles e professionista pluripremiato fino al 1994.

L'esperienza di atleta di alto livello del suo presidente è stata fondamentale per **GLOBUS** sia nell'ideazione che nello sviluppo di diverse linee di prodotto mirate al trattamento di molteplici problemi fisici, al potenziamento muscolare e al miglioramento generale delle performance sportive. Per poter sviluppare prodotti sicuri, efficaci ed altamente tecnologici, **GLOBUS** si avvale di numerose collaborazioni con università e istituti di ricerca di tutto il mondo e si attiene scrupolosamente alle più rigorose linee guida in ambito scientifico.

Oggi **GLOBUS** è un'azienda leader nel settore della riabilitazione e della fisioterapia ed esporta in più di 50 paesi nel mondo. I prodotti **GLOBUS** sono certificati UNI CEI EN ISO 13485:2012 e CE del Sistema di Garanzia della Qualità in Europa, FDA negli Stati Uniti, ed IEx in Brasile.





KINEO INTELLIGENT LOAD

CONTENUTI

- KINEO MULTISTATION	08
- KINEO PULLEY & SQUAT	09
- KINEO LEG PRO	10
- KINEO LEG PRESS	11
- KINEO CROSSOVER CABLE	12
- ACCESSORI	14

KINEO MULTISTATION

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K0155M | Cod. K0155

Dimensioni (LxPxH)

260x90x185 cm

Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

305x90x185 cm

Peso

342 Kg

Motore elettrico

Potenza nominale 1,6kW

Alimentazione

Tensione: 230V - Frequenza: 50/60Hz

Corrente massima: 8A

Massima estrazione fune

4 m

Carico Min/Max Leg Extension

10-630nm

Carico Min/Max Pulley

1-110 Kg

Carico Min/Max Squat

1-220 Kg (fino a 440 Kg con accessorio dedicato)

Velocità Isocinetiche Min/Max

0,1-4m/s

Velocità Isocinetiche Min/Max Leg Extension

12-778°/s

CONFORMITÀ



FUNZIONALITÀ

· Ampia gamma di test ISOCINETICI, ISOMETRICI E DINAMICI per il monitoraggio continuo del processo riabilitativo

· Connessione Wi-Fi e controllo remoto

· 2 schermi touch-screen da 15,6"

· 2 prese di connessione USB

· Memoria integrata e archiviazione automatica

· Pellame italiano di alta qualità

HARDWARE

· Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata

· Postazione di lavoro Pulley

· Postazione di lavoro Leg Extension

· Postazione di lavoro Squat

ACCESSORI

· Kit Leg Curl

· Kit Leg Press

· Lat Machine

· Piattaforma Squat di legno

METODI DI ALLENAMENTO



WARM UP



ISOTONICO
CON E SENZA INERZIA



ELASTICO



SMART VISCOSO



ISOMETRICO



ISOCINETICO



CARICO VARIABILE



KINEO PULLEY & SQUAT

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K0156M | · Cod. K0156

Dimensioni (LxPxH)

185x90x185 cm

Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

185x90x185 cm

Peso

274 Kg

Motore elettrico

Potenza nominale 1,6kW

Alimentazione

Tensione: 230V - Frequenza: 50/60Hz

Corrente massima: 8A

Massima estrazione fune

4 m

Carico Min/Max Pulley

1-110 Kg

Carico Min/Max Squat

1-220 Kg (fino a 440 Kg con accessorio dedicato)

Velocità Isocinetiche Min/Max

0,1-4m/s

CONFORMITÀ



FUNZIONALITÀ

· Ampia gamma di test ISOCINETICI, ISOMETRICI E DINAMICI per il monitoraggio continuo del processo riabilitativo

· Connessione Wi-Fi e controllo remoto

· 2 schermo touch-screen da 15,6"

· 2 prese di connessione USB

· Memoria integrata e archiviazione automatica

· Pellame italiano di alta qualità

HARDWARE

· Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata

· Postazione di lavoro Pulley

· Postazione di lavoro Squat

ACCESSORI

· Kit Leg Curl

· Kit Leg Press

· Lat Machine

· Piattaforma Squat di legno

METODI DI ALLENAMENTO



WARM UP



ISOTONICO
CON E SENZA INERZIA



ELASTICO



SMART VISCOSO



ISOMETRICO



ISOCINETICO



CARICO VARIABILE



KINEO LEG PRO

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K0417M | · Cod. K0417

Dimensioni (LxPxH)

260x90x185 cm

Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

310x90x185 cm

Peso

365 Kg

Motore elettrico

Potenza nominale 1,6kW

Alimentazione

Tensione: 230V - Frequenza: 50/60Hz

Corrente massima: 8A

Carico Min/Max Leg Extension

10-630nm

Carico Min/Max Leg Curl

1-110 Kg

Velocità Isocinetiche Min/Max

0,1-4m/s

Velocità Isocinetiche Min/Max Leg Extension

12-778°/s

CONFORMITÀ



FUNZIONALITÀ

· Ampia gamma di test ISOCINETICI, ISOMETRICI E DINAMICI per il monitoraggio continuo del processo riabilitativo

· Connessione Wi-Fi e controllo remoto

· 2 schermi touch-screen da 15,6"

· 2 prese di connessione USB

· Memoria integrata e archiviazione automatica

· Pellame italiano di alta qualità

HARDWARE

· Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata

· Postazione di lavoro Leg Extension

· Postazione di lavoro Leg Curl

ACCESSORI

· Kit Leg Press

· Kit Squat

· Piattaforma Squat di legno

METODI DI ALLENAMENTO



WARM UP



ISOTONICO
CON E SENZA INERZIA



ELASTICO



SMART VISCOSO



ISOMETRICO



ISOCINETICO



CARICO VARIABILE



KINEO LEG PRESS

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K1350M | · Cod. K2004

Dimensioni (LxPxH)

320x75x170 cm

Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

320x75x170 cm

Peso

500 Kg

Motore elettrico

Potenza nominale 1,6kW

Alimentazione

Tensione: 230V - Frequenza: 50/60Hz

Corrente massima: 8A

Carico Min/Max

10-440 Kg

Velocità Isocinetiche Min/Max

0,1-4m/s

CONFORMITÀ



CE
0476

CE

FUNZIONALITÀ

- Ampia gamma di test ISOCINETICI, ISOMETRICI E DINAMICI per il monitoraggio continuo del processo riabilitativo
- Connessione Wi-Fi e controllo remoto
- Schermo touch-screen da 15,6"
- Seduta regolabile in profondità, schienale regolabile in 7 posizioni
- Memoria integrata e archiviazione automatica
- Pellame italiano di alta qualità

HARDWARE

- Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata
- Postazione di lavoro Leg Press

ACCESSORI

- Cuscinetto propriocettivo con aggancio magnetico facilitato
- Kit Chest Press

METODI DI ALLENAMENTO



WARM UP



ISOTONICO
CON E SENZA INERZIA



ELASTICO



SMART VISCOSO



ISOMETRICO



ISOCINETICO



CARICO VARIABILE



KINEO CROSSOVER CABLE



KINEO CROSSOVER CABLE È L'UNIONE DI DUE DISPOSITIVI KINEO DOTATI DI ACCESSORIO LAT MACHINE, CHE VENGONO COLLEGATI TRAMITE UN PONTE CENTRALE. QUESTO PERMETTE DI AVERE NUOVE POSSIBILITÀ E NUOVE GEOMETRIE PER ESERCIZI AL CAVO LIBERO, PERMETTENDO ALL'UTENTE DI UTILIZZARE UN CAVO PER OGNI ARTO. I DUE DISPOSITIVI KINEO FUNZIONANO INDIPENDENTEMENTE L'UNO DALL'ALTRO, CON LE TRADIZIONALI FUNZIONI SOFTWARE IN DOTAZIONE.



ACCESSORI

KIT LEG PRESS

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K1161

Dimensioni (LxPxH)

220x75x170 cm

Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

220x75x170 cm

Peso

230 Kg

Peso massimo seduta

135 Kg

Carico Min/Max*

10-440 Kg

Velocità Isocinetiche Min/Max*

0,1-4m/s

* I dati tecnici fanno riferimento al dispositivo KINEO connesso.

KINEO LEG PRESS "Accessorio" non può funzionare autonomamente.

FUNZIONALITÀ

· Seduta regolabile in profondità, schienale regolabile in 7 posizioni

· Pellame italiano di alta qualità

HARDWARE

· Postazione di lavoro Leg Press e Rowing con inclusa la barra per Rowing

· Ruote con sistema di bloccaggio

ACCESSORI

· Cuscinetto propriocettivo con aggancio magnetico facilitato

· Kit Chest Press

CONFORMITÀ



ACCESSORI



F 01. LAT MACHINE

K1640 | KIT LAT MACHINE, COMPOSTO DA BRACCIO LAT MACHINE E PANCA LAT MACHINE

K0495 | BRACCIO LAT MACHINE

F 01



F 02. PONTE DI COLLEGAMENTO PER 2 LAT MACHINES

K0329 | PONTE PER 2 LAT MACHINES

F 02



F 03. PANCA PER LAT MACHINE

K0378 | PANCA PER LAT MACHINE

F 03



F 04. STEP

K0034 | STEP

F 04



F 05. KIT LEG CURL

K0133 | KIT LEG CURL

F 05

ACCESSORI



F 06. KIT SQUAT

KO449 | KIT SQUAT

F 06



F 07. PIATTAFORMA JUMP

KO393 | PIATTAFORMA JUMP

F 07



F 08. KIT CHEST PRESS

K2201 | KIT CHEST PRESS


F 08



F 09. CARRELLO ACCESSORI KINEO

KO762 | CARRELLO ACCESSORI KINEO

F 09

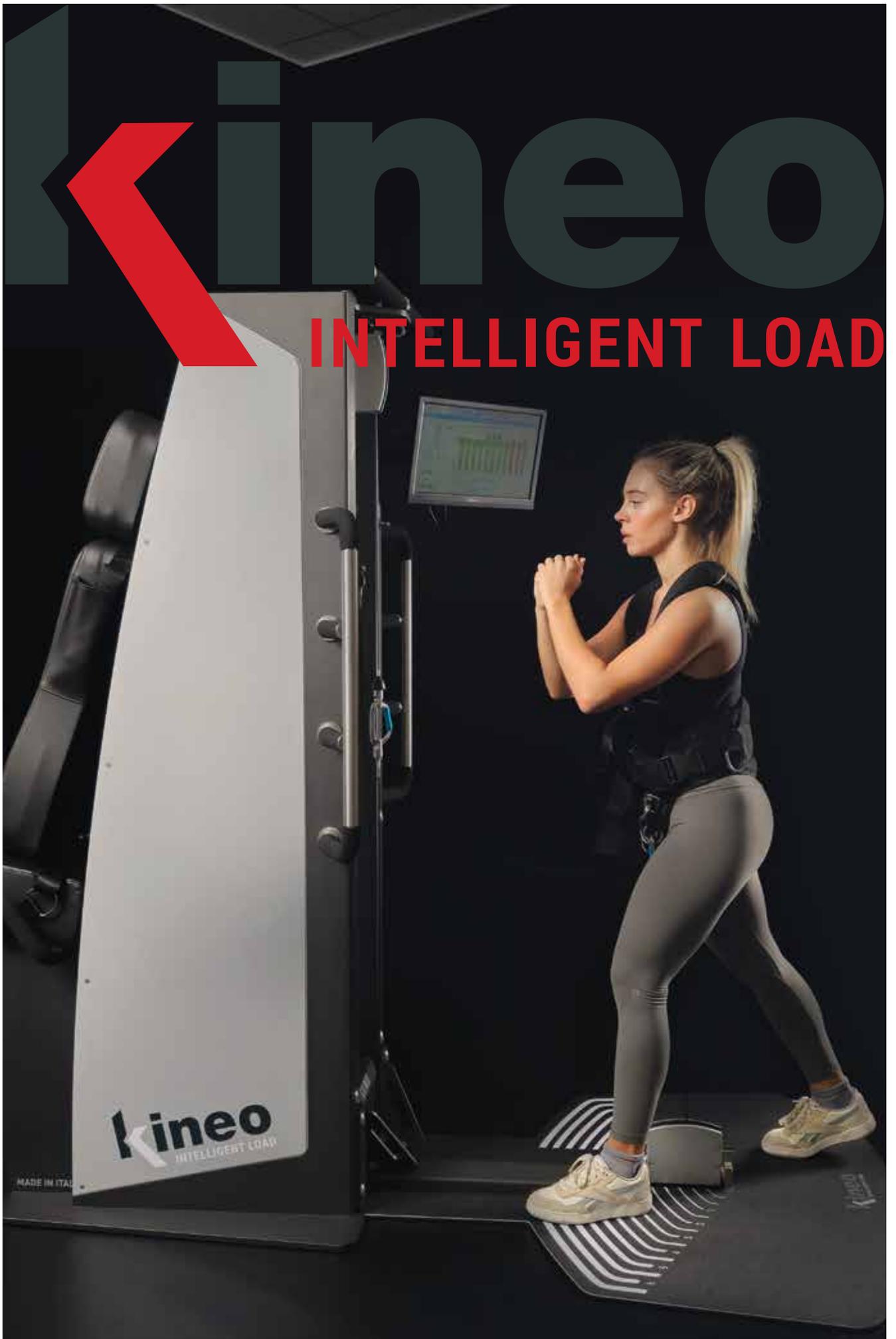

MEDICAL

CONTENUTI

- TECARTERAPIA	20
• DIACARE 7000	22
• DIACARE 5000 DIACARE 5000 RE	23
• KIT "FASCIA TOOLS"	24
• KIT "INTIMA"	26
- MAGNETOTERAPIA	28
• MAGNUM 3500 PRO	30
• MAGNUM 3000 PRO	31
• MAGNUM 2 PRO DRIVE	32
• MAGNUM XL PRO	33
• MAGNUM 2500	34
• MAGNETOCEMP ELITE	35
• MAGNUM XL	36
• MAGNUM L	37
• TABELLA PROGRAMMI	38
- ELETTROTHERAPIA	40
• GENESY 3000	42
• GENESY 1500	43
• GENESY 600	44
• GENESY 300 PRO	45
• GENESY S2	46
• DUO TENS	47
• RIABILITAZIONE E DISFAGIA	48
• AMI PRO AMI LIFE	49
- ULTRASUONOTERAPIA	50
• MEDISOUND 3000	52
- LASERTERAPIA per fisioterapia	54
• PHYSIOLASER 12.0 PRO	56
• PHYSIOLASER 12.0	57
• PHYSIOLASER 6.0 PRO	58
• PHYSIOLASER 6.0	59
• PHYSIOLASER 2.0	60
• PHYSIOLASER 1000	61
• PHYSIOLASER 500	62
- LASERTERAPIA per podologia	64
• PODCARE 12.0 PRO	66
• PODCARE 6.0 PRO	67
• PODCARE 6.0	68
• PODCARE 2.0	69
- PRESSOTERAPIA	70
• PRESSCARE G300M	72
• PRESSCARE G200M	73

TECARTERAPIA



DIACARE 7000

TECARTERAPIA

DIACARE 7000 È IL DISPOSITIVO PIÙ POTENTE, VERSATILE E COMPLETO DELLA GAMMA TECARTERAPIA GLOBUS. UTILIZZA SIA LA MODALITÀ RESISTIVA CHE LA MODALITÀ CAPACITIVA PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE ACUTE E CRONICHE DEL SISTEMA MUSCOLARE E SCHELETRICO. IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE UTILIZZATO INTERVENENDO SUL PAZIENTE SIA IN MODALITÀ MANUALE CHE COMBINANDO MOVIMENTI PASSIVI, OPPURE GRAZIE AL KIT MANI LIBERE, È POSSIBILE UTILIZZARLO ANCHE DURANTE MOVIMENTI ATTIVI DEL SOGGETTO. DIACARE 7000 È INOLTRE PREDISPOSTO PER L'UTILIZZO CON APPOSITI STRUMENTI ERGONOMICI DISEGNATI PER LA MOBILIZZAZIONE ED IL TRATTAMENTO AVANZATO DI TUTTE LE AFFEZIONI DEI TESSUTI MOLLI (FASCIA TOOLS E DYNAMIC HANDLE).

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

Potenza Nominale (NP)

350W ±10%

Frequenze di emissione

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, 1200kHz, ± 10%

Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

Elettrodi capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Elettrodi resistivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240V-AC, 50-60Hz, 1,8A

Dimensioni

515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5210

· 1 Unità di Tecarterapia DIACARE 7000

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)


· 1 Manipolo bipolare Ø (50 mm)

· 1 Kit di trattamento Mani Libere

· 1 Barattolo di crema conduttiva da 1000 ml

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo

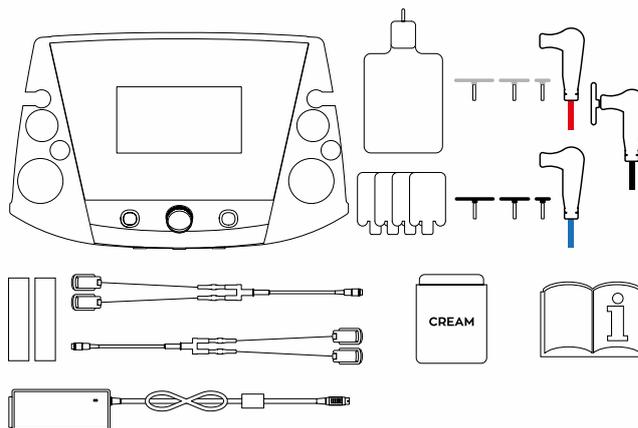

PROTOCOLLI
CERTIFICATI

0476

PUNTI FORZA



DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

TECAR TERAPIA | 14 PROGRAMMI

IL MODELLO DIACARE 5000 RACCHIUDE TUTTA LA QUALITÀ DELLA TECAR TERAPIA GLOBUS IN UNA MACCHINA DI DIMENSIONI E PESO RIDOTTI, PER GARANTIRE LA MASSIMA PORTABILITÀ, MANTENENDONE INVARIATE EFFICACIA E PROFESSIONALITÀ.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 4,3" display touch screen a colori

Potenza Nominale (NP)

180W ±10%

Frequenze di emissione

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, ± 10%

Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

Elettrodi capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Elettrodi resistivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240V-AC, 50-60Hz, 1,8A

Dimensioni

170x220x60 mm

Peso

1,04 Kg



PROTOCOLLI
CERTIFICATI

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3488

· 1 Valigetta

· 1 Unità di Tecarterapia DIACARE 5000

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra)


· 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

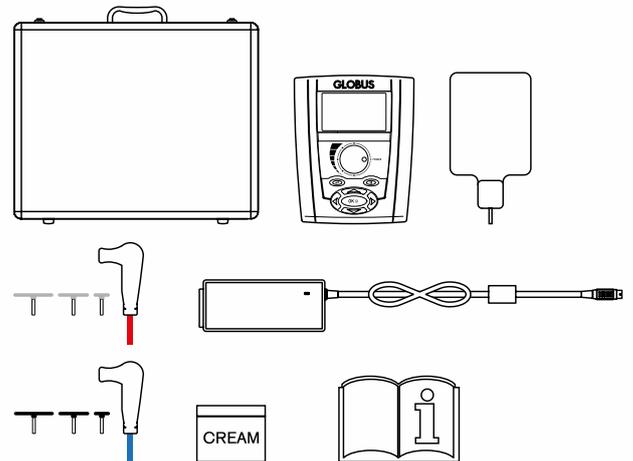


OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G3996 DIACARE 5000 RE *

* TECAR TERAPIA RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET

PUNTI FORZA

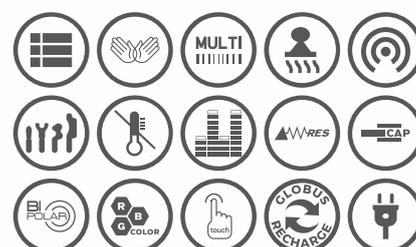

KIT “FASCIA TOOLS”

STRUMENTI AVANZATI PER LA MOBILIZZAZIONE DEI TESSUTI MOLLI DA USARE NELLA NOSTRA LINEA DI DISPOSITIVI “DIACARE”

La Tecarterapia è una tecnologia che si sta sempre più diffondendo nel mondo della fisioterapia come strumento indispensabile per ogni professionista che vuole ottenere ottimi risultati

GLOBUS ha coniugato la tecnologia TECAR alle tecniche strumentali di mobilizzazione dei tessuti molli (IASTM), unendo così i vantaggi di queste due straordinarie possibilità terapeutiche.

I GLOBUS “FASCIA TOOLS” sono speciali manipoli resistivi che, grazie alla loro forma anatomica, sono particolarmente efficaci per la mobilizzazione e il trattamento avanzato di tutte le affezioni dei tessuti molli.

La combinazione del trattamento manuale con manipoli miofasciali, insieme all’energia di DIACARE GLOBUS, offre una nuova e straordinaria possibilità di trattamento e vantaggi dell’applicazione congiunta di tecarterapia ed elettrodi miofasciali permette di:

- ELIMINARE LE RESTRIZIONI FASCIALI E LE ADERENZE CICATRIZIALI
- AUMENTARE L’ESTENSIBILITÀ DEL TESSUTO CONNETTIVO
- MIGLIORARE LA VASCOLARIZZAZIONE DEI TESSUTI
- MIGLIORARE IL RECLUTAMENTO MUSCOLARE E IL CONTROLLO MOTORIO



DiaBlade Large: strumento per il trattamento delle affezioni dell’Arto Inferiore e del Tronco.




DiaBlade Small: strumento per il trattamento delle affezioni dell’Arto Superiore e del Rachide Cervicale.



Dia Trigger Point: strumento per il trattamento dei Trigger Points.



Dia Spine: strumento per il trattamento della Schiena e la Mobilizzazione Vertebrale.

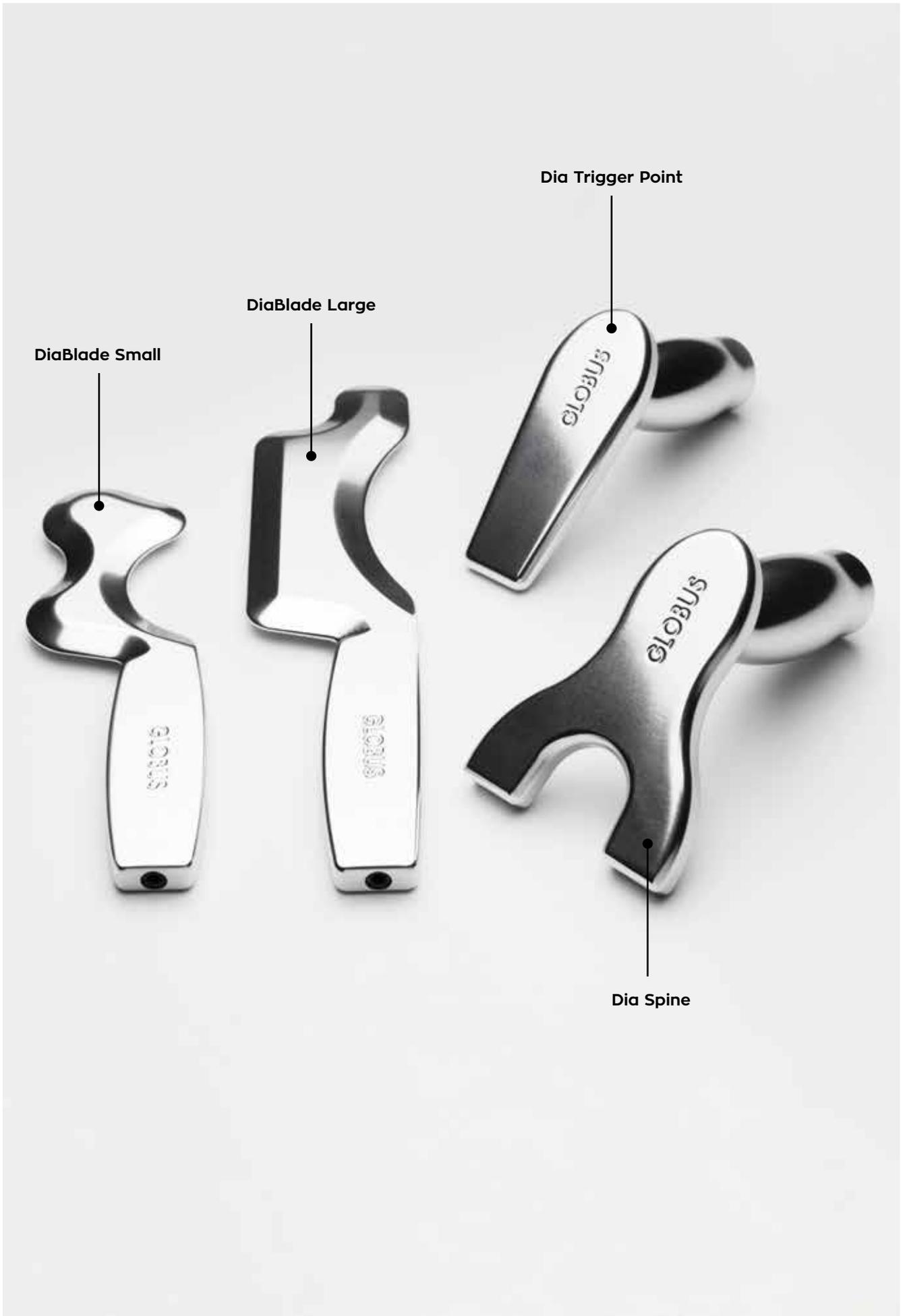

KIT "INTIMA"

STRUMENTI AVANZATI PER MIGLIORARE IL TONO DEL PAVIMENTO PELVICO DA USARE NELLA NOSTRA LINEA DI DISPOSITIVI "DIACARE"

La precisione dei nostri dispositivi TECAR permette di agire in modo efficace e in totale sicurezza e comfort, anche per risolvere problemi direttamente legati all'area genitale.

Per questo motivo GLOBUS ha creato il KIT "INTIMA", con accessori specifici che permettono di effettuare trattamenti interni ed esterni per migliorare la salute del pavimento pelvico, sia nell'uomo che nella donna, e per ripristinare il tono e l'elasticità vaginale, oltre a garantire ottimi risultati in caso di cicatrici da parto.


Il trattamento in modalità capacitiva del KIT "INTIMA" consente un'azione rigenerante profonda sulle mucose nel massimo comfort.


Inoltre, in abbinamento ai manipoli tradizionali e al KIT "MANI LIBERE", fornisce un sistema completo per aumentare il tono del pavimento pelvico e ripristinarlo.

I trattamenti più frequenti con il KIT "INTIMA", ideali per ristabilire il comfort intimo sono:

- LASSITÀ VAGINALE
- CICATRICI DA PARTO
- DIASTASI ADDOMINALE
- SINDROMI MIOFASCIALI ENDOPELVICHE
- RIABILITAZIONE PERINEALE UOMO E DONNA
- MIGLIORAMENTO TONO PAVIMENTO PELVICO

Cod. **G6421** KIT "INTIMA" per DIACARE 7000 | Cod. **G6420** KIT "INTIMA" per DIACARE 5000

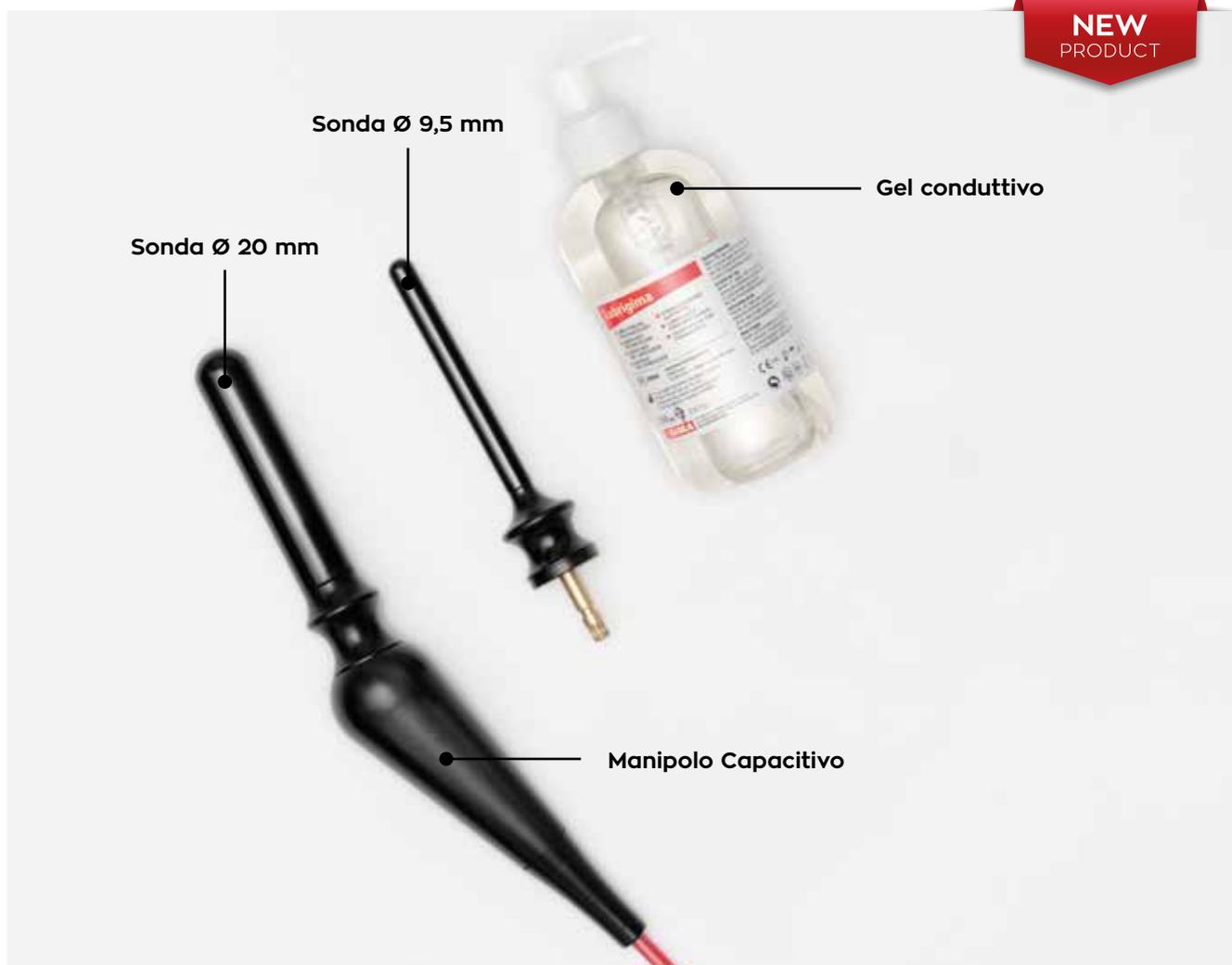

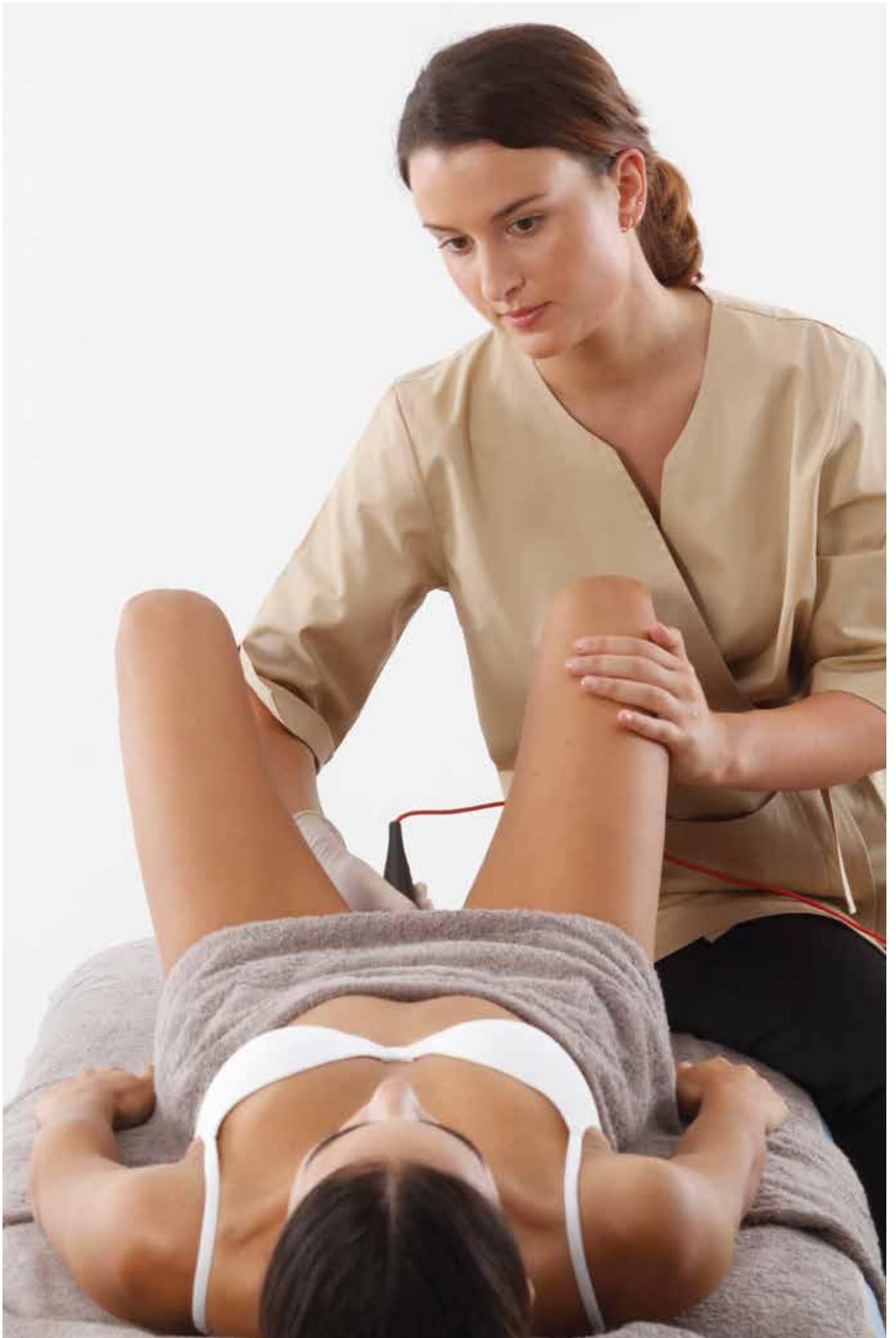

MAGNETOTERAPIA



MAGNUM 3500 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

L'UNICO DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA GLOBUS A QUATTRO CANALI CHE PERMETTE DI TRATTARE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ PARTI DEL CORPO OPPURE DUE SOGGETTI DIVERSI. IL MAGNUM 3500 PRO VIENE FORNITO CON UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

26 PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA | 15 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 6 INFIAMMAZIONI | 6 ORTOPEDIA | 3 DOLORE | 3 TRAUMI/EDEMI/FERITE | 3 PROGRAMMI NOTTURNI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 800 Gauss di media totali (per 4 canali)

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

Funzione 2+2

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 2 canali ciascuno

Alimentazione


- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensione | Peso

170x220x60 mm | 820 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5434
- 1 Valigetta
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3500 PRO
- 2 Solenoidi "Flessibili" 300x100 mm
- 4 Solenoidi "Pocket Pro" 155x95 mm
- 1 Tappetino "Soft 4" 250x250 mm
- 4 Fasce elastiche velcraibili 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

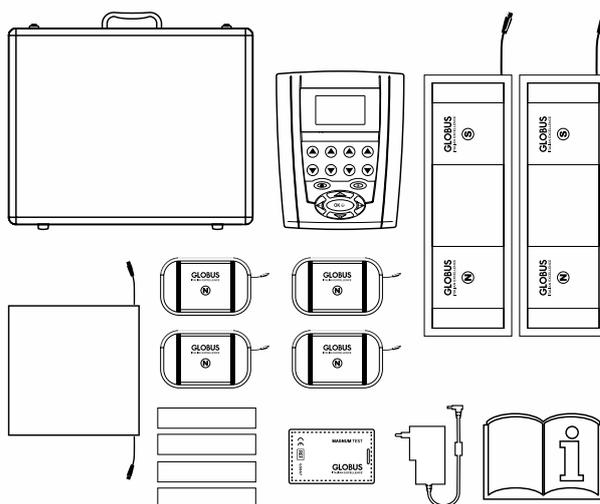

PUNTI FORZA



MAGNUM 3000 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

POTENTE MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE DOTATA DI TANTI PROGRAMMI E FUNZIONI SPECIALI CHE LA RENDONO EFFICACE PER LA CURA DI NUMEROSE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E NEL RECUPERO DOPO INTERVENTI ORTOPEDICI. POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTI LOCALI E TOTAL-BODY.

26 PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA | 15 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 6 INFIAMMAZIONI
6 ORTOPEDIA | 3 DOLORE | 3 TRAUMI/EDEMI/FERITE | 3 PROGRAMMI NOTTURNI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

Alimentazione


- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensione | Peso

170x220x60 mm | 820 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5335
- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3000 PRO
- 2 Solenoidi "Flessibili" 300x100 mm
- 2 Fasce elastiche velcraabili 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

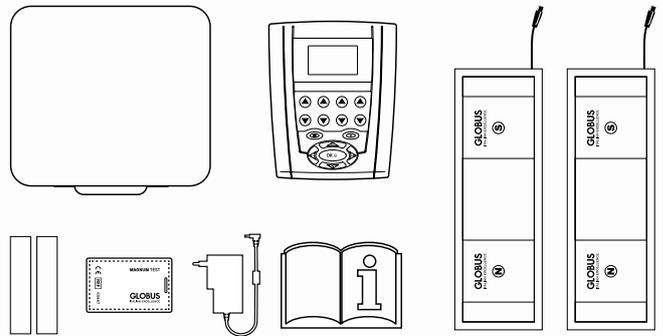

OPZIONE DI ACQUISTO

- Cod. G6034 MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi "Pocket Pro".



PUNTI FORZA



MAGNUM 2 PRO DRIVE

MAGNETOTERAPIA | 41 PROGRAMMI

MAGNUM 2 PRO DRIVE NASCE DALL'ESIGENZA DI OFFRIRE UNA SOLUZIONE A CHI SOFFRE DI DOLORI ALLA SCHIENA O AD ALTRE PARTI DEL CORPO, DOVUTI AL TROPPO TEMPO PASSATO ALLA GUIDA. LA SEDENTARIETÀ E LE TANTE ORE AL VOLANTE, SOTTOPOSTI ALLE VIBRAZIONI DEL MEZZO, SONO SICURAMENTE TRA LE CAUSE PIÙ FREQUENTI DEI DOLORI MUSCOLO-SCHELETRICI. MAGNUM 2 PRO DRIVE È UN'OTTIMA TERAPIA STRUMENTALE CHE PUÒ AIUTARE A RIDURRE L'INFIAMMAZIONE E IL DOLORE DI QUESTA CATEGORIA DI PERSONE..

15 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 6 ORTOPEDIA | 6 INFIAMMAZIONI | 3 DOLORE | 3 TRAUMI/EDEMI/FERITE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati

Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile


Dimensione e Peso

100x160x35 mm - 450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Cod. **G5429**

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 2 PRO DRIVE
- 1 Tappetino "Soft 4", 250x250 mm
- 2 Solenoidi "Flessibili", 300x100 mm
- 2 Fasce elastiche velcrabili 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Cavo USB completo di convertitore 5-12V
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

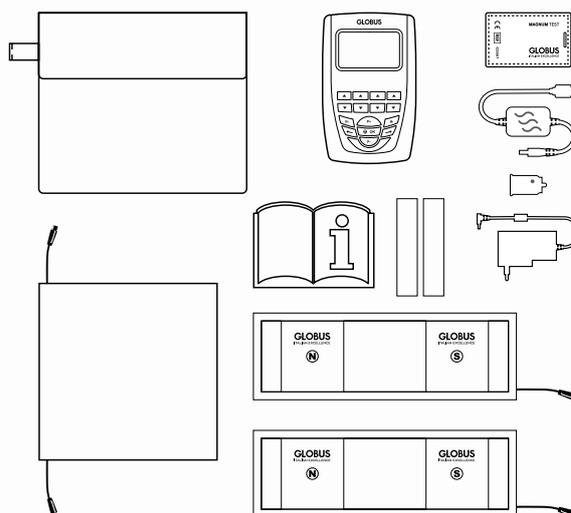

PUNTI FORZA



MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PROVVISORIO DI UNA GAMMA COMPLETA DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER TRATTARE I DISTURBI OSTEOARTICOLARI PIÙ DIFFUSI. IL DISPOSITIVO È TRA I PIÙ POTENTI SUL MERCATO ED È DOTATO DI DUE SOLENOIDI.

32 SALUTE E REHAB | 14 ESTETICA E FITNESS

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 15 programmi personalizzati

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Cod. G3956

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL PRO
- 2 Solenoidi "Flessibili", 300x100 mm
- 2 Fasce elastiche velcrali 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

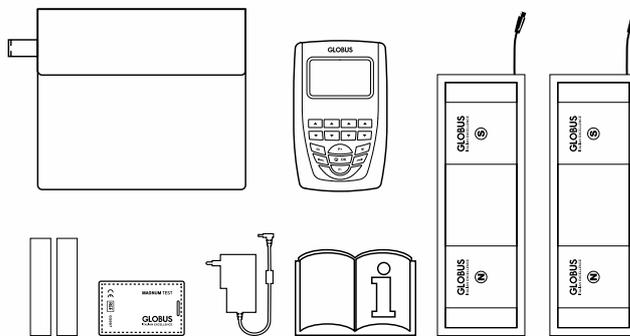

OPZIONE DI ACQUISTO

- Cod. G6033 MAGNUM XL PRO, 2 solenoidi "Pocket Pro"



CE
0476

PUNTI FORZA



MAGNUM 2500

MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

MAGNETOTERAPIA PORTATILE IDEALE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI. MAGNUM 2500 È INDICATO PER UN MIGLIORE RECUPERO DOPO TRAUMI E FRATTURE, OLTRE CHE PER DARE SOLLIEVO E AIUTARE LA RIGENERAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI IN PRESENZA DI PATOLOGIE CRONICHE COME ARTROSI E ARTRITE.

16 PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA | 14 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 5 INFIAMMAZIONI
4 ORTOPEDIA | 3 DOLORE | 2 TRAUMI/EDEMI/FERITE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 160 Gauss di media per canale
- 320 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati

Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensione

100x160x35 mm


Peso

280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Cod. G5438

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 2500
- 2 Solenoidi "Flessibili", 300x100 mm
- 2 Fasce elastiche velcra 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

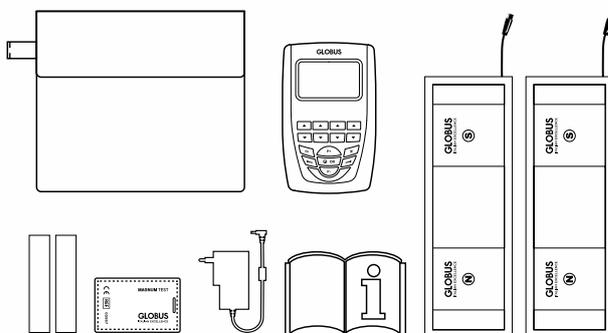

OPZIONE DI ACQUISTO

- Cod. G6191 MAGNUM 2500, 2 solenoidi "Pocket Pro"



PUNTI FORZA



MAGNETOCEMP ELITE

MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER MAGNETOTERAPIA PROVVIDO DI UNA GAMMA COMPLETA DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER TRATTARE ARTROSI, INFIAMMAZIONI ARTICOLARI, EDEMI OSSEI E ALTRE PATOLOGIE CHE COLPISCONO L'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO.

16 PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA | 14 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 5 INFIAMMAZIONI
4 ORTOPEDIA | 3 DOLORE | 2 TRAUMI/EDEMI/FERITE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 160 Gauss di media per canale
- 320 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200Hz

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati

Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Cod. G6408

- 1 Valigetta
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNETOCEMP ELITE
- 2 Solenoidi "Flessibili", 300x100 mm
- 2 Fasce elastiche velcralabili 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

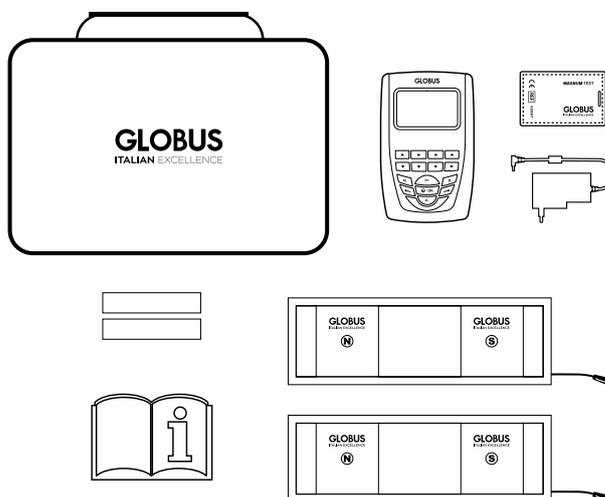

NON ACQUISTABILE
ON LINE



CE
0476

PUNTI FORZA



MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA DOMICILIARE ADATTO A TRATTARE I PRINCIPALI DISTURBI OSTEOARTICOLARI. ANCORA PIÙ SEMPLICE DA UTILIZZARE CON LA NUOVA FUNZIONE EASY PROGRAM.

16 SALUTE E REHAB | 10 ESTETICA E FITNESS

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2 indipendenti

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 140 Gauss di media per canale
- 280 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire 1 programma personalizzato

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni



100x160x35 mm

Peso

260 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3216
- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL
- 1 Solenoide "Flessibile" 300x100 mm
- 1 Fascia elastica velcrabile 800x80 mm
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

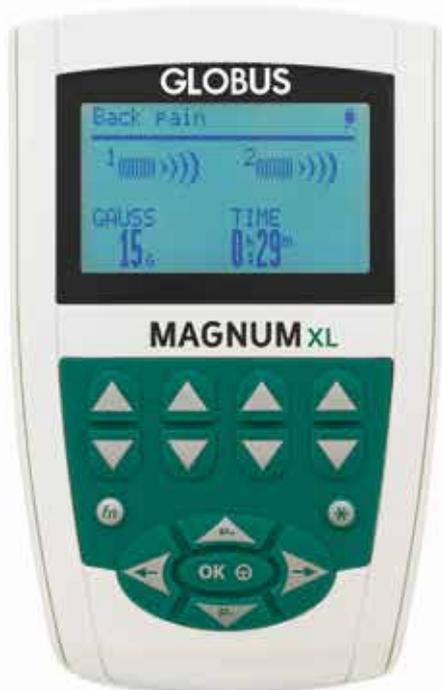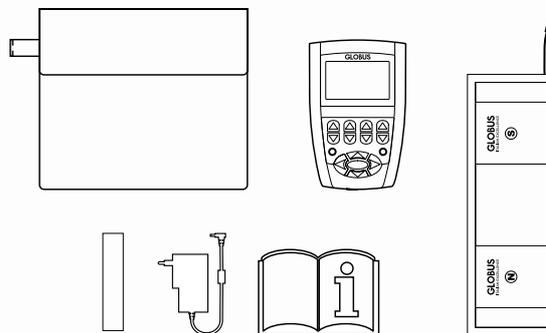

CE
0476

PUNTI FORZA



MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA MOLTO SEMPLICE, DOTATO DI 8 PROGRAMMI PREINSERITI PER TRATTARE PRINCIPALMENTE FRATTURE E ARTROSI.

8 SALUTE E REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

1

Intensità erogabile con diffusore flessibile

120 Gauss di media

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

Rete

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

260 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3947

· 1 Borsa


· 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM L

· 1 Solenoide "Flessibile" 300x100 mm

· 1 Fascia elastica velcrabile 800x80 mm

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

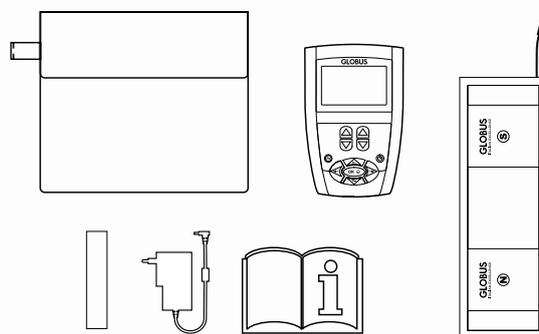

CE
0476

PUNTI FORZA



TABELLA PROGRAMMI

PROGRAMMA	MODELLO						
	3500 PRO 3000 PRO	2 PRO DRIVE	XL PRO	2500	MAGNETOCEMP ELITE	XL	L
Algodistrofia / Morbo di Sudeck	✓	✓	/	✓	✓	/	/
Antinfiammatorio	✓	✓	/	✓	✓	/	/
Artrite	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓
Artrosi - Osteoartrite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Distorsione caviglia	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
Dolori articolari	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
Edemi ossei	✓	✓	/	✓	✓	/	/
Edemi-contusioni	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
Epicondillite / Epitrocite	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓
Frattura con gesso	✓	✓	*	✓	✓	*	*
Fratture	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fusione spinale	✓	✓	/	/	/	/	/
Lesione cartilagine	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
Mal di schiena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteonecrosi	✓	✓	/	✓	✓	/	/
Osteoporosi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteotomia	✓	✓	/	/	/	/	/
Post intervento LCA	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
Protesi anca - ginocchio	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
Pseudoartrosi	✓	✓	/	/	/	/	/
Ritardo consolidamento fratture	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
Tendinite spalla / Cuffia rotatori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
Tendiniti	✓	✓	✓	/	/	/	/
Tunnel carpale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
Ulcere	✓	✓	/	/	/	/	/
Programma multifrequenza	✓	/	/	1	1	/	/
Programmi a frequenza predefinita	25	/	/	15	15	/	/
Programmi notturni	3	/	/	/	/	/	/
Programmi estetici	/	/	14	/	/	10	/

* Utilizzare programma "Fratture".

Alcuni programmi sono divisi per parti del corpo. Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche dei prodotti.

IL CUORE DI GLOBUS I SOLENOIDI IN PURO RAME



Più potenti
più efficaci
più performanti

Tra i due componenti in puro rame, si forma un campo elettromagnetico. Più il rame è puro più le onde penetrano con maggiore efficacia e profondità.

**È questo il segreto di Globus:
la scelta dei migliori componenti
e la tecnologia tutta italiana.**



ELETTROTERAPIA



GENESY 3000

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 423 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE TOP DI GAMMA A QUATTRO CANALI USATO NEL SETTORE RIABILITATIVO, UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE PIÙ COMUNI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO.

236 MENÙ ELETTROTHERAPIA (EMS/RUSSE) | 53 SPORT | 33 DOLORE | 29 FITNESS | 23 MICROCORRENTI
16 BELLEZZA | 11 REHAB | 9 DENERVATO | 9 INTERFERENZIALI | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

- Rete
- Batterie ricaricabili

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

1,12 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1034
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 3000
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 2 Elettrodi per ionofresi + 2 fasce
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

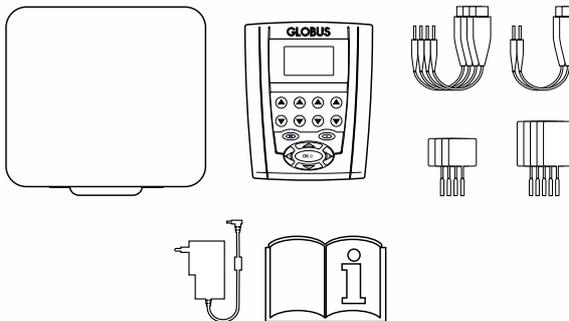

* In base al tipo di corrente



PROGRAMMA INCONTINENZA


DISPOSITIVO ADATTO ALLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO, SIA MASCHILE CHE FEMMINILE, E IDONEO A RISOLVERE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'INCONTINENZA URINARIA O FECALE, A PROLASSI DI VESCICA, UTERO, RETTO O PER IL DOLORE PELVICO.

È UN TIPO DI TERAPIA FISICA STRUMENTALE ESEGUITA CON APPOSITE SONDE VAGINALI O ANALI CHE CONDUCONO IMPULSI ELETTRICI CHE STIMOLANO LA MUSCOLATURA A CONTRARSI, NORMALIZZANDO IL TONO MUSCOLARE DEL PERINEO.



CE
0476

PUNTI FORZA

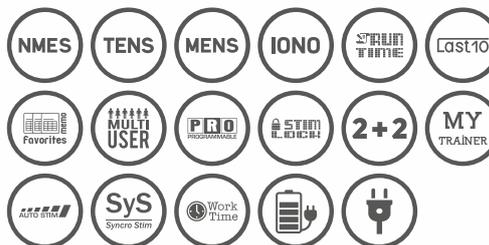

GENESY 1500

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 414 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE A QUATTRO CANALI USATO NEL SETTORE MEDICO E RIABILITATIVO, DISPONE DI TUTTE LE CORRENTI USATE PER LA TERAPIA RIABILITATIVA, FISIOTERAPICA E NELLA RIABILITAZIONE MOTORIA.

92 MENU ELETTROTHERAPIA (EMS/RUSSE) | 84 ACTION NOW | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 53 SPORT
33 DOLORE | 29 FITNESS | 23 MICROCORRENTI | 16 BELLEZZA | 11 REHAB | 9 DENERVATO | 6 INTERFERENZIALI
3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

- Rete
- Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3554

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore GENESY 1500

· 4 Cavi per collegamento elettrodi



· 2 Cavi per microcorrente e ionofresi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati

· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

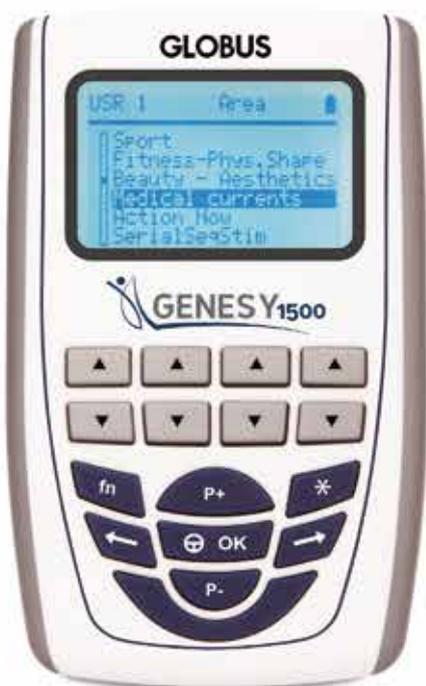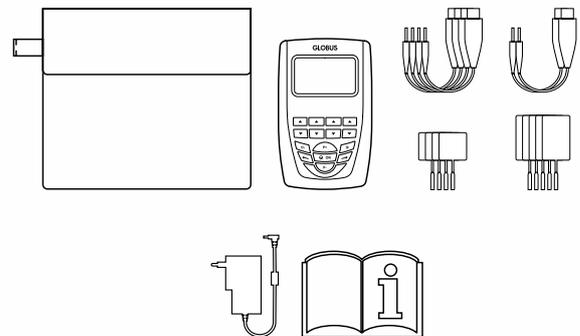

PROGRAMMA INCONTINENZA


DISPOSITIVO ADATTO ALLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO, SIA MASCHILE CHE FEMMINILE, E IDONEO A RISOLVERE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'INCONTINENZA URINARIA O FECALE, A PROLASSI DI VESCICA, UTERO, RETTO O PER IL DOLORE PELVICO.

È UN TIPO DI TERAPIA FISICA STRUMENTALE ESEGUITA CON APPOSITE SONDE VAGINALI O ANALI CHE CONDUCONO IMPULSI ELETTRICI CHE STIMOLANO LA MUSCOLATURA A CONTRARSI, NORMALIZZANDO IL TONO MUSCOLARE DEL PERINEO.



CE
0476

PUNTI FORZA

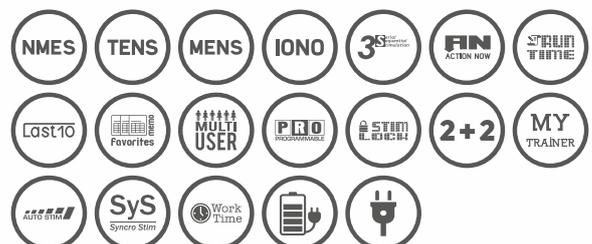

GENESY 600

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 149 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE A QUATTRO CANALI PER UTENTI ESIGENTI E PROFESSIONISTI DELLA RIABILITAZIONE.

53 SPORT | 29 FITNESS | 20 DOLORE | 12 MICROCORRENTI | 12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 11 REHAB
7 ACTION NOW | 3 DENERVATO | 1 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

450 gr

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3553
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 600
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

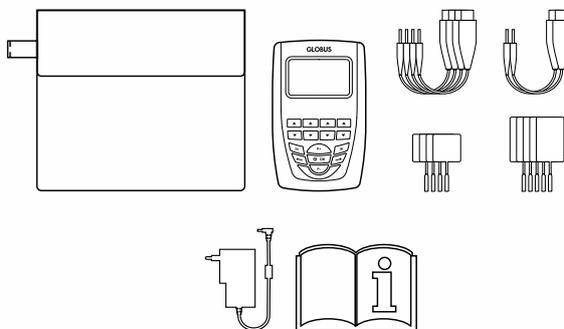

PROGRAMMA INCONTINENZA


DISPOSITIVO ADATTO ALLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO, SIA MASCHILE CHE FEMMINILE, E IDONEO A RISOLVERE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'INCONTINENZA URINARIA O FECALE, A PROLASSI DI VESCICA, UTERO, RETTO O PER IL DOLORE PELVICO.

È UN TIPO DI TERAPIA FISICA STRUMENTALE ESEGUITA CON APPOSITE SONDE VAGINALI O ANALI CHE CONDUCONO IMPULSI ELETTRICI CHE STIMOLANO LA MUSCOLATURA A CONTRARSI, NORMALIZZANDO IL TONO MUSCOLARE DEL PERINEO.



CE
0476

PUNTI FORZA

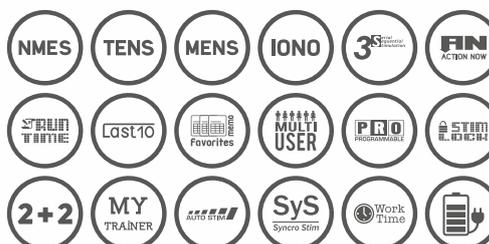

GENESY 300 PRO

ELETTROTERRAPIA 4 CANALI | 91 PROGRAMMI

PRODOTTO A QUATTRO CANALI CON UN'AMPIA GAMMA DI PROGRAMMI PER LA FISIOTERRAPIA.

29 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE | 20 DOLORE | 22 SPORT | 12 MICROCORRENTI | 6 REHAB
1 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI


SPECIFICHE TECNICHE

Display
Dimensione area visibile 2,6"
Canali
4 indipendenti (8 elettrodi)
Frequenza
0,3-150Hz *
Larghezza impulso
40-450µs *
Intensità
0-120mA per canale
Alimentazione
Batterie ricaricabili
Dimensioni
100x160x35 mm
Peso
440 gr

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3222
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 300 PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

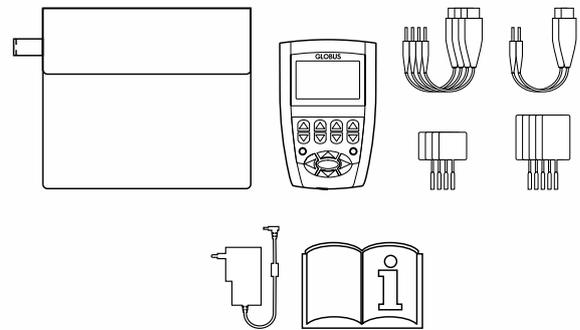


PROGRAMMA INCONTINENZA

DISPOSITIVO ADATTO ALLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO, SIA MASCHILE CHE FEMMINILE, E IDONEO A RISOLVERE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'INCONTINENZA URINARIA O FECALE, A PROLASSI DI VESCICA, UTERO, RETTO O PER IL DOLORE PELVICO.

È UN TIPO DI TERAPIA FISICA STRUMENTALE ESEGUITA CON APPOSITE SONDE VAGINALI O ANALI CHE CONDUCONO IMPULSI ELETTRICI CHE STIMOLANO LA MUSCOLATURA A CONTRARSI, NORMALIZZANDO IL TONO MUSCOLARE DEL PERINEO.



PUNTI FORZA

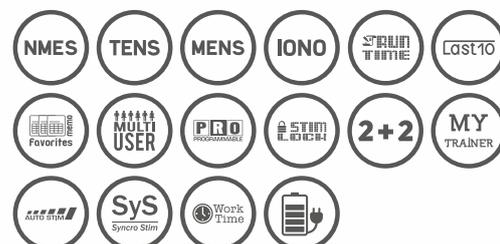

GENESY S2

ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 60 PROGRAMMI

IL PRODOTTO A DUE CANALI PER LA FISIOTERAPIA.

16 TENS E DOLORE | 12 SPORT | 11 REHAB | 9 PREVENZIONE | 8 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE
3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,5"

Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

Frequenza

1-150Hz

Larghezza impulso

50-400µs

Intensità

0-100mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni


80x130x25 mm

Peso

220 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3725
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY S2
- 2 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

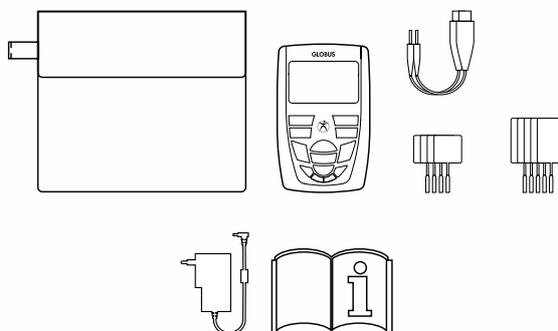

PROGRAMMA INCONTINENZA

DISPOSITIVO ADATTO ALLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO, SIA MASCHILE CHE FEMMINILE, E IDONEO A RISOLVERE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'INCONTINENZA URINARIA O FECALE, A PROLASSI DI VESCICA, UTERO, RETTO O PER IL DOLORE PELVICO.

È UN TIPO DI TERAPIA FISICA STRUMENTALE ESEGUITA CON APPOSITE SONDE VAGINALI O ANALI CHE CONDUCONO IMPULSI ELETTRICI CHE STIMOLANO LA MUSCOLATURA A CONTRARSI, NORMALIZZANDO IL TONO MUSCOLARE DEL PERINEO.



CE
0476

PUNTI FORZA



DUO TENS

ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 20 PROGRAMMI

IL PRODOTTO IDEALE PER TRATTARE I PIÙ COMUNI SINTOMI DOLOROSI.

16 TENS E DOLORE | 3 SPORT | 1 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,5"

Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

Frequenza

1-150Hz

Larghezza impulso

50-400µs

Intensità

0-100mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni


80x130x25 mm

Peso

220 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3729
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore DUO TENS
- 2 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

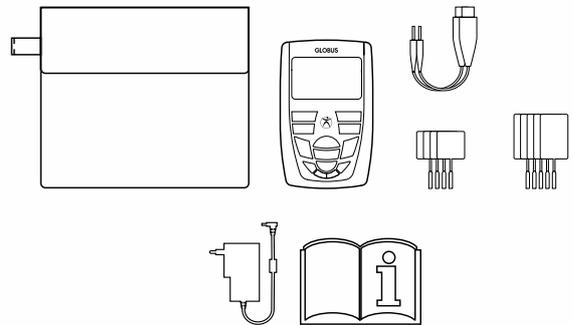

CE
0476

PUNTI FORZA





RIABILITAZIONE E DISFAGIA

La disfagia è una difficoltà nel compiere l'atto della deglutizione.

Per i soggetti che ne sono colpiti diventa molto complicato, o addirittura impossibile, deglutire sia la saliva che i cibi liquidi e/o solidi.

Nella maggior parte dei casi la disfagia è dovuta a patologie neurologiche ma sempre più frequentemente colpisce anche persone anziane che hanno un indebolimento fisiologico della muscolatura coinvolta nella deglutizione.

I NOSTRI DISPOSITIVI

AMI PRO e **AMI LIFE** sono dispositivi di supporto all'intervento riabilitativo di questi pazienti e agiscono promuovendo il trofismo muscolare e migliorando la sensibilità propriocettiva neuromuscolare con l'obiettivo di rieducare i muscoli coinvolti durante la deglutizione.

I dispositivi intervengono inducendo una stimolazione neuromuscolare (NMES) non invasiva che stimola la muscolatura attraverso degli elettrodi posizionati sul collo.

I protocolli inseriti rispettano le linee guida delle principali evidenze scientifiche attualmente disponibili in letteratura.

AMI PRO è il dispositivo top di gamma ed è completo di diversi programmi di stimolazione con obiettivo motorio, sensorimotorio e sensoriale, proposti con parametri diversi per permettere la scelta più appropriata del ciclo di lavoro. Presenta inoltre vari programmi di riabilitazione facciale e programmi modificabili per adattarsi alle esigenze terapeutiche del professionista.

AMI PRO dispone dell'esclusiva funzione speciale **"ACTION NOW"** che permette di erogare la stimolazione solo su richiesta dell'operatore o del paziente stesso.

Tramite la pressione del tasto **"ACTION NOW"** sul dispositivo, è possibile coordinare l'attivazione muscolare con la deglutizione volontaria del paziente, diventando a tutti gli effetti un sistema di auto-feedback.

AMI LIFE è completo di 3 programmi di stimolazione con obiettivo motorio, sensorimotorio e sensoriale e un programma di riabilitazione facciale.

Non è possibile modificare i programmi preinseriti e per questo è adatto a pazienti che necessitano di una continuazione della terapia a domicilio (sempre sotto la supervisione del medico).

AMI PRO | AMI LIFE


ELETTROTHERAPIA PER DISFAGIA 4 CANALI

SPECIFICHE TECNICHE

Display
Dimensione area visibile 2,6"
Canali
4 indipendenti
Frequenza
1-80Hz
Larghezza impulso
80-260µs
Intensità
max 20mA per canale
Alimentazione
Batterie ricaricabili
Dimensione Peso
100x160x35 mm 450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi a farfalla
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

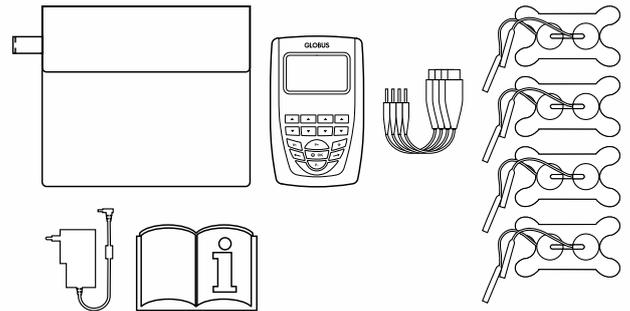



OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5573 AMI PRO
- Cod. G5852 AMI LIFE

PUNTI FORZA




PUNTI FORZA

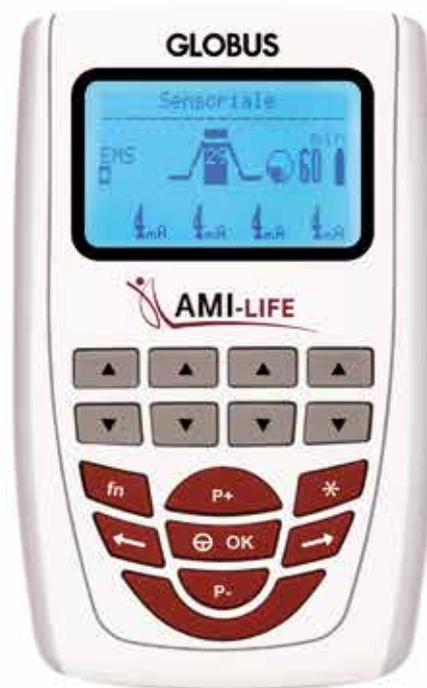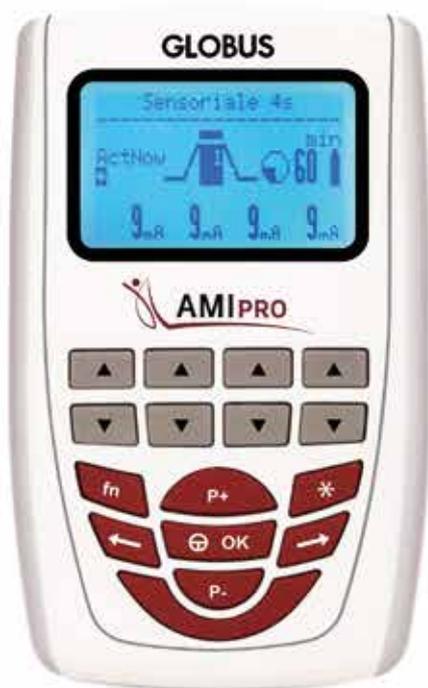

L'uso di questi dispositivi è riservato a medici, operatori sanitari autorizzati e ai loro pazienti solo ed esclusivamente sotto prescrizione medica e supervisione continua del professionista.

ULTRASUONOTERAPIA

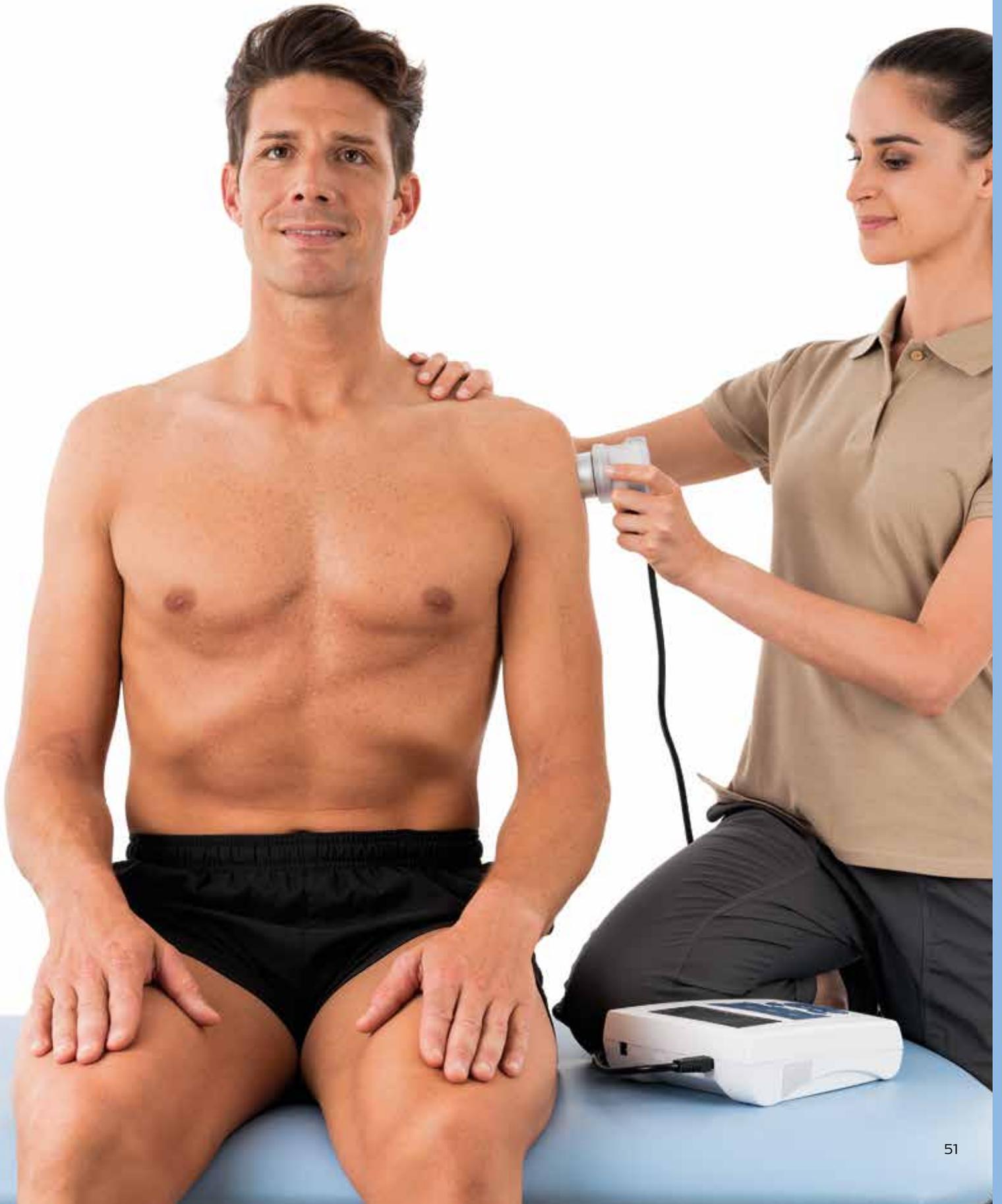

MEDISOUND 3000

ULTRASUONOTERAPIA | 49 PROGRAMMI

PRODOTTO TOP DI GAMMA ADATTO A STUDI FISIOTERAPICI E OSPEDALI. LA SUA COMPATTEZZA NE PERMETTE IL TRASPORTO IN TUTTE LE SITUAZIONI OPERATIVE.

31 ESTETICA | 18 SALUTE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

1 manipolo Ø 42 mm - IP68

Potenza

3W/cm² ± 20%

Gestione contatto

Si

Frequenza erogabile

3MHz e 1MHz

Emissione

Continua e pulsata

Duty Cycle

10%-100%

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

820 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1033
- 1 Borsa
- 1 Unità di ultrasuonoterapia MEDISOUND 3000
- 1 Manipolo
- 1 Confezione gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

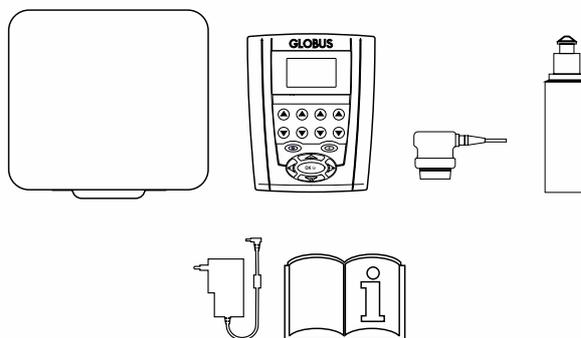


PUNTI FORZA





LASERTERAPIA

per fisioterapia

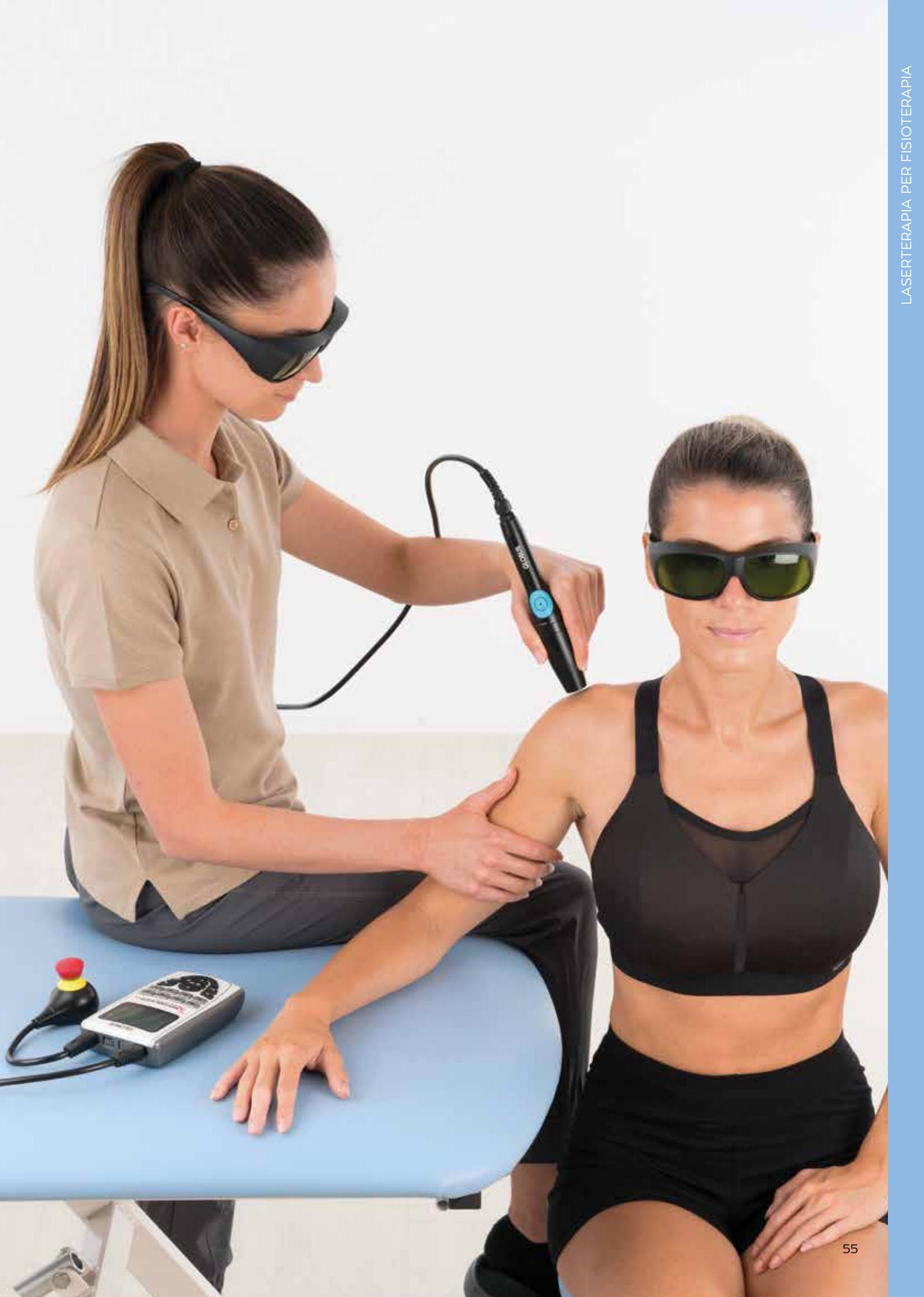

PHYSIOLASER 12.0 PRO

LASERTERAPIA

LA VERSIONE "PRO" DEL PHYSIOLASER 12.0 È PENSATA PER IL PROFESSIONISTA CHE UTILIZZA SPESSO IL DISPOSITIVO E PREFERISCE TENERLO SEMPRE A PORTATA DI MANO SOPRA UN CARRELLINO. I 12W DI POTENZA MASSIMA PERMETTERANNO TRATTAMENTI RAPIDI ED EFFICACI ANCHE SU ZONE DEL CORPO PIÙ ESTESE, UTILIZZANDO L'OTTICA DA 22 MM IN DOTAZIONE CON IL DISPOSITIVO. LA RICCA LIBRERIA DI PROGRAMMI GARANTISCE INOLTRE AL PROFESSIONISTA DI TRATTARE QUALSIASI DISTURBO MUSCOLO-SCHELETRICO E ALCUNE PROBLEMATICHE RIFERITE A FERITE E ULCERE DELLA PELLE.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

12W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, Ø 11 mm

Ottica, Ø 22 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni


220x170x60 mm

Peso

1,12 Kg


DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5803
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 12.0 PRO
- 1 Handpiece HP 808nm con ottiche Ø 11 mm e Ø 22 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

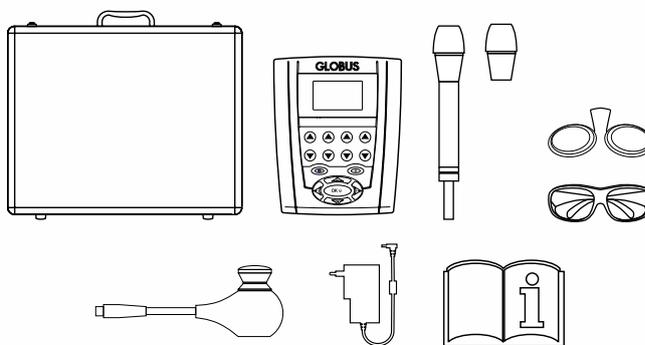

OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5995 Manipolo HP 980nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064nm

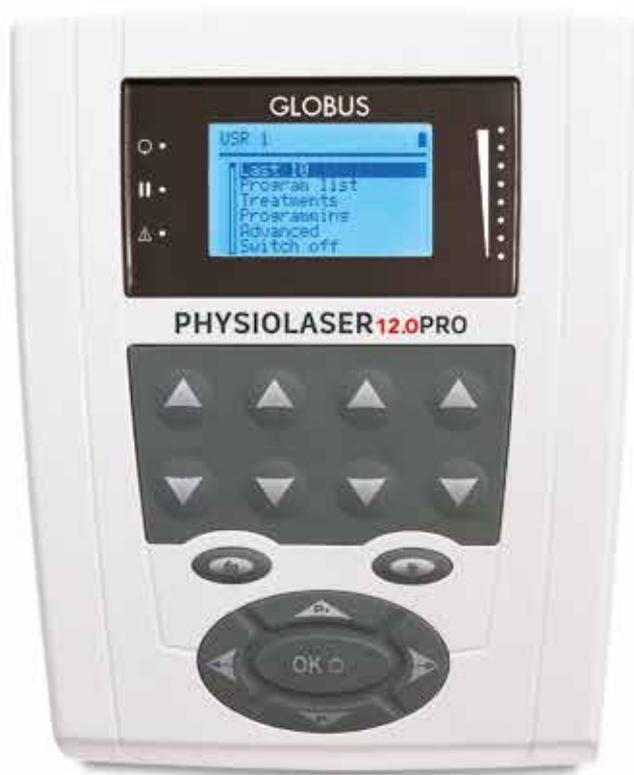

PUNTI FORZA



PHYSIOLASER 12.0

LASERTERAPIA

PYSIOLASER 12.0 È IL DISPOSITIVO PER LASERTERAPIA PIÙ MANEGGEVOLE E POTENTE DELLA LINEA GLOBUS. LA RICCA LIBRERIA DI PROGRAMMI PERMETTE AL PROFESSIONISTA DI TRATTARE QUALSIASI DISTURBO MUSCOLO-SCHELETRICO OLTRE CHE ALCUNE PROBLEMATICHE RIFERITE A FERITE E ULCERE DELLA PELLE. SICURAMENTE UNO DEI DISPOSITIVI CON IL MIGLIOR RAPPORTO PREZZO-QUALITÀ DELL'INTERA GAMMA.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

12W \pm 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, \varnothing 11 mm

Ottica, \varnothing 22 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. **G5741**

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 12.0


· 1 Handpiece HP 808nm con ottiche \varnothing 11 mm e \varnothing 22 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

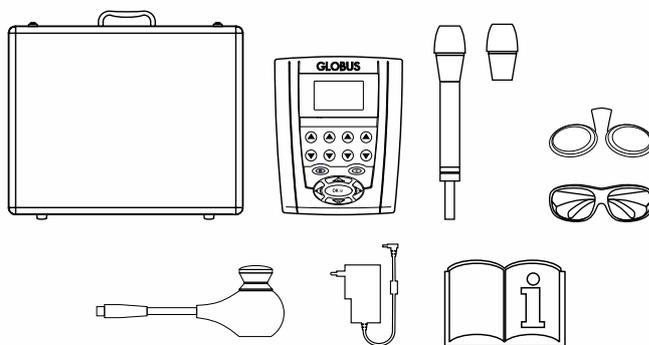

OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. **G5995** Manipolo HP 980nm

· Cod. **G5996** Manipolo 1064nm



PUNTI FORZA



PHYSIOLASER 6.0 PRO

LASERTERAPIA

PHYSIOLASER 6.0 PRO È UN DISPOSITIVO DI PESO E DIMENSIONI CONTENUTE ADATTO SIA PER ESSERE POSIZIONATO IN UN CARRELLINO DA STUDIO CHE PER ESSERE TRASPORTATO, ALL'OCCORRENZA, IN ALTRI LOCALI. CON LA SUA POTENZA MASSIMA DI 6W È IDEALE PER TRATTARE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E MUSCOLARI, RIDUCENDO RAPIDAMENTE DOLORE ED EDEMA E FAVORENDO UN RECUPERO PIÙ RAPIDO DEI TESSUTI LESIONATI E INFIAMMATI.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

6W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, Ø 11 mm

Ottica, Ø 22 mm (opzionale)

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

220x170x60 mm

Peso

1,12 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5764

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 6.0 PRO


· 1 Handpiece MP 808nm con ottica Ø 11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

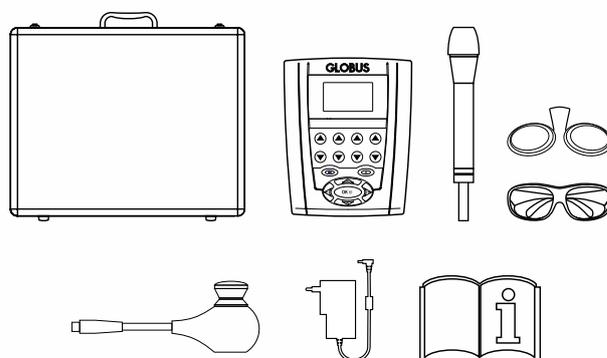

OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G5994 Manipolo MP 980nm

· Cod. G5996 Manipolo 1064nm

· Cod. G6092 Ottica Ø 22 mm



PUNTI FORZA



PHYSIOLASER 6.0

LASERTERAPIA

PHYSIOLASER 6.0 È UN DISPOSITIVO LEGGERO E PORTATILE, ADATTO PER ESSERE PORTATO SEMPRE CON SÉ SE SI EFFETTUANO TRATTAMENTI IN PIÙ AMBULATORI. CON LA SUA POTENZA MASSIMA DI 6W È IDEALE PER TRATTARE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E MUSCOLARI, RIDUCENDO RAPIDAMENTE DOLORE ED EDEMA E FAVORENDO UN RECUPERO PIÙ RAPIDO DEI TESSUTI LESIONATI E INFIAMMATI.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diode GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

6W \pm 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, \varnothing 11 mm

Ottica, \varnothing 22 mm (opzionale)

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni


100x160x35 mm

Peso

450 gr


DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5740
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 6.0
- 1 Handpiece MP 808nm con ottica \varnothing 11 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

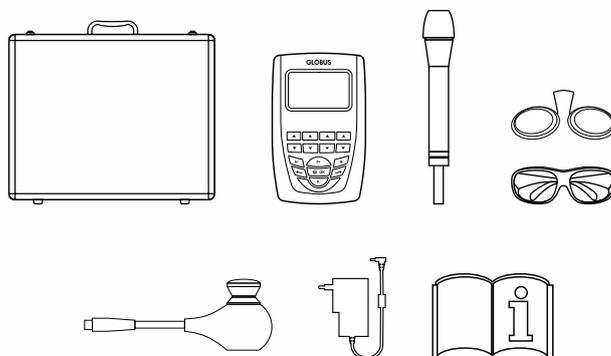

OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5994 Manipolo MP 980nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064nm
- Cod. G6092 Ottica \varnothing 22 mm

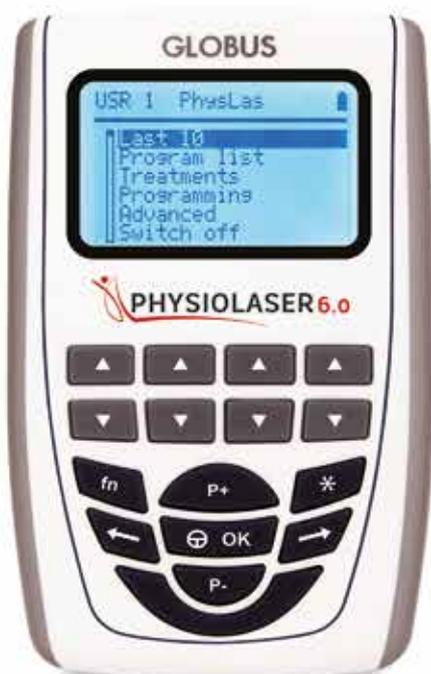

PUNTI FORZA



PHYSIOLASER 2.0

LASERTERAPIA

DISPOSITIVO LEGGERO E PORTATILE, COMPLETO DI TUTTI I PRINCIPALI PROGRAMMI PER TRATTARE PATOLOGIE CRONICHE E ACUTE A CARICO DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

2W \pm 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottica disponibile

Ottica, \varnothing 11 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5739

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 2.0



· 1 Handpiece Black 808nm con ottica \varnothing 11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

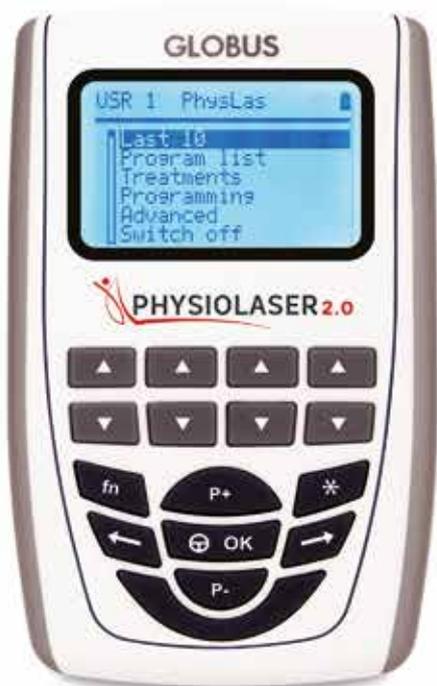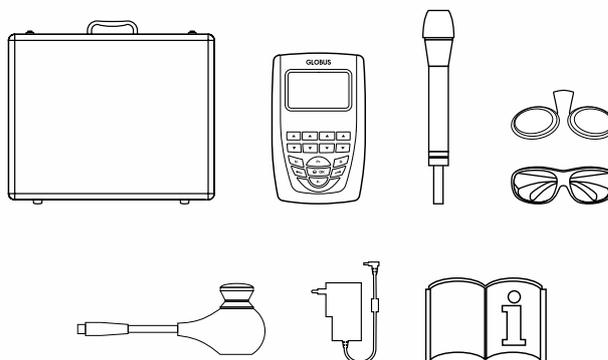

PUNTI FORZA



PHYSIOLASER 1000

LASERTERAPIA

PHYSIOLASER 1000 È UN PRODOTTO DELLA LINEA PROFESSIONALE. POTENTE E PORTATILE È INDICATO PER ACCELERARE IL RECUPERO DEI TESSUTI INFIAMMATI, RIGENERARE LE CELLULE E MIGLIORARE LA MICROCIRCOLAZIONE.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diode GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

1W \pm 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottica disponibile

Ottica, \varnothing 11 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3579

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 1000


· 1 Handpiece Green 808nm con ottica \varnothing 11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

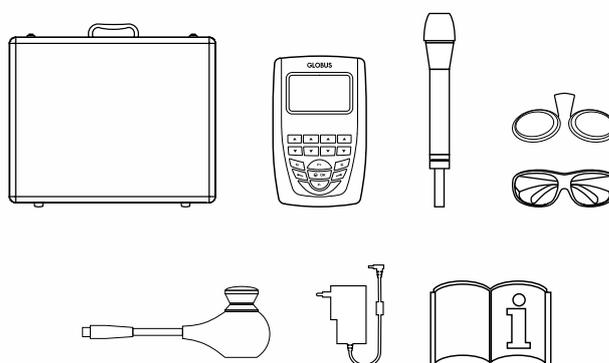

PUNTI FORZA



PHYSIOLASER 500

LASERTERAPIA

PRODOTTO INDICATO PER ACCELERARE IL RECUPERO DEI TESSUTI INFIAMMATI, RIGENERARE LE CELLULE E MIGLIORARE LA MICROCIRCOLAZIONE. PHYSIOLASER 500 FAVORISCE I NATURALI PROCESSI DI GUARIGIONE.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

0,5W \pm 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottica disponibile

Ottica, \varnothing 11 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3786

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 500


· 1 Handpiece White 808nm con ottica \varnothing 11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza


· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

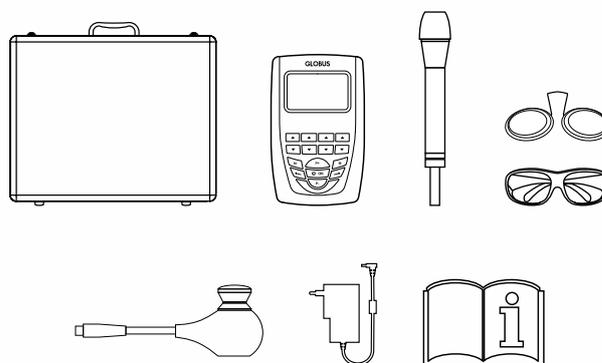

PUNTI FORZA



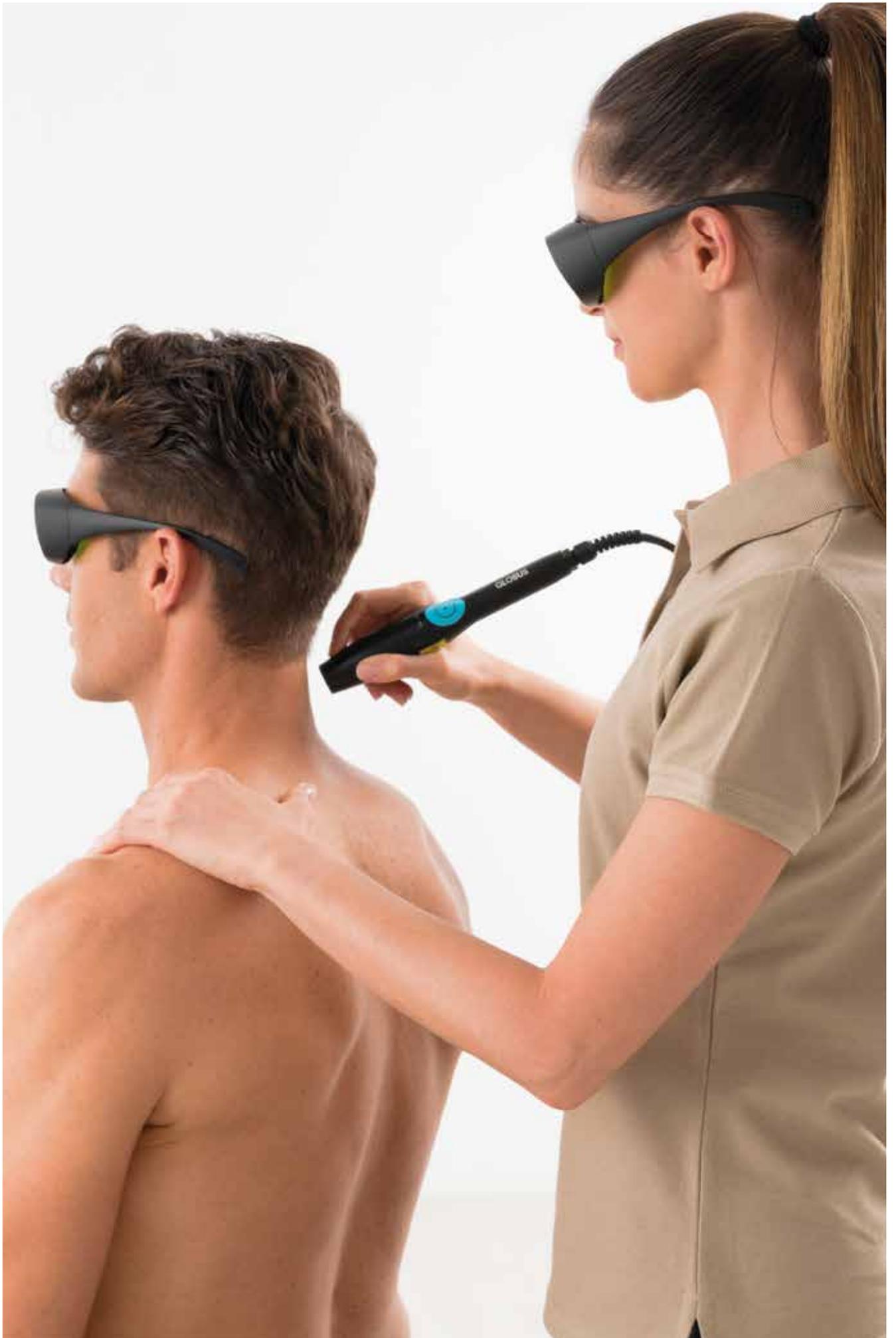

LASERTERAPIA

per podologia



PODCARE 12.0 PRO

LASERTERAPIA

DISPOSITIVO TOP DI GAMMA PER QUANTO RIGUARDA I LASER DEDICATI ALLA PODOLOGIA. CON I SUOI 12 W DI POTENZA MASSIMA PERMETTE DI EFFETTUARE DIVERSI TRATTAMENTI PODOLOGICI E MUSCOLO-SCHELETRICI OTTIMIZZANDO I TEMPI E GARANTENDO PROFONDITÀ DI AZIONE.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

12W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, Ø 11 mm

Ottica, Ø 22 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

220x170x60 mm

Peso

1,12 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5800

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PODCARE 12.0 PRO


· 1 Handpiece HP 808nm con ottiche Ø 11 mm e Ø 22 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

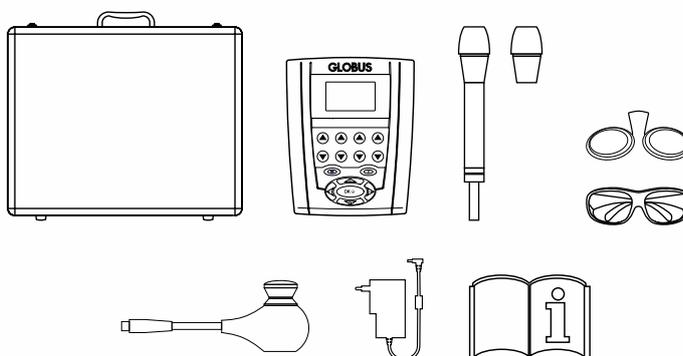

OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G5995 Manipolo HP 980nm

· Cod. G5996 Manipolo 1064nm



PUNTI FORZA



PODCARE 6.0 PRO

LASERTERAPIA

PODCARE 6.0 PRO È UN DISPOSITIVO DI PESO E DIMENSIONI CONTENUTE ADATTO SIA PER ESSERE POSIZIONATO IN UN CARRELLINO DA STUDIO CHE PER ESSERE TRASPORTATO, ALL'OCCORRENZA, IN ALTRI LOCALI. IL DISPOSITIVO È IDEALE PER APPLICAZIONI PODOLOGICHE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA MA SI COMPLETA CON UNA SERIE DI ALTRI PROGRAMMI SPECIFICI PER ULCERE, FERITE E DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

6W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, Ø 11 mm

Ottica, Ø 22 mm (opzionale)

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni


220x170x60 mm

Peso

1,12 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5762
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PODCARE 6.0 PRO
- 1 Handpiece MP 808nm con ottica Ø 11 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

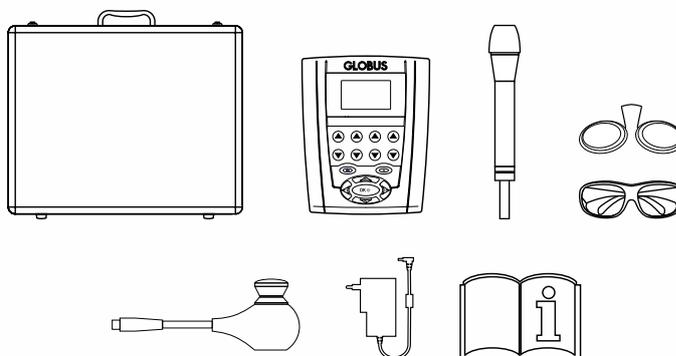

OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5994 Manipolo MP 980nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064nm
- Cod. G6092 Ottica Ø 22 mm



PUNTI FORZA



PODCARE 6.0

LASERTERAPIA

PODCARE 6.0 È UN DISPOSITIVO LEGGERO E PORTATILE, ADATTO PER ESSERE PORTATO SEMPRE CON SÉ SE SI EFFETTUANO TRATTAMENTI IN PIÙ AMBULATORI. È DOTATO DI UN DIODO A 808 nm CON POTENZA MASSIMA DI 6 W. IL DISPOSITIVO È IDEALE PER APPLICAZIONI PODOLOGICHE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA MA SI COMPLETA CON UNA SERIE DI ALTRI PROGRAMMI SPECIFICI PER ULCERE, FERITE E DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

6W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, Ø 11 mm

Ottica, Ø 22 mm (opzionale)

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni


100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5737
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PODCARE 6.0
- 1 Handpiece MP 808nm con ottica Ø 11 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

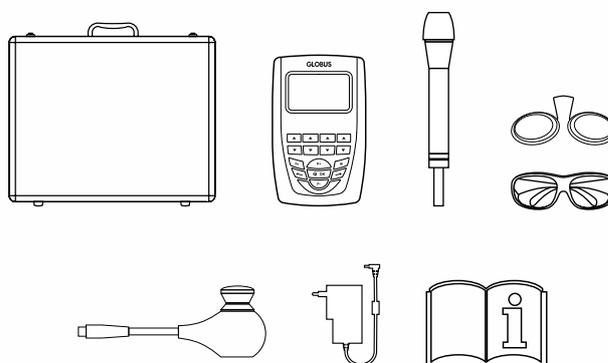

OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5994 Manipolo MP 980nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064nm
- Cod. G6092 Ottica Ø 22 mm



PUNTI FORZA



PODCARE 2.0

LASERTERAPIA

PODCARE 2.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE CHE DISPONE DI PROTOCOLLI PER TRATTARE DIVERSE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE APPLICAZIONI PODOLOGICHE COME L'ONICOMICOSI, L'ONICOCRIPTOSI E ALTRE PATOLOGIE INFIAMMATORIE TIPICHE DEL PIEDE E DELLA GAMBA.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

2W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, Ø 11 mm

Ottica, Ø 22 mm (opzionale)

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5736

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PODCARE 2.0


· 1 Handpiece Black 808nm con ottica Ø 11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

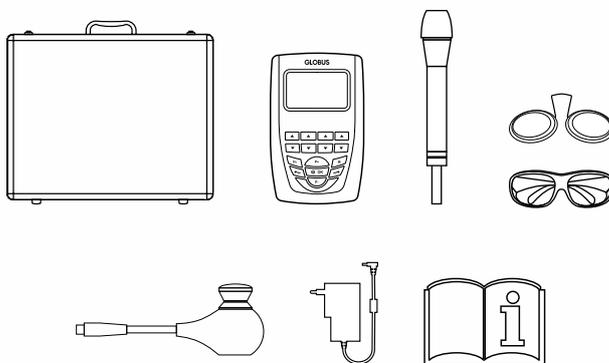

OPZIONE DI ACQUISTO

· Cod. G5547 Ottica Small Ø 3 mm



PUNTI FORZA



PRESSOTERAPIA



PRESSCARE G300M

PRESSOTERAPIA | 2 USCITE - 3 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO

DISPOSITIVO MEDICO ADATTO PER ESIGENZE DI SALUTE, BENESSERE, ESTETICA E RELAX. INDICATO PER LINFEDIEMI, PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE VENOSA, PESANTEZZA ALLE GAMBE, EDEMI, ARTI GONFI, LINFODRENAGGIO, RITENZIONE IDRICA, CELLULITE, MASSAGGI EMATOMI, STASI VENOSA. PUÒ ESSERE INOLTRE USATO CON TRE ACCESSORI CONTEMPORANEAMENTE. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DELL'UTILIZZO.

SPECIFICHE TECNICHE

Uscite

2

Programmi

3

Pressione

0-180mmHg \pm 10%

Timer

Fino a 99 minuti

Alimentazione a rete

230V-AC, 50Hz

Dimensioni

185x180x230 mm

Peso

3 Kg




DOTAZIONE DI SERIE

· Secondo il tipo di configurazione

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

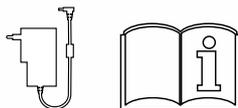

CONFIGURAZIONI DI ACQUISTO

· Cod. **G5411** PRESSCARE G300M-1, con 1 gambale taglia "S"

· Cod. **G5412** PRESSCARE G300M-1, con 1 gambale taglia "M"

· Cod. **G5413** PRESSCARE G300M-1, con 1 gambale taglia "L"

· Cod. **G5414** PRESSCARE G300M-2, con 2 gambali taglia "S"

· Cod. **G5415** PRESSCARE G300M-2, con 2 gambali taglia "M"


· Cod. **G5416** PRESSCARE G300M-2, con 2 gambali taglia "L"

· Cod. **G5417** PRESSCARE G300M-3, con 2 gambali taglia "S",
+ 1 fascia addominale/glutei

· Cod. **G5418** PRESSCARE G300M-3, con 2 gambali taglia "M",
+ 1 fascia addominale/glutei

· Cod. **G5419** PRESSCARE G300M-3, con 2 gambali taglia "L",
+ 1 fascia addominale/glutei

· Cod. **G5420** PRESSCARE G300M-1B, con 1 bracciale

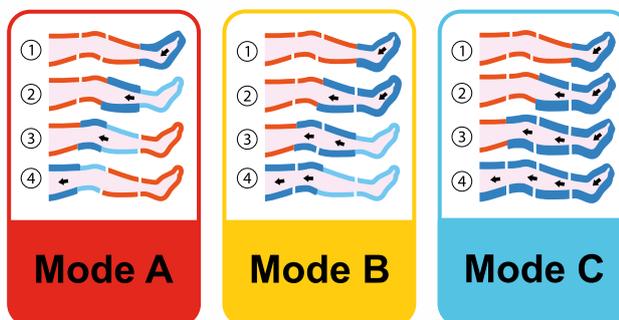

MODE A: la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più prossimale.

MODE B: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte.

MODE C: la sequenza del programma effettua la pressione partendo dal piede e mantenendo gonfie le camere precedenti fino a gonfiare l'intera parte (gamba, braccio o addome).

PRESSCARE G200M

PRESSOTERAPIA | 2 USCITE - 2 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO

DISPOSITIVO MEDICO ADATTO PER ESIGENZE DI SALUTE, BENESSERE, ESTETICA E RELAX. INDICATO PER LINFEDIEMI, PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE VENOSA, PESANTEZZA ALLE GAMBE, EDEMI, ARTI GONFI, LINFODRENAGGIO, RITENZIONE IDRICA, CELLULITE, MASSAGGI EMATOMI, STASI VENOSA. PUÒ ESSERE INOLTRE USATO CON TRE ACCESSORI CONTEMPORANEAMENTE. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DELL'UTILIZZO.


SPECIFICHE TECNICHE

Uscite
2
Programmi
2
Pressione
0-180mmHg ±10%
Timer
Fino a 99 minuti
Alimentazione a rete
230V-AC, 50Hz
Dimensioni
185x180x230 mm
Peso
3 Kg




DOTAZIONE DI SERIE

- Secondo il tipo di configurazione
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

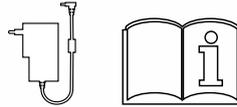

CONFIGURAZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G5401** PRESSCARE G200M-1, con 1 gambale taglia "S"
- Cod. **G5402** PRESSCARE G200M-1, con 1 gambale taglia "M"
- Cod. **G5403** PRESSCARE G200M-1, con 1 gambale taglia "L"
- Cod. **G5404** PRESSCARE G200M-2, con 2 gambali taglia "S"
- Cod. **G5405** PRESSCARE G200M-2, con 2 gambali taglia "M"
- Cod. **G5406** PRESSCARE G200M-2, con 2 gambali taglia "L"
- Cod. **G5407** PRESSCARE G200M-3, con 2 gambali taglia "S", + 1 fascia addominale /glutei
- Cod. **G5408** PRESSCARE G200M-3, con 2 gambali taglia "M", + 1 fascia addominale /glutei
- Cod. **G5409** PRESSCARE G200M-3, con 2 gambali taglia "L", + 1 fascia addominale /glutei
- Cod. **G5410** PRESSCARE G200M-1B, con 1 bracciale

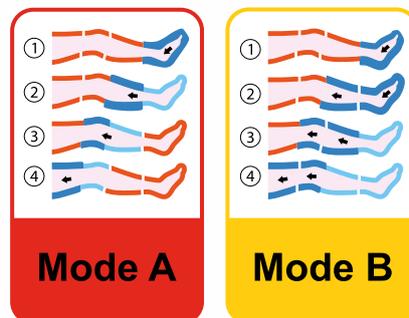

MODE A: la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più prossimale.

MODE B: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte.

BEAUTY & WELLNESS

CONTENUTI

- TECAR BEAUTY	76
• TECAR BEAUTY 7000 MED	78
• TECAR BEAUTY 7000	79
• TECAR BEAUTY ELITE	80
• TECAR BEAUTY 6000 MED 6000 MED RE	81
• KIT "FASCIA TOOLS"	82
• KIT "INTIMA"	84
- ELETTROSTIMOLAZIONE	86
• SHAPE & BEAUTY	89
• ACTIVA 700	90
• PREMIUM 400	91
• ELITE 150	92
• ELITE	93
• ELITE S2	94
• FAST BAND	96
• FAST PAD	97
- RADIOFREQUENZA	98
• RF CLINIC PRO	100
• RF CLINIC BODY	101
- ULTRASUONO	102
• LIPOZERO G39	104
• LIPOZERO G150	105
• LIPOZERO G800	106
• LIPOZERO EXCEL	107

TECAR BEAUTY



TECAR BEAUTY 7000 MED

TECARTERAPIA ESTETICA

IL MIGLIOR DISPOSITIVO CON CERTIFICAZIONE MEDICALE DELLA LINEA TECAR BEAUTY GLOBUS. IL DISPOSITIVO, DISPONE DI UN VASTO ELENCO DI PROGRAMMI CHE INCLUDE SIA TRATTAMENTI ESTETICI CHE PROTOCOLLI PER LE DIVERSE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE. IL MENÙ DI NAVIGAZIONE TOUCH SCREEN SU SCHERMO A COLORI COMPRENDE UN ATLANTE CON MOLTE IMMAGINI E UNA DESCRIZIONE PRATICA DI COME EFFETTUARE I TRATTAMENTI. INOLTRE, PER L'UTILIZZATORE ESPERTO, TECAR BEAUTY 7000 MED PERMETTE DI CREARE E MEMORIZZARE IN POCHI PASSI NUOVI PROGRAMMI.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

Potenza Nominale (NP)

350W \pm 10%

Frequenze di emissione

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, 1200kHz, \pm 10%

Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni \varnothing (30, 50, 70 mm)

Elettrodi Resistivi

3 dimensioni \varnothing (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240V-AC, 50-60Hz, 1,8A

Dimensioni


515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G6244
- 1 Unità di tecarterapia TECAR BEAUTY 7000 MED
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)
- 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi \varnothing (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi \varnothing (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo bipolare \varnothing (30 mm)
- 1 Kit di trattamento Mani Libere
- 1 Barattolo di crema conduttiva da 1000 ml
- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Manuale operativo

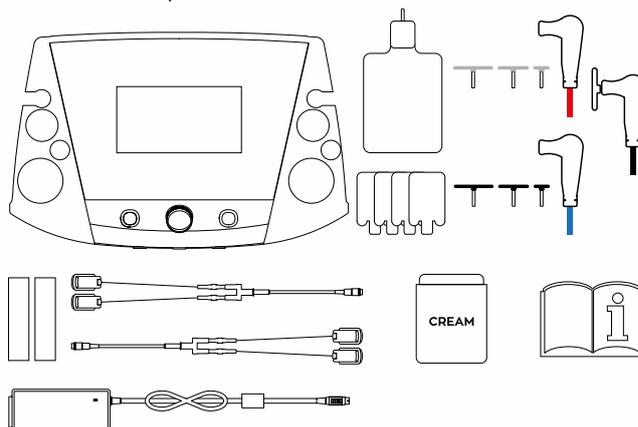

PROTOCOLLI
CERTIFICATI

0476

PUNTI FORZA



TECAR BEAUTY 7000

TECARTERAPIA ESTETICA

POTENTE E VERSATILE DISPOSITIVO DELLA GAMMA TECAR BEAUTY. DISPONE DI UN SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON SCHERMO TOUCH SCREEN A COLORI PER RENDERE PIÙ SEMPLICE LA RICERCA DEI TRATTAMENTI E LA MODIFICA DEI PARAMETRI, UN ATLANTE CHE DESCRIVE I TRATTAMENTI SUDDIVISI NELLE DIVERSE PARTI DEL CORPO CON FOTO A COLORI E UNA SEZIONE DOVE L'OPERATORE PUÒ STRUTTURARE E MEMORIZZARE I TRATTAMENTI PERSONALIZZATI. LA MIGLIORE ESPRESSIONE DELLA TECAR BEAUTY PER I TRATTAMENTI DI BELLEZZA!

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

Potenza

350W ±10%

Frequenze di emissione

400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, 1200kHz, ± 10%

Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Elettrodi Resistivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240V-AC, 50-60Hz, 1,8A

Dimensioni


515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G6248
- 1 Unità di tecarterapia TECAR BEAUTY 7000
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)
- 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo bipolare Ø (30 mm)
- 1 Kit di trattamento Mani Libere
- 1 Confezione da 500 ml di crema conduttiva viso all'acido ialuronico
- 1 Confezione da 1000 ml di crema conduttiva linfodrenante con escina, fucus e caffeina
- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Manuale operativo

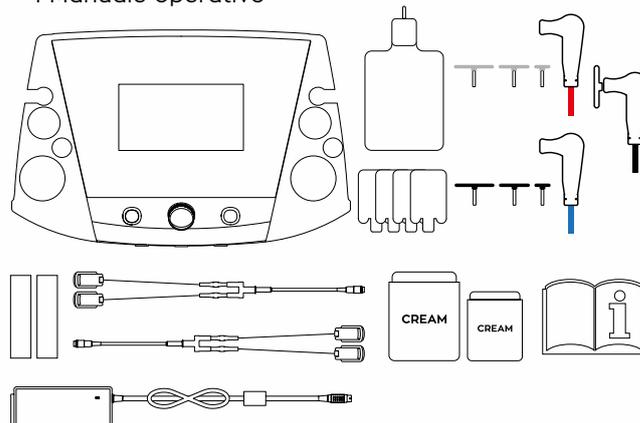

PUNTI FORZA



TECAR BEAUTY ELITE

TECARTERAPIA ESTETICA

LA TECAR BEAUTY È UNA METODICA NON INVASIVA CHE CONTRASTA L'INVECCHIAMENTO E LE LASSITÀ CUTANEE. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE PRODOTTE DAL DISPOSITIVO PENETRANO NEL DERMA RILASCIANDO CALORE NEI TESSUTI. QUESTO FA SÌ CHE VENGA STIMOLATA LA SINTESI DI NUOVO COLLAGENE ED ELASTINA MIGLIORANDO VISIBILMENTE LA COMPATTEZZA DELLA PELLE. INOLTRE IL CALORE PRODOTTO AIUTA LA MICROCIRCOLAZIONE, FAVORENDO UNA MIGLIORE OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI. DISPOSITIVO PROFESSIONALE ADATTO A STUDI ESTETICI.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

Potenza

50W ±10% Capacitivo

25W ±10% Resistivo

Frequenze di emissione

400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,
1000kHz, 1200kHz, ± 10%

Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240V-AC, 50-60Hz, 1,8A

Dimensioni

515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6243

· 1 Unità di tecarterapia TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi
Ø (30, 50, 70 mm)


· 1 Manipolo bipolare Ø (30 mm)

· 1 Confezione da 500 ml di crema conduttiva viso
all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 1000 ml di crema conduttiva
linfodrenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo

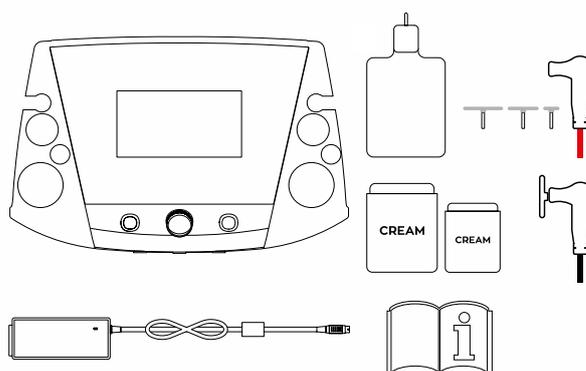

Nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 206/2015, il dispositivo è adatto per essere utilizzato nei centri estetici.

PUNTI FORZA



TECAR BEAUTY 6000 MED

TECAR BEAUTY 6000 MED RE

TECAR TERAPIA ESTETICA

TECAR BEAUTY 6000 MED E TECAR BEAUTY 6000 MED RE SONO DISPOSITIVI PORTATILI PER TECAR TERAPIA A TRASFERIMENTO CAPACITIVO E RESISTIVO. DOTATI DI DIVERSI PROGRAMMI PREDEFINITI PER TRATTARE I PRINCIPALI INestetismi DELLA PELLE E DEI TESSUTI SOTTOCUTANEI, PRESENTANO ANCHE ALCUNI PROGRAMMI PER TRATTARE LE PRINCIPALI PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE.

27 BELLEZZA | 5 MEDICALI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 4.3" display touch screen a colori

Potenza Nominale (NP)

180W ±10%

Frequenze di emissione

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz,
700kHz, 1000kHz, ± 10%

Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Elettrodi Resistivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240V-AC, 50-60Hz, 1,8A

Dimensioni

170x220x60 mm

Peso

1,04 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6246

· 1 Valigetta

· 1 Unità di tecarterapia TECAR BEAUTY 6000 MED

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi
Ø (30, 50, 70 mm)


· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi
Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare Ø (30 mm)

· 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

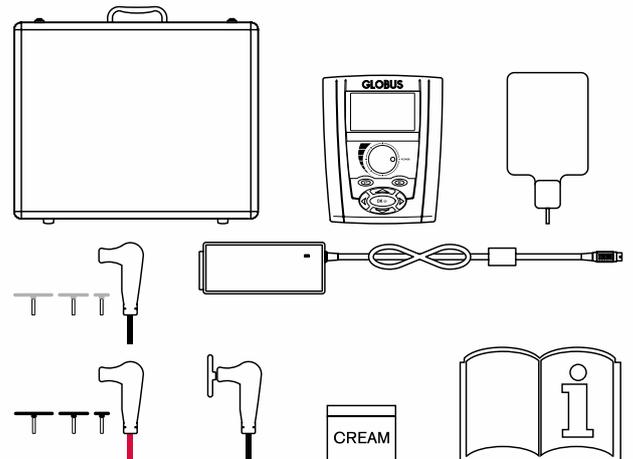

OPZIONE DI ACQUISTO

· Cod. G6247 TECAR BEAUTY 6000 MED RE*

* TECAR BEAUTY RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET



PUNTI FORZA



KIT “FASCIA TOOLS”

STRUMENTI AVANZATI PER LA MOBILIZZAZIONE DEI TESSUTI MOLLI DA USARE NELLA NOSTRA LINEA DI DISPOSITIVI “TECAR BEAUTY”

Gli speciali manipoli resistivi hanno una forma anatomica che rende particolarmente efficace il trattamento su cosce, glutei, fianchi e braccia. La combinazione del trattamento manuale con i manipoli miofasciali, insieme all'energia di TECAR BEAUTY, offre una straordinaria e nuova possibilità di trattamento.

L'applicazione di TECAR BEAUTY con gli speciali manipoli resistivi permette di:

- **MOBILIZZARE LE DENSIFICAZIONI DEL CONNETTIVO**
- **VASCOLARIZZARE E TRATTARE NODULI FIBROSI E SCLEROTICI**
- **LAVORARE IN MASSIMA ERGONOMIA E PRECISIONE DI TRATTAMENTO**



DiaBlade Large



DiaBlade Small



DiaBlade Large



DiaBlade Small





KIT “INTIMA”

STRUMENTI AVANZATI PER MIGLIORARE IL TONO DEL PAVIMENTO PELVICO DA USARE NELLA NOSTRA LINEA DI DISPOSITIVI “TECAR BEAUTY”


La precisione dei nostri dispositivi TECAR permette di agire in modo efficace e in totale sicurezza e comfort, anche per risolvere problemi direttamente legati all'area genitale.


Per questo motivo GLOBUS ha creato il KIT “INTIMA”, con accessori specifici che permettono di effettuare trattamenti interni ed esterni per migliorare la salute del pavimento pelvico, sia nell'uomo che nella donna, e per agire sul ringiovanimento e l'elasticità vaginale, oltre a garantire ottimi risultati in caso di cicatrici da parto.

I trattamenti più frequenti con il KIT “INTIMA”, ideali per ristabilire il comfort intimo sono:

- LASSITÀ VAGINALE
- CICATRICI DA PARTO
- DIASTASI ADDOMINALE
- SINDROMI MIOFASCIALI ENDOPELVICHE
- RIABILITAZIONE PERINEALE UOMO E DONNA
- RINGIOVANIMENTO DEL PAVIMENTO PELVICO
- LIFTING

Cod. **G6421** KIT “INTIMA” per linea TECAR BEAUTY 7000 | Cod. **G6420** KIT “INTIMA” per TECAR BEAUTY 6000 MED

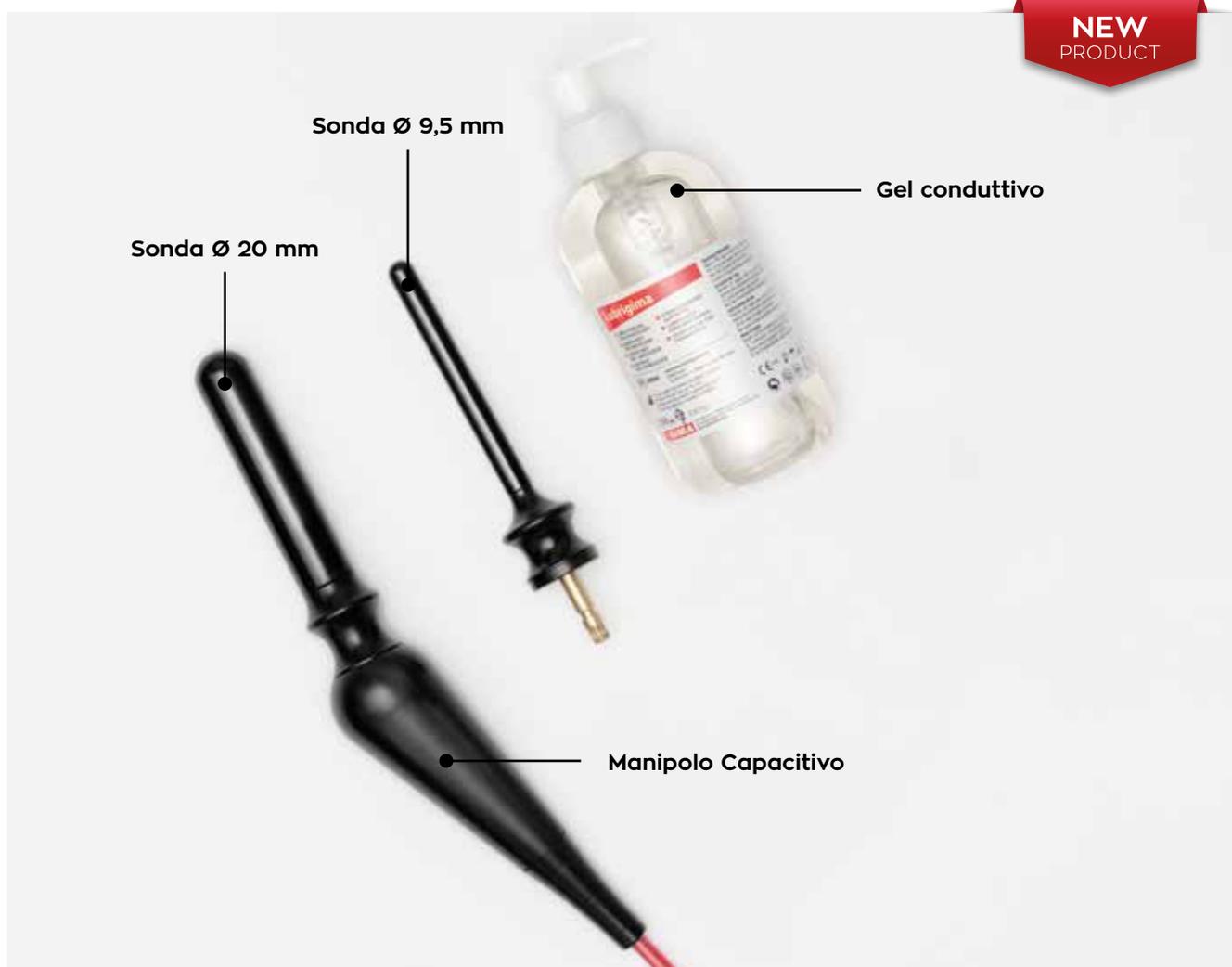

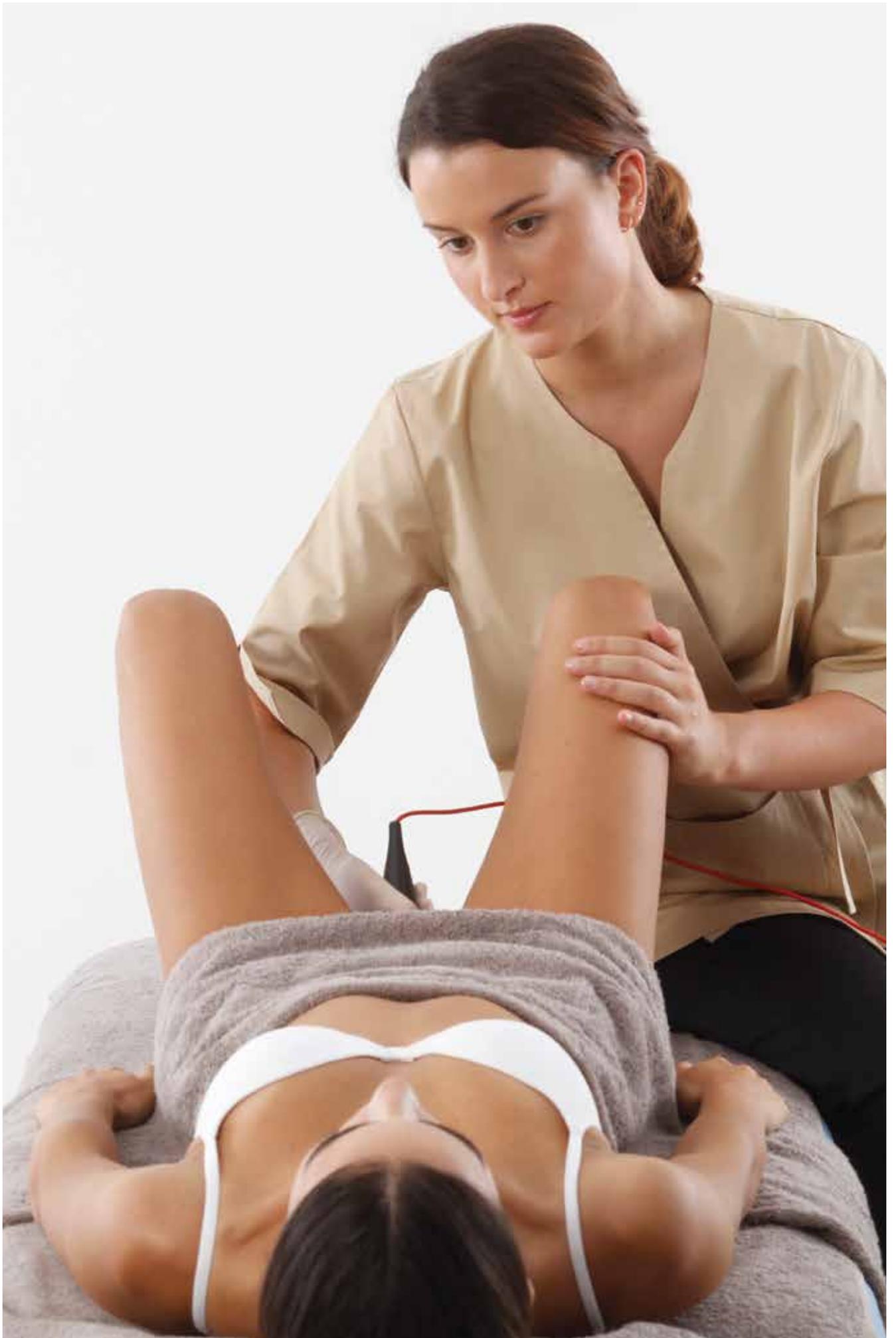

ELETTROSTIMOLAZIONE





SHAPE & BEAUTY

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI

SHAPE & BEAUTY È UN DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER LA TONIFICAZIONE E IL RASSODAMENTO DEL CORPO CHE PERMETTERÀ DI MODELLARE LE CURVE E MIGLIORARE LA FORMA DEL CORPO IN POCHE SEDUTE.

I PROTOCOLLI PREIMPOSTATI ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO GUIDERANNO LA SCELTA DELL'APPLICAZIONE PIÙ ADATTA IN FUNZIONE DELL'OBIETTIVO, SEGUENDO UNA PROGRESSIONE DI LAVORO CHE PERMETTERÀ DI OTTENERE RISULTATI VISIBILI GIÀ DOPO QUALCHE SETTIMANA.

IL DISPOSITIVO DISPONE ANCHE DI ALCUNI PROGRAMMI DI MASSAGGIO RILASSANTE E DECONTRATTURANTE E ALTRI DI VASCOLARIZZAZIONE E CAPILLARIZZAZIONE, PER MIGLIORARE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI IN ECCESSO.

IL MANIPOLO G-TRODE, IN DOTAZIONE CON IL DISPOSITIVO, HA UN POTENTISSIMO EFFETTO RIGENERANTE E BIODIMENSIONANTE DELLA PELLE, AGENDO SU RUGHE DI ESPRESSIONE, SMAGLIATURE E PICCOLE CICATRICI DA ACNE. SHAPE & BEAUTY È L'ALLEATO PERFETTO PER LA TUA CLINICA DELLA BELLEZZA!


SPECIFICHE TECNICHE

Display
Dimensione area visibile 2,6"
Canali
4 indipendenti (8 elettrodi)
Frequenza
0,3-150Hz *
Larghezza impulso
40-450µs *
Intensità
0-120mA per canale
Alimentazione
Batterie ricaricabili
Dimensioni
170x220x60 mm
Peso
1,12 Kg

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G6230
- 1 Valigetta
- 1 Stimolatore SHAPE & BEAUTY
- 1 Manipolo G-Trode - Rigenerazione pelle
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

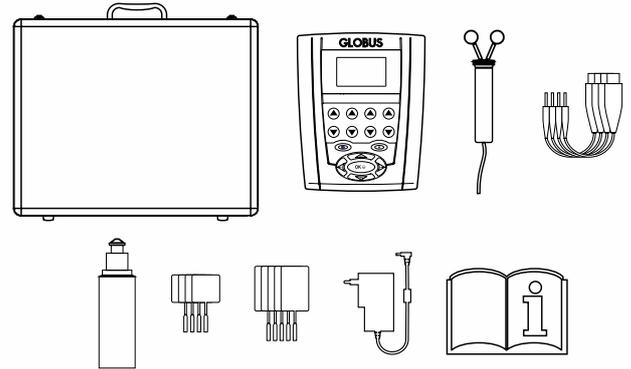

PUNTI FORZA



ACTIVA 700

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 271 PROGRAMMI

PRODOTTO PER LA BELLEZZA E LA FORMA FISICA, IDEATO CON PROGRAMMI SPECIFICI PER IL RASSODAMENTO, LA TONIFICAZIONE E IL RINGIOVANIMENTO. LO SPECIALE MANIPOLO G-TRODE (IN DOTAZIONE) RENDE ACTIVA 700 UN TOP DI GAMMA DELLA LINEA ELETTROSTIMOLAZIONE.

60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 53 SPORT | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 21 SPORT SPECIALI | 13 RUGHE-PELLE
12 MICROCORRENTI | 12 TENS | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

450 gr


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3550
- 1 Valigetta
- 1 Stimolatore ACTIVA 700
- 1 Manipolo G-Trode
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionoforesi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

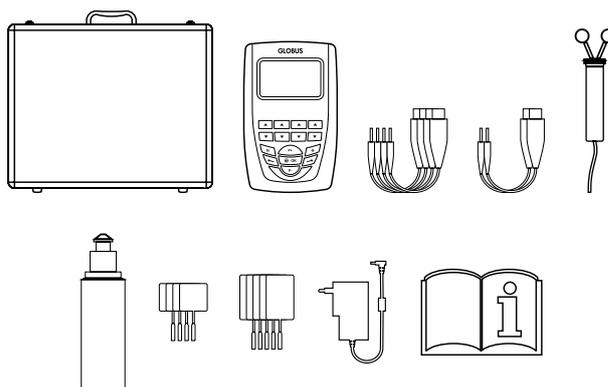

PUNTI FORZA

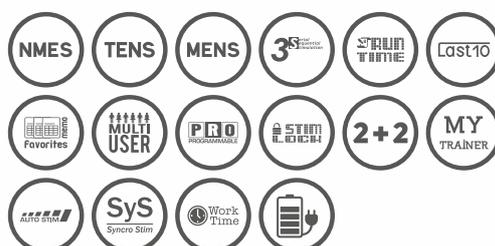

PREMIUM 400

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 258 PROGRAMMI

OLTRE 250 PROGRAMMI SUL PALMO DI UNA MANO, PREMIUM 400 È L'ELETTROSTIMOLATORE IDEALE PER LO SPORT E PER LA CURA DELLA PROPRIA BELLEZZA, PER LUI E PER LEI.

58 FITNESS | 53 SPORT | 44 SPORT SPECIALI | 36 BELLEZZA | 23 MICROCORRENTI | 18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI


SPECIFICHE TECNICHE

Display
Dimensione area visibile 2,6"
Canali
4 indipendenti (8 elettrodi)
Frequenza
0,3-150Hz *
Larghezza impulso
40-450µs *
Intensità
0-120mA per canale
Alimentazione
Batterie ricaricabili
Dimensioni
100x160x35 mm
Peso
450 gr


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3551
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore PREMIUM 400
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

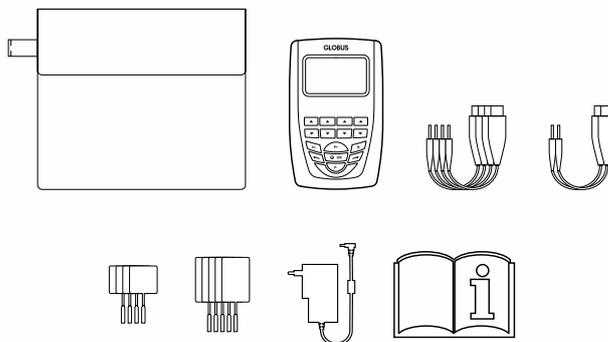

PUNTI FORZA

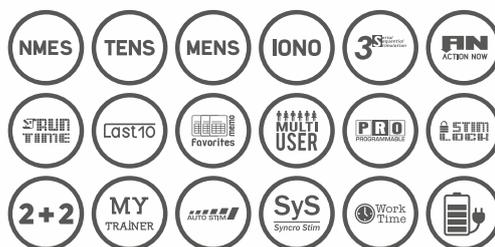

ELITE 150

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 150 PROGRAMMI

PRODOTTO STUDIATO PER LO SPORT E IL FITNESS MA CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE ANCHE AI TRATTAMENTI DI BELLEZZA GRAZIE ALLE NUOVE CORRENTI DI STIMOLAZIONE SEQUENZIALE, OTTIME PER I LORO EFFETTI DRENANTI.

36 BELLEZZA | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 32 FITNESS | 31 SPORT | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G1416

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore ELITE 150


· 4 Cavi per collegamento elettrodi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati

· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo

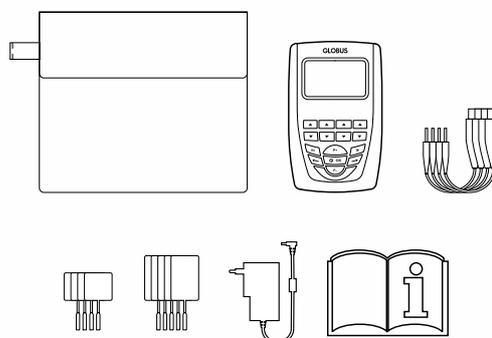

PUNTI FORZA



ELITE

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 98 PROGRAMMI

PRODOTTO A QUATTRO CANALI PER QUALSIASI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

32 SPORT | 29 BELLEZZA | 26 FITNESS | 9 TENS | 2 REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

440 gr

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G4300

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore ELITE


· 4 Cavi per collegamento elettrodi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati

· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo

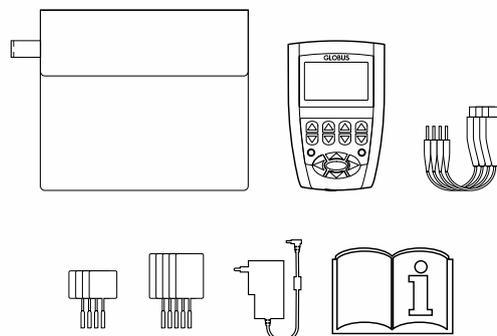

PUNTI FORZA



ELITE S2

ELETTROSTIMOLAZIONE 2 CANALI | 100 PROGRAMMI

IL PRODOTTO A DUE CANALI PER OGNI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

44 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE | 30 SPORT | 16 TENS | 6 PREVENZIONE | 3 REHAB | 1 INCONTINENZA

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,5"

Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

Frequenza

1-150Hz

Larghezza impulso

50-400µs

Intensità

0-100mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

80x130x25 mm

Peso

220 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3552

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore ELITE S2


· 2 Cavi per collegamento elettrodi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati

· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo

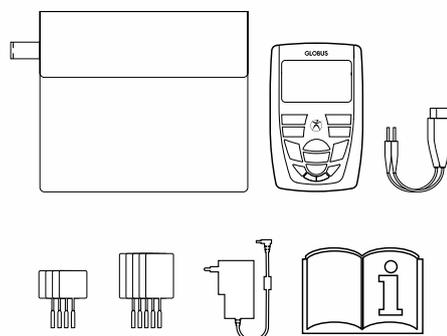

PUNTI FORZA





FAST BAND

FASCIA ADDOMINALE

FAST BAND È UNA FASCIA CHE SI COLLEGA FACILMENTE A TUTTI GLI ELETTROSTIMOLATORI GLOBUS A 2 E 4 CANALI. CON LA FAST BAND, SENZA UTILIZZARE GLI ELETTRODI CLASSICI, PUOI STIMOLARE IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE I MUSCOLI ADDOMINALI ED OBLIQUI, LA ZONA LOMBARE ED I GLUTEI.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

980x150 mm

Peso


214 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. **G0487**

· 1 Fascia FAST BAND


· 4 Adattatori a clip

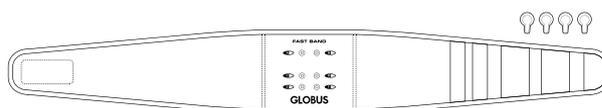

CE

OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. **G0488** FAST BODY KIT: "FAST BAND" + "FAST PAD"

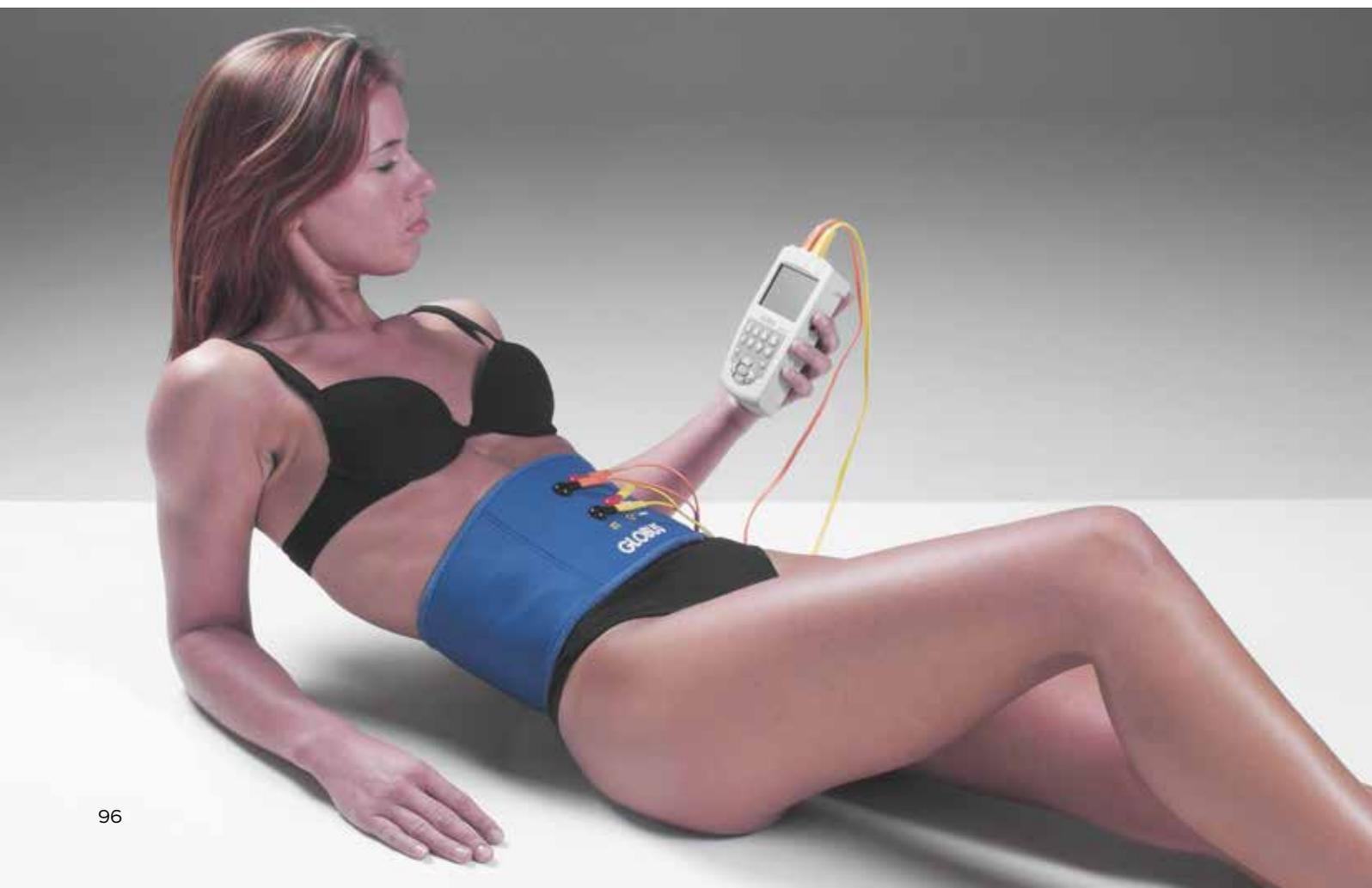

FAST PAD

FASCE PER LE GAMBE

FAST PAD SONO FASCE CHE SI COLLEGANO FACILMENTE A TUTTI GLI ELETTROSTIMOLATORI GLOBUS A 2 E 4 CANALI. SONO IDEALI PER EFFETTUARE TRATTAMENTI DI STIMOLAZIONE SPECIFICI PER LE GAMBE IN MODO CONFORTEVOLE ED EFFICACE. SONO INOLTRE CARATTERIZZATE DA UNA FORMA OVALE CON AMPIA SUPERFICIE DI CONTATTO E VENGONO COLLEGATE ALL'ELETTROSTIMOLATORE TRAMITE ADATTATORI A CLIP.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni


250x150 mm

Peso

60 gr (singola fascia)

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. **G0489**
- 2 Fasce FAST PAD
- 4 Adattatori a clip
- Gel

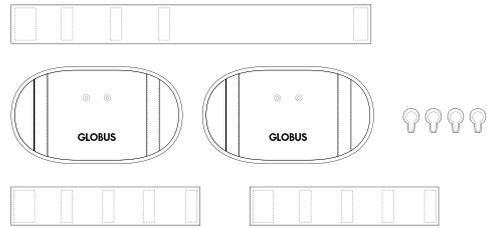

CE

OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G0488** FAST BODY KIT: "FAST BAND" + "FAST PAD"



RADIOFREQUENZA



RF CLINIC PRO

RADIOFREQUENZA | 30 PROGRAMMI

RF CLINIC PRO È UN INNOVATIVO APPARECCHIO PROFESSIONALE CHE GENERA ONDE DI RADIOFREQUENZA PER APPLICAZIONI ESTETICHE, CONTRO L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE SIA DEL VISO CHE DI TUTTO IL CORPO. GRAZIE AL MANIPOLO BIPOLARE DA 50 MM È POSSIBILE EFFETTUARE PROGRAMMI DI RASSODAMENTO E PER IL TRATTAMENTO DELLA CELLULITE.

13 PELLE | 10 CELLULITE | 7 VISO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

- 1 manipolo RF Clinic 100, Ø 50 mm
- 1 manipolo RF Clinic 100 a doppia sfera

Potenza

200W (50 Ω)

Frequenza erogabile

da 470kHz a 2MHz

Modalità di trattamento

Resistivo

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1506
- 1 Valigetta
- 1 Unità di radiofrequenza RF CLINIC PRO
- 1 Manipolo RF Clinic 500
- 1 Manipolo RF Clinic 100
- 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

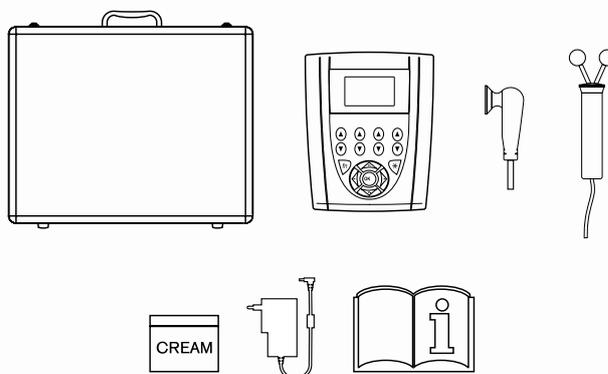

CE



PUNTI FORZA



RF CLINIC BODY

RADIOFREQUENZA | 10 PROGRAMMI

RF CLINIC BODY È UN INNOVATIVO APPARECCHIO CHE GENERA ONDE DI RADIOFREQUENZA PER APPLICAZIONI ESTETICHE, CONTRO L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE SIA DEL VISO CHE DI TUTTO IL CORPO. FAVORISCE INOLTRE LA VASCOLARIZZAZIONE DEL TESSUTO CUTANEO, ELIMINANDO GLI INestetismi CAUSATI DALL'ESPOSIZIONE DEI RAGGI SOLARI E DALL'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE.

6 PELLE | 4 VISO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

1 manipolo RF Clinic 100 a doppia sfera

Potenza

200W (50 Ω)

Frequenza erogabile

Da 470kHz a 2MHz

Modalità di trattamento

Resistivo

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1507
- 1 Valigetta
- 1 Unità di radiofrequenza RF CLINIC BODY
- 1 Manipolo RF Clinic 100
- 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

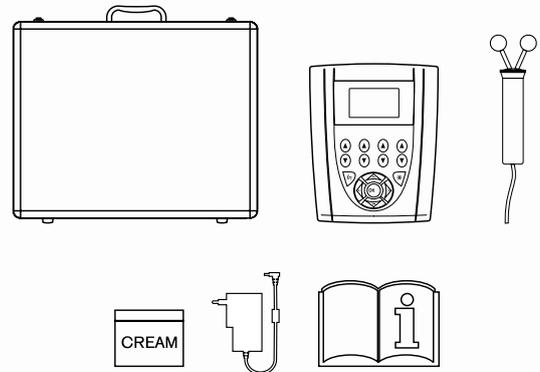

CE



PUNTI FORZA



ULTRASUONO



LIPOZERO G39

ULTRASUONO ESTETICA | 49 PROGRAMMI

LIPOZERO G39 È L'ULTRASUONO LIPOLITICO PROFESSIONALE CHE COMBATTE LA CELLULITE ED ELIMINA IL GRASSO SUPERFLUO GRAZIE A PROGRAMMI STUDIATI PER INTERVENIRE A FREQUENZE DIVERSE E GARANTIRE LA MASSIMA EFFICACIA IN OGNI TRATTAMENTO DI BELLEZZA.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZZA | 10 PELLE | 6 CAVITAZIONE CAVIMAX 150 kHz
5 MOBILIZZAZIONE ADIPOSITÀ NorAd-526 | 4 ADIPOSITÀ MASCHILE | 4 ULTRACAV 39 kHz

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

- 1 manipolo Ø 50 mm - IP68
- 1 manipolo Ø 42 mm - IP68

Potenza

3W/cm² ± 20%

Frequenza erogabile

3MHz - 1MHz - 526kHz - 150kHz - 39kHz

Emissione

Continua e pulsata

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1404
- 1 Valigetta
- 1 Ultrasuono LIPOZERO G39
- 1 Manipolo multifrequenza, Ø 42 mm - IP68
- 1 Manipolo per l'uso con i 39kHz, Ø 50 mm - IP68
- 1 Confezione di gel da 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

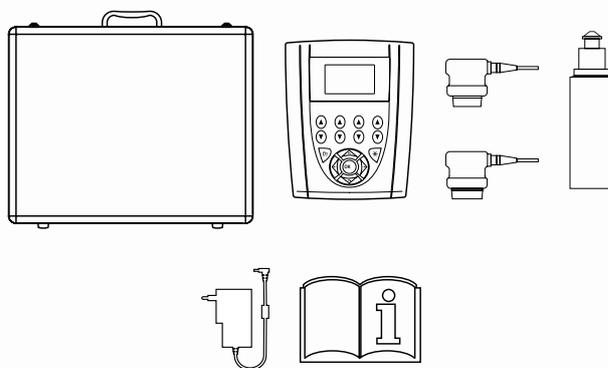

CE



PUNTI FORZA



LIPOZERO G150

ULTRASUONO ESTETICA | 42 PROGRAMMI

LA CAVITAZIONE ULTRASONICA È LA PIÙ EFFICACE METODOLOGIA DI LAVORO PER COMBATTERE LA CELLULITE ED ELIMINARE IL GRASSO SUPERFLUO. CON LIPOZERO G150 POTRAI BENEFICIARE DEI TRATTAMENTI PROFESSIONALI DI UN CENTRO ESTETICO COMODAMENTE A CASA TUA.

10 MF-PLUS | 9 CAVITAZIONE CAVIMAX 150 kHz | 8 BELLEZZA | 8 PELLE
5 MOBILIZZAZIONE ADIPOSITÀ NorAd-526 | 2 ADIPOSITÀ MASCHILE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

1 manipolo Ø 42 mm - IP68

Potenza

3W/cm² ± 20%

Frequenza erogabile

3MHz - 1MHz - 526kHz - 150kHz

Emissione

Continua e pulsata

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1398
- 1 Valigetta
- 1 Ultrasuono LIPOZERO G150
- 1 Manipolo multifrequenza, Ø 42 mm - IP68
- 1 Confezione di gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

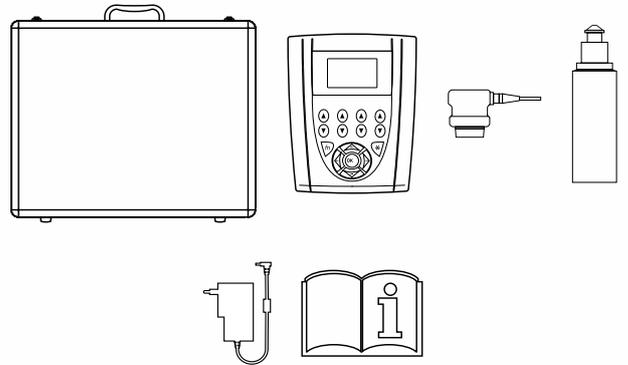

CE



PUNTI FORZA



LIPOZERO G800

ULTRASUONO ESTETICA | 30 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER L'ESTETICA PROFESSIONALE, INDICATO PER COMBATTERE GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE E LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE. E PER MIGLIORARE L'ASPETTO DELLA PELLE.
LA POSSIBILITÀ DI EROGARE CON DIVERSE FREQUENZE GARANTIRÀ UN TRATTAMENTO SPECIFICO ED EFFICACE PER OGNI OBIETTIVO.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZZA | 10 PELLE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

1 manipolo Ø 42 mm - IP68

Potenza

- 3W/cm² ± 20% a 1,3MHz e 3MHz
- 1,5W/cm² ± 20% a 1MHz e 800kHz

Frequenza erogabile

3MHz - 1,3MHz - 1MHz - 800kHz

Emissione

Continua e pulsata

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni

170x220x60 mm

Peso

920 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6232

· 1 Valigetta


· 1 Ultrasuono LIPOZERO G800

· 1 Manipolo multifrequenza, Ø 42 mm - IP68

· 1 Confezione di gel

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

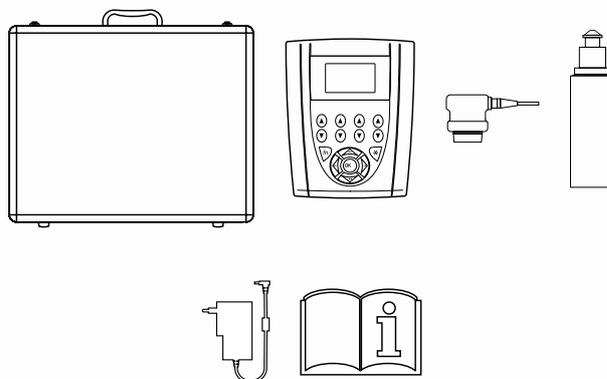

CE

Nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 206/2015, il dispositivo è adatto per essere utilizzato nei centri estetici.



PUNTI FORZA



LIPOZERO EXCEL

ULTRASUONO ESTETICA | 7 PROGRAMMI

LIPOZERO EXCEL FA PARTE DELLA LINEA HOME CARE DI GLOBUS, ED È STATO STUDIATO PER PERMETTERE DI FARE A CASA PROPRIA I TRATTAMENTI PROFESSIONALI DEI CENTRI ESTETICI. IL DESIGN PORTATILE E IL MENÙ GRAFICO SONO STATI STUDIATI APPOSITAMENTE PER L'USO DOMESTICO E NE PERMETTONO UN FACILE UTILIZZO ANCHE A PERSONE POCO ESPERTE. LIPOZERO EXCEL CONSENTE TRA L'ALTRO IL TRATTAMENTO DEI PIÙ COMUNI INESTETISMI LEGATI ALLA CELLULITE O ALL'ACCUMULO DI GRASSO.

5 BELLEZZA | 2 CELLULITE

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

1 manipolo Ø 42 mm - IP68

Potenza

1,2W/cm² ± 20%

Frequenza erogabile

3MHz

Emissione

Continua e pulsata

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


100x160x35 mm

Peso

270 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1297
- 1 Valigetta
- 1 Ultrasuono LIPOZERO EXCEL
- 1 Manipolo da 3MHz, Ø 42 mm - IP68
- 1 Confezione di gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

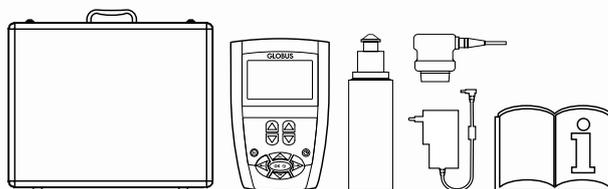

CE



PUNTI FORZA



SPORT

CONTENUTI

- ELETTROSTIMOLAZIONE	110
• THE CHAMPION	112
• TRIATHLON PRO	113
• CYCLING PRO	114
• SOCCER PRO	115
• RUNNER PRO	116
- PRESSOTERAPIA	118
• PRESSCARE G-SPORT ³	119
RELAX	120
• 4 VIBE MASSAGE GUN	122
- PEDANA VIBRANTE	124
• PHYSIOPLATE MY GOLD	125
- SPARAPALLONI	126
• EUROGOAL 1500	128
• EUROGOAL 600	129
• WINSHOT 1500	130
• WINSHOT 800	131
• WINSHOT 500	132
• RUGBYKICK	133



ELETTROSTIMOLAZIONE



THE CHAMPION

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 441 PROGRAMMI

DISPOSITIVO IDEALE PER GLI AMANTI DELLO SPORT. SONO BEN 12 LE DISCIPLINE SPORTIVE INCLUSE NEL DISPOSITIVO, OGNUNA DELLE QUALI PREVEDE PROGRAMMI SPECIFICI PER INCREMENTARE LA MUSCOLATURA E MIGLIORARE LA PERFORMANCE. I PROGRAMMI PROPOSTI SONO ADATTI SIA A COLORO CHE PRATICANO SPORT A LIVELLO AMATORIALE, SIA PER I PROFESSIONISTI CHE SEGUONO GIÀ DELLE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E CHE VOGLIONO INTEGRARE IL LAVORO CON DELLE SEDUTE DI ELETTROSTIMOLAZIONE MIRATA.

90 SPORT SPECIALI | 84 ACTION NOW | 70 BELLEZZA | 58 FITNESS | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 53 SPORT
23 MICROCORRENTI | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5015

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore THE CHAMPION

· 4 Cavi per collegamento elettrodi


· 2 Cavi per microcorrente e ionofresi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati


· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo

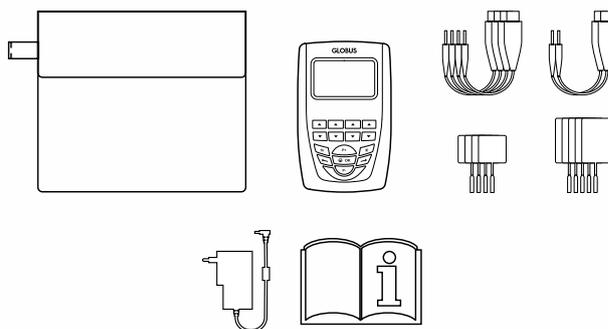

PUNTI FORZA

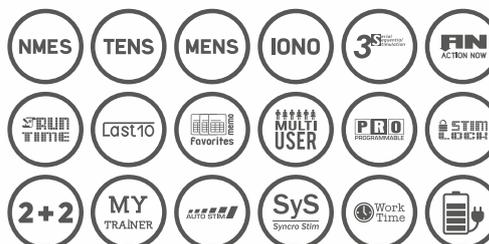

TRIATHLON PRO

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 424 PROGRAMMI

DISPOSITIVO CHE OLTRE AD AVERE UNA VASTA GAMMA DI PROGRAMMI SPORT, FITNESS BELLEZZA E REHAB, PREVEDE UNA SERIE DI PROGRAMMI SPECIFICI RIVOLTI A MIGLIORARE LA PERFORMANCE FISICA DEGLI ATLETI. I PROGRAMMI SPECIFICI PER IL TRIATHLON PRO SONO SUDDIVISI IN AREE CORRISPONDENTI ALLE TRE DISCIPLINE SPORTIVE (NUOTO, CICLISMO, CORSA). UNA PRATICA GUIDA DI UTILIZZO VI AIUTERÀ A SCEGLIERE I PROGRAMMI PIÙ ADATTI A SECONDA DELLE DISTANZE CHE PRATICATE.

84 ACTION NOW | 60 SPECIALE TRIATHLON | 60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
53 SPORT | 23 MICROCORRENTI | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

450 gr


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3666
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore TRIATHLON PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

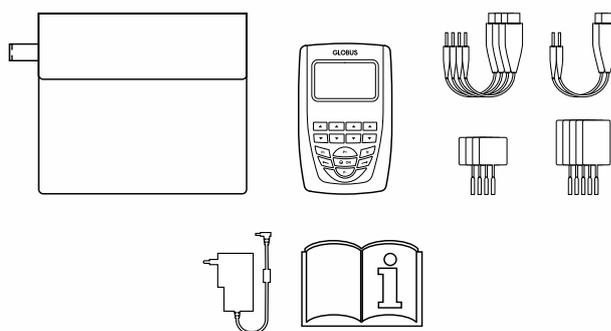

PUNTI FORZA

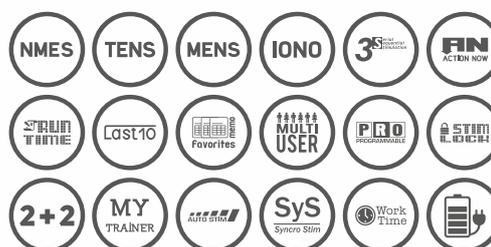

CYCLING PRO

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 270 PROGRAMMI

DISPOSITIVO DEDICATO AI CICLISTI CHE VOGLIONO STARE BENE E SENTIRSI IN FORMA DURANTE LA LORO ATTIVITÀ IN BICICLETTA. I PROGRAMMI SPECIFICI PER IL CICLISMO SONO SUDDIVISI IN MACROAREE: PREPARAZIONE FISICA, PREVENZIONE, DOLORE-INFORTUNI E RECUPERO.

58 FITNESS | 53 SPORT | 46 SPECIALE CICLISMO | 36 BELLEZZA | 23 MICROCORRENTI
18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 G-PULSE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G4230

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore CYCLING PRO

· 4 Cavi per collegamento elettrodi


· 2 Cavi per microcorrente e ionofresi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati


· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo

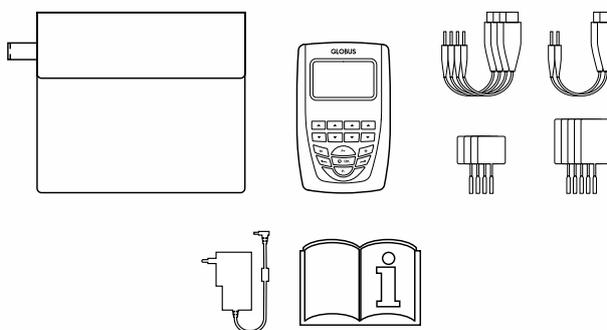

PUNTI FORZA

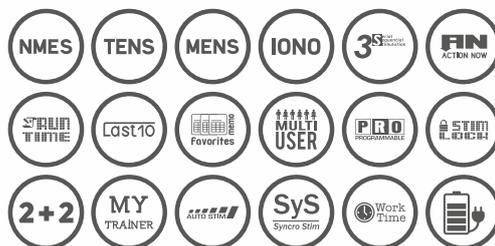

SOCCER PRO

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 258 PROGRAMMI

SOCCER PRO È L'UNICO ELETTROSTIMOLATORE PRESENTE SUL MERCATO, CREATO CON PROGRAMMI SPECIFICI VOLTI A MIGLIORARE LA PERFORMANCE FISICA DEI GIOCATORI DI CALCIO. I PROGRAMMI SONO DIVISI IN QUATTRO GROSSE AREE CHE CORRISPONDONO AI PRINCIPALI CAMPI DI INTERVENTO DELLA PREPARAZIONE ATLETICA NEL GIOCO DEL CALCIO.

58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BELLEZZA | 34 SPECIALE CALCIO | 23 MICROCORRENTI

18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 G-PULSE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

450 gr


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G4228
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore SOCCER PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

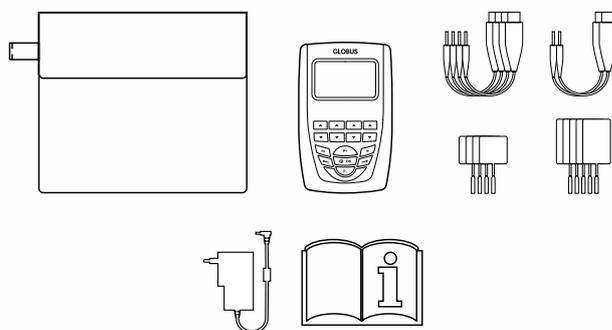

PUNTI FORZA

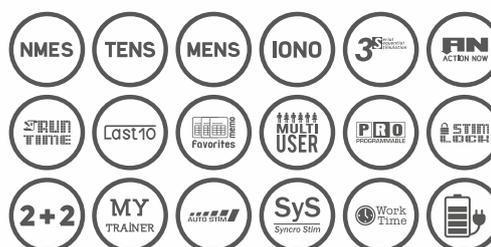

RUNNER PRO

ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 254 PROGRAMMI

RUNNER PRO È UNO STRUMENTO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER IL PODISTA MODERNO CHE VUOLE OTTENERE DEI MIGLIORAMENTI NELLA PRESTAZIONE. RUNNER PRO È DOTATO DI PROGRAMMI ADATTI A STIMOLARE LA MUSCOLATURA DI COLORO CHE CORRONO E OGNI RUNNER SARÀ IN GRADO DI PROGRAMMARE E PERSONALIZZARE I SUOI ALLENAMENTI IN BASE ALLE ESIGENZE PERSONALI. I PROGRAMMI SUDDIVISI IN QUATTRO MACRO-OBIETTIVI, SONO ADATTI SIA PER IL PODISTA AMATORIALE CHE PER IL PROFESSIONISTA.

58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BELLEZZA | 30 SPECIALE RUNNING | 23 MICROCORRENTI
18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G4229

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore RUNNER PRO

· 4 Cavi per collegamento elettrodi


· 2 Cavi per microcorrente e ionofresi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati


· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo

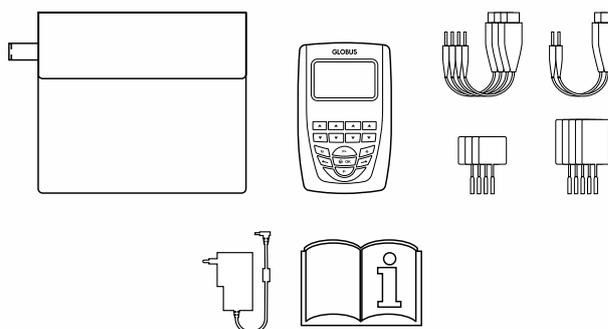

PUNTI FORZA

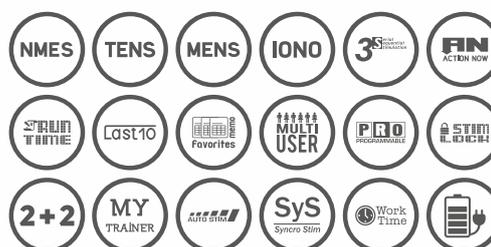



PRESSOTERAPIA

PRESSCARE G-SPORT³

PRESSOTERAPIA | 2 USCITE - 3 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO

DISPOSITIVO PER COMPRESIONE PNEUMATICA RIVOLTO AGLI SPORTIVI, REALIZZATO PER VELOCIZZARE IL RECUPERO MUSCOLARE E LA STANCHEZZA POST ALLENAMENTO E GARA. LEGGERA E TRASPORTABILE OVUNQUE, IL POWER BANK DI CUI È DOTATA PERMETTE DI ESEGUIRE UN TRATTAMENTO ANCHE SUBITO DOPO UNA GARA, DIRETTAMENTE A BORDO CAMPO.

SPECIFICHE TECNICHE


Uscite
2
Programmi
3
Pressione
0-180mmHg \pm 10%
Timer
Fino a 99 minuti
Alimentazione
- Rete, 100-240V-AC, 50-60Hz - Batteria ricaricabile (Power Bank)
Dimensioni
180x190x135 mm
Peso
3 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5380
· 1 Borsa
· 1 Unità motore G-SPORT ³
· 2 Gambali taglia "S"
· 2 Cavi collegamento
· 1 Alimentatore
· 1 Power Bank
· 1 Manuale operativo

OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G5381 dotazione con 2 Gambali taglia "M"
· Cod. G5382 dotazione con 2 Gambali taglia "L"

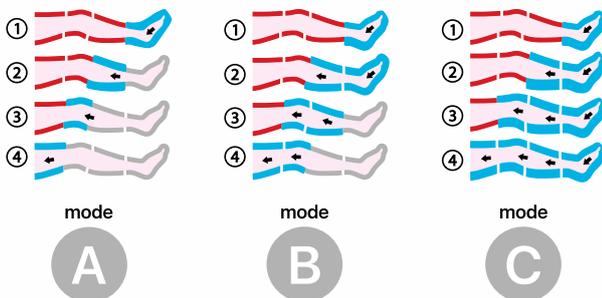


MODE A: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del gambale un settore per volta, per effettuare un massaggio attivante, ideale prima della gara o dell'allenamento.

MODE B: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio e lo sgonfiaggio di due camere per volta, per evitare il reflusso di fluidi verso il basso e rendere il trattamento efficace e molto confortevole.

MODE C: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio sequenziale di tutte le camere e poi sgonfiaggio simultaneo, ideale per un massaggio più profondo.



RELAX

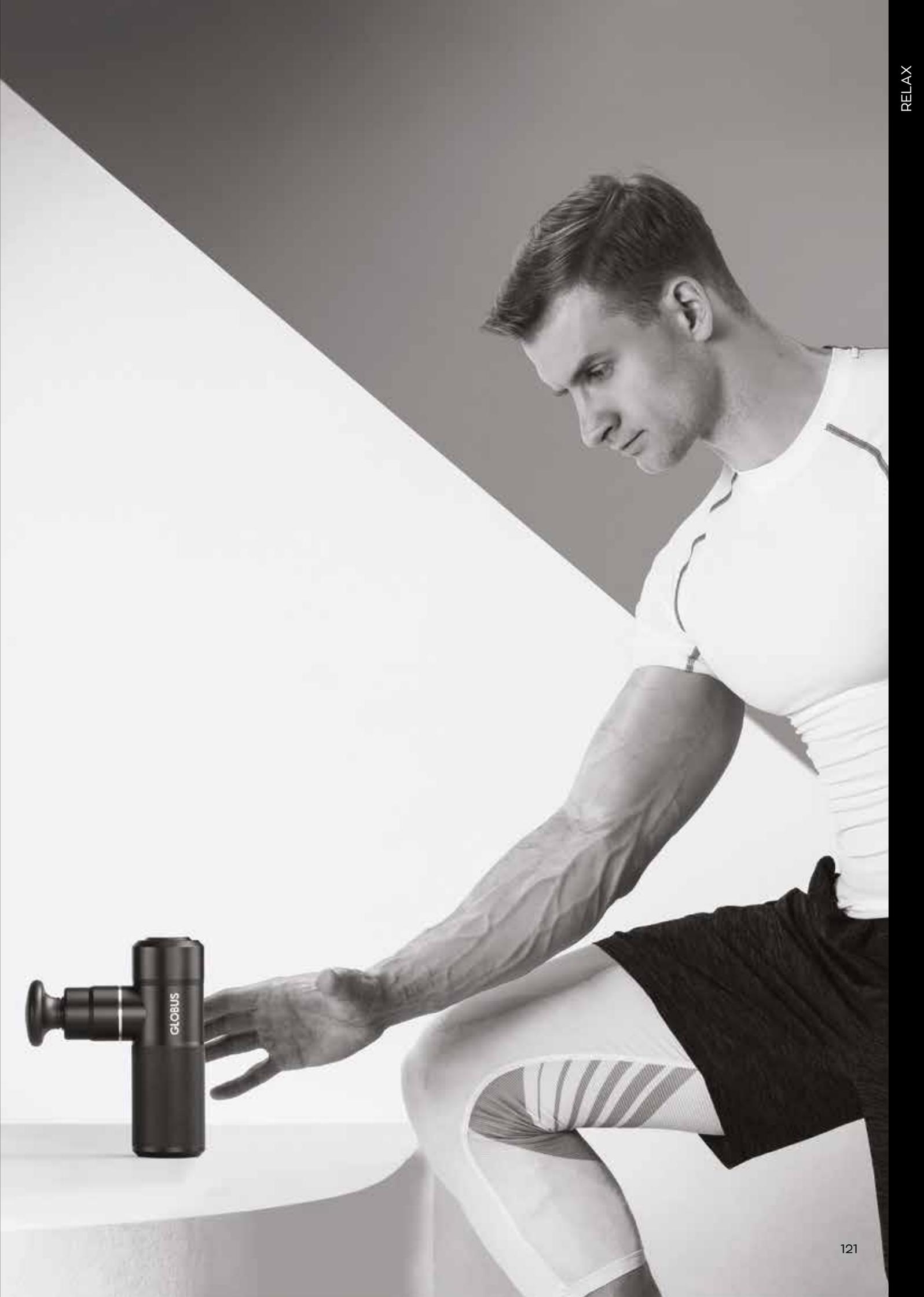

4 VIBE MASSAGE GUN

PISTOLA MASSAGGIANTE | 4 VELOCITÀ

"4 VIBE MASSAGE GUN" È LA MINI PISTOLA PER MASSAGGI COSTRUITA IN ALLUMINIO, CON 4 DIVERSI LIVELLI DI VELOCITÀ E DOTATA VARIE TESTINE PER ASSICURARE LA MASSIMA EFFICACIA SULLE DIVERSE PARTI DEL CORPO CHE SI VANNO A TRATTARE E A SECONDA DELLE ESIGENZE. È IDEALE PER RILASSAMENTO MUSCOLARE, IL MASSAGGIO PROFONDO E PER IL RECUPERO POST ATTIVITÀ FISICA.

SPECIFICHE TECNICHE

RPM

1800 - 2200 - 2600 - 3200

Timer

15 minuti

Ampiezza di movimento

6 mm

Forza di pressione massima

14 Kg

Controllo

1 bottone accensione / cambio velocità

Alimentazione

- Ricarica USB-C
- Batteria a litio
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Tempo di lavoro: 5 ore continue a velocità 1

Dimensione


92x142x47 mm


Peso

500 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. **G6517**
- 1 Borsa
- 1 Unità 4 VIBE MASSAGE GUN
- 1 Testina Tonda
- 1 Testina Piatta
- 1 Testina Trigger Point
- 1 Testina Spine
- 1 Alimentatore USB-C
- 1 Manuale d'uso

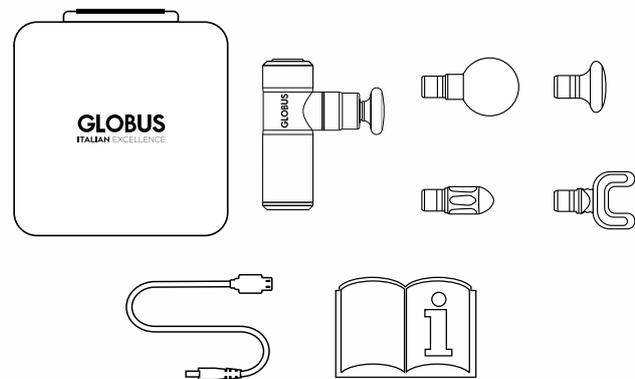

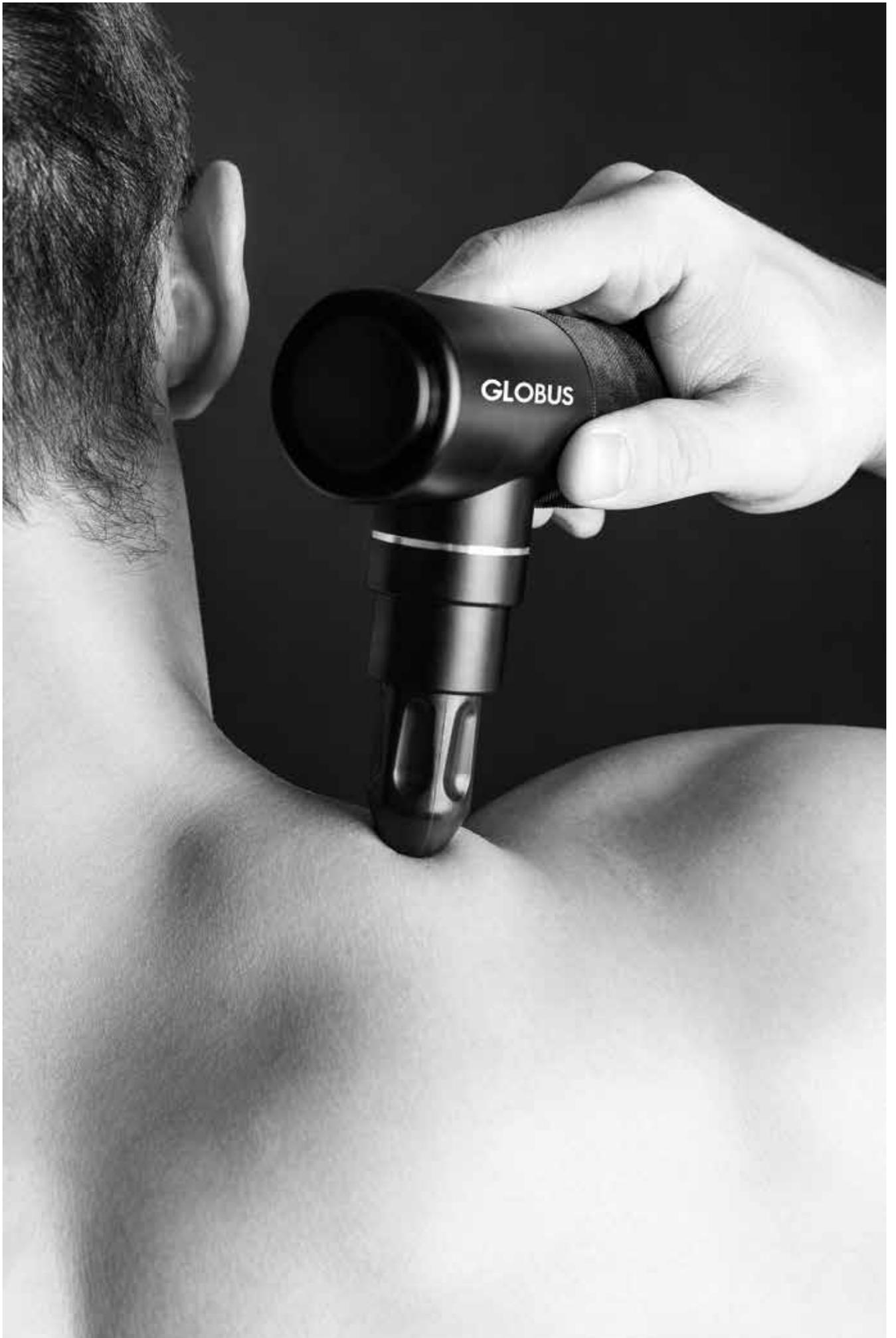

PEDANA VIBRANTE

PHYSIOPLATE MY GOLD

PEDANA VIBRANTE

PHYSIOPLATE MY GOLD È LA PEDANA VIBRANTE IDEALE PER GLI SPORTIVI E GLI AMANTI DEL FITNESS. CONTIENE PIÙ DI 100 PROTOCOLLI DIVISI PER LIVELLI E CON ESERCIZI SPECIFICI PER LE VARIE PARTI DEL CORPO.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

Potenza

18G

Tipo di vibrazione

Verticale

Range Frequenza

15-60Hz, con variazione di 1Hz

Ampiezza di Vibrazione

Low/High

Voltaggio

230V

Alimentazione a rete

200-230V-AC, 50Hz

Ingombro totale

930x1550x760 mm

Dimensioni Piatto

930x600 mm

Max peso sopportabile

120 kg

Peso

170 kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G1061

· 1 Pedana vibrante PHYSIOPLATE MY GOLD

· 1 Tappeto esercizi

· 2 Cinghie esercizi

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



ACCESSORI



G1130

TAPPETO PHYSIOPLATE COLORE ROSSO

G1129

TAPPETO PHYSIOPLATE COLORE BLU




G1090

CINGHIA ESERCIZI



SPARAPALLONI

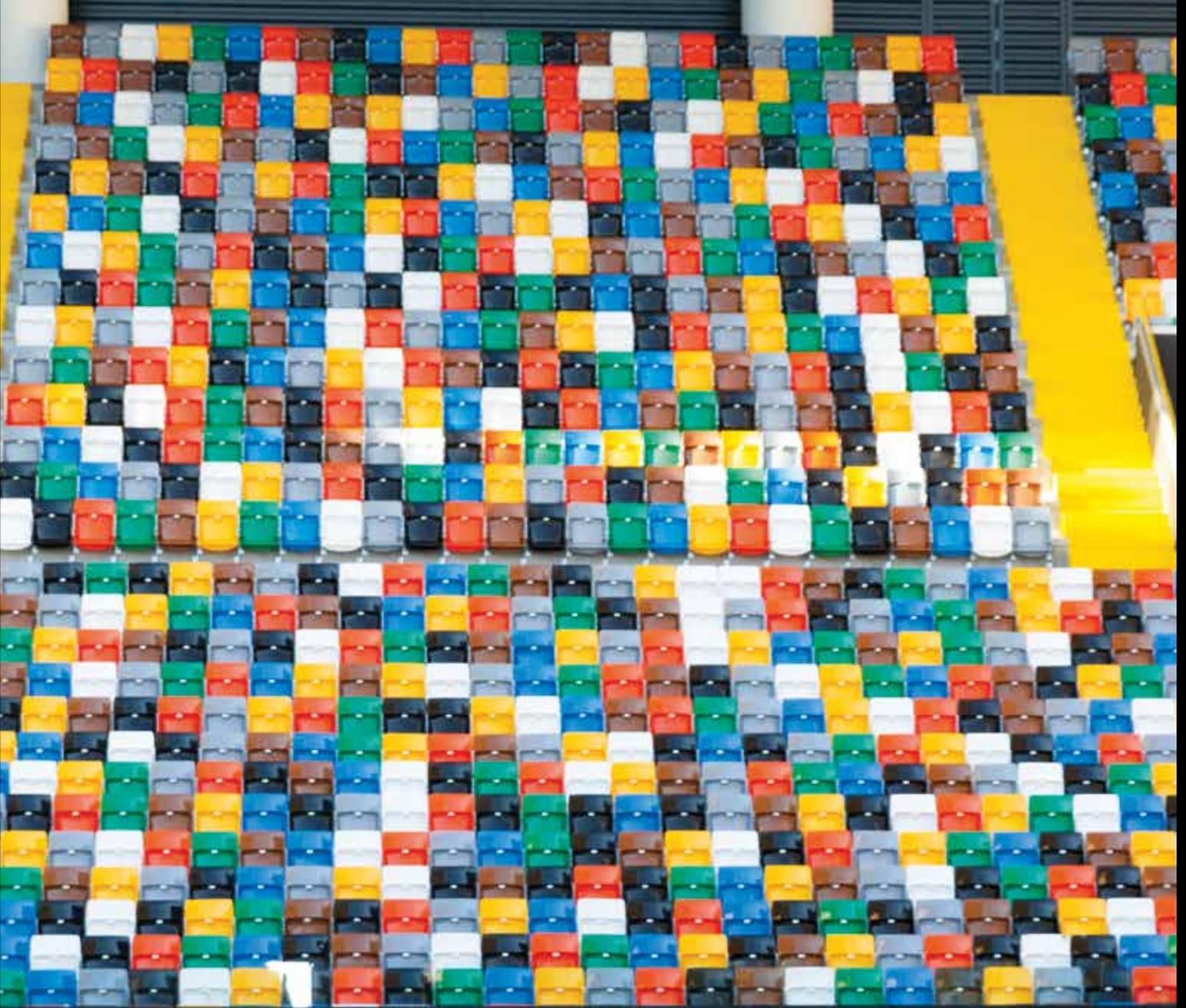

GLOBUS GLOBUS GLOBUS GLOBUS



EUROGOAL 1500

SPARAPALLONI DA CALCIO

GLOBUS EUROGOAL 1500 È UNA MACCHINA SPARAPALLONI PROFESSIONALE PER L'ALLENAMENTO, CHE CONSENTE DI EFFETTUARE CON ESTREMO REALISMO CROSS, TIRI E LANCI TIPICI DEL GIOCO DEL CALCIO. SI CARATTERIZZA PER UNA POTENZA MOLTO ELEVATA CHE PERMETTE DI PROIETTARE LA PALLA FINO A 140 KM/H E, SOPRATTUTTO PER LA POSSIBILITÀ DI CREARE INFINITE TRAIETTORIE CON TUTTI GLI EFFETTI DESIDERATI. GRAZIE INFATTI AL SISTEMA TRIASSIALE BREVETTATO GLOBUS, L'ALLENATORE PUÒ REGOLARE IL LANCIO SUL PIANO VERTICALE (VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO), SUL PIANO ORIZZONTALE (VERSO DESTRA O VERSO SINISTRA) E SOPRATTUTTO, INCLINARE IL DISPOSITIVO SUL PIANO OBLIQUO PER ESALTARE LA CURVATURA DELLE TRAIETTORIE. GLOBUS EUROGOAL 1500 È, SENZA DUBBIO, IL PARTNER IDEALE DELL'ALLENATORE PER REALIZZARE CENTINAIA DI ESERCITAZIONI IN ALLENAMENTO, CON RITMO ELEVATO E MASSIMA PRECISIONE DI TIRO.

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. **G3305**

Dimensioni (LxPxH)

115x70x60 cm

Peso

100 Kg

Ruote di lancio

N° 2 in gomma super grip antiscivolo

Altezza massima di tiro della palla

35 m

Spostamento laterale della testa

+30°/-30°

Inclinazione verticale

+40°/-5°

Distanza di lancio

100 m

Velocità lancio

Da 10 a 140 Km/h

Alimentazione

Doppia batteria ad elevata autonomia (5 ore effettive o 1500 tiri) con caricabatterie in dotazione

Batterie

N° 2 da 12V - 55Ah

Effetti tiro

Flottante - Magnus - Top Spin - Back Spin

Attuatore elettrico per elevazione verticale

Inclinazione obliqua della testa

Blocco range del tiro laterale

Centralina elettronica con 5 memorie di tiro

Regolazione elettronica digitale e simultanea delle due ruote

PUNTI FORZA

· Regolazione triassiale della traiettoria - brevetto GLOBUS

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Tiri di potenza e ad effetto, sia a rientrare che ad uscire, da destra e da sinistra

· Display digitale

· Dotata di 5 pulsanti per memorizzare 5 diverse tipologie di tiro, relativamente alla velocità della palla e agli effetti (spin)

· Sistema di controllo della velocità della palla che indica quando entrambe le ruote hanno raggiunto la velocità impostata (Led verde)

· TOP SPIN: super curvatura della traiettoria grazie alla movimentazione obliqua del sistema triassiale

· Possibilità di utilizzo di palloni di varie misure

· Spostamento agevole su ruote

· Guida di inserimento dei palloni per garantire la massima ripetibilità del lancio

· Consigliata per squadre professionistiche e semiprofessionistiche



EUROGOAL 600

SPARAPALLONI DA CALCIO

GLOBUS EUROGOAL 600 È UNA MACCHINA SPARAPALLONI PROFESSIONALE PER L'ALLENAMENTO, CHE CONSENTE DI EFFETTUARE CON ESTREMA PRECISIONE E REALISMO, LANCI E TIRI TIPICI DEL GIOCO DEL CALCIO, CON UNA POTENZA CHE PUÒ RAGGIUNGERE I 110 KM/H. GRAZIE AD UNO SPECIALE DISPOSITIVO, L'ALLENATORE PUÒ REGOLARE IL LANCIO SUL PIANO VERTICALE (VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO), PER EFFETTUARE TIRI RASOTERRA, A MEZZA ALTEZZA O ALL'INCROCIO DEI PALI.

GLOBUS EUROGOAL 600 È UNO STRUMENTO TECNICO DI ALLENAMENTO CHE PERMETTE DI REALIZZARE TANTI ESERCIZI SIA PER I PORTIERI CHE PER GLI ALTRI GIOCATORI. SI PRESTA INFATTI AD ESSERE UTILIZZATA NELLE SITUAZIONI DI GIOCO GLOBALE, COME LE COSTRUZIONI SU CROSS E CALCIO D'ANGOLO.

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G1503

Dimensioni (LxPxH)

95x70x60 cm

Peso

90 Kg

Ruote di lancio

N° 2 in gomma super grip antiusura

Altezza massima di tiro della palla

25 m

Spostamento laterale della testa

+30°/-30°

Inclinazione verticale

+40°/-5°

Distanza di lancio

60 m

Velocità lancio

Da 10 a 120 Km/h

Alimentazione

Doppia batteria ad elevata autonomia (5 ore effettive o 1500 tiri) con caricabatterie in dotazione

Batterie

N° 2 da 12V - 55Ah

Effetti tiro

Flottante - Magnus

Attuatore elettrico per elevazione verticale

Centralina elettronica

Regolazione manuale tramite due potenziometri indipendenti

PUNTI FORZA

- Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS
- Tiri di potenza e ad effetto, sia a rientrare che ad uscire, da destra e da sinistra
- Regolazione indipendente e micrometrica della velocità delle ruote (999 livelli)
- Possibilità di utilizzo di palloni di varie misure
- Spostamento agevole su ruote
- Guida di inserimento dei palloni per garantire la massima ripetibilità del lancio
- Consigliata anche per settori giovanili e scuole di calcio



WINSHOT 1500

SPARAPALLONI DA PALLAVOLO

WINSHOT 1500 È IL TOP DI GAMMA DELLA LINEA SPARAPALLONI GLOBUS. È PARTICOLARMENTE INDICATA PER LE SQUADRE PROFESSIONISTICHE SIA MASCHILI CHE FEMMINILI IN QUANTO PERMETTE DI EFFETTUARE CENTINAIA DI BATTUTE, SCHIACCIATE E ALZATE CON LA MASSIMA PRECISIONE E CON UNA PAUSA, TRA UN TIRO E L'ALTRO, DI SOLI 1,5 SECONDI. QUESTO MODELLO PUÒ MEMORIZZARE 5 TIPI DI TIRI DIVERSI, SIA PER POTENZA CHE PER EFFETTO, GRAZIE AD UNA SCHEDA ELETTRONICA DEDICATA. WINSHOT 1500 POSSIEDE INOLTRE LO "SPEED CONTROL SYSTEM" CHE, ATTRAVERSO DUE LED LUMINOSI ROSSO E VERDE, POSIZIONATI AL CENTRO DELLA CONSOLE, PERMETTE DI CONTROLLARE L'EFFETTIVA VELOCITÀ ALLA QUALE LA PALLA VIENE TIRATA.

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G3504

Dimensioni

Altezza minima con testa disinserita 190 cm

Altezza minima con testa inserita 260 cm

Altezza massima totale 370 cm

Altezza piattaforma operatore 150 cm

Larghezza massima senza cesti 80 cm

Larghezza massima con un cesto 120 cm

Larghezza massima con due cesti 160 cm

Profondità macchina

150 cm

Peso

220 Kg

Altezza di tiro

Da 230 cm a 340 cm

Velocità lancio

Da 10 a 140 Km/h

Alimentazione

N° 2 batterie ricaricabili da 12V - 55Ah con caricabatterie in dotazione

PUNTI FORZA

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Display digitale con regolazione simultanea delle due ruote di tiro

· Speed Control System che indica con led verde quando la velocità della palla è quella impostata

· Possibilità di memorizzare cinque tipi diversi di tiri per potenza ed effetto

· Testa di tiro snodata, leggera e regolabile per proporre traiettorie variabili

· Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali

· Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro



WINSHOT 800

SPARAPALLONI DA PALLAVOLO

WINSHOT 800 È LA MACCHINA SPARAPALLONI GLOBUS PARTICOLARMENTE INDICATA PER SQUADRE PROFESSIONISTICHE FEMMINILI E PER SQUADRE MASCHILI DI MEDIO LIVELLO, IN QUANTO PERMETTE DI EFFETTUARE CENTINAIA DI BATTUTE, SCHIACCIATE E ALZATE CON LA MASSIMA PRECISIONE. QUESTA MACCHINA PUÒ TIRARE PALLONI, IN BATTUTA E IN ATTACCO, ALLA VELOCITÀ IMPRESSIONANTE DI 130 KM ALL'ORA AD UNA ALTEZZA DI 305 CM. QUESTA CAPACITÀ RENDE WINSHOT 800 MOLTO UTILE ED EFFICACE DURANTE L'ALLENAMENTO IN QUANTO LE BATTUTE E LE SCHIACCIATE DURANTE LA GARA RAGGIUNGONO UNA VELOCITÀ DELLA PALLA TALE DA DOVER ALLENARE LA RICEZIONE E LA DIFESA CON GRANDE FREQUENZA E PRECISIONE E CON BATTUTE DIFFICILMENTE PROPONIBILI DAL BRACCIO UMANO, SALVAGUARDANDO, CONTEMPORANEAMENTE, LA SPALLA DI ATLETI E ALLENATORI.

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. **G1334**

Dimensioni

Altezza minima con testa disinserita 175 cm

Altezza minima con testa inserita 255 cm

Altezza massima totale 350 cm

Altezza piattaforma operatore 110 cm

Larghezza massima senza cesti 80 cm

Larghezza massima con un cesto 120 cm

Larghezza massima con due cesti 160 cm

Profondità macchina

130 cm

Peso

- Senza Kit batteria 150 Kg

- Con Kit batteria 190 Kg

Lunghezza di tiro

Da 200 cm a 800 cm

Velocità lancio

Da 10 a 130 Km/h

Alimentazione

- A rete con alimentatore di serie

- N° 2 batterie ricaricabili 12V - 55Ah con caricabatterie in dotazione (non incluse)

PUNTI FORZA

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Ruote di sparo regolate separatamente con 999 livelli di velocità

· Testa di tiro snodata, leggera e regolabile per proporre traiettorie variabili

· Alimentatore a rete di serie, o a batterie ricaricabili con 10 ore di autonomia (optional)

· Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali

· Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro



WINSHOT 500

SPARAPALLONI DA PALLAVOLO

WINSHOT 500 È LA MACCHINA SPARAPALLONI GLOBUS PARTICOLARMENTE INDICATA PER SQUADRE GIOVANILI MASCHILI E FEMMINILI E PER SQUADRE MASCHILI DI MEDIO LIVELLO, IN QUANTO PERMETTE DI EFFETTUARE CENTINAIA DI BATTUTE, SCHIACCIATE E ALZATE CON LA MASSIMA PRECISIONE. QUESTA MACCHINA PUÒ TIRARE PALLONI, IN BATTUTA E IN ATTACCO, ALLA VELOCITÀ IMPRESSIONANTE DI 120 KM. ALL'ORA AD UNA ALTEZZA MASSIMA DI 270 CM. WINSHOT 500 È FACILE DA SMONTARE E DA SPOSTARE IN VARIE LUOGHI ED È MOLTO DUTTILE E LEGGERA IN PALESTRA PER EFFETTUARE SEDUTE TECNICHE SPECIFICHE PER RICEZIONE E DIFESA, SIA INDIVIDUALI CHE DI SQUADRA. QUESTE CARATTERISTICHE RENDONO WINSHOT 500 MOLTO UTILE ED EFFICACE DURANTE L'ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA TECNICA DEI GIOVANI PALLAVOLISTI, ATTRAVERSO UN NOTEVOLE NUMERO DI RIPETIZIONI DI ELEVATA QUALITÀ.

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G1333

Dimensioni

Altezza minima con testa disinserita 175 cm

Altezza minima con testa inserita 240 cm

Altezza massima totale 300 cm

Larghezza massima 80 cm

Profondità macchina

100 cm

Peso

- Senza Kit batteria 70 Kg

- Con Kit batteria 110 Kg

Altezza di tiro

Da 210 cm a 270 cm

Velocità lancio

Da 10 a 120 Km/h

Alimentazione

- A rete con alimentatore di serie

- N° 2 batterie ricaricabili 12V - 55Ah con caricabatterie in dotazione (non incluse)

PUNTI FORZA

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Ruote di sparo regolate separatamente con 999 livelli di velocità

· Testa di tiro snodata, leggera e regolabile per proporre traiettorie variabili

· Alimentatore a rete di serie, o a batterie ricaricabili con 10 ore di autonomia (optional)

· Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali

· Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro

· Facile e veloce da smontare per trasporto in auto nei vari luoghi di allenamento



RUGBYKICK

SPARAPALLONI DA RUGBY

RUGBYKICK È IL TOP DI GAMMA DELLE MACCHINE PER L'ALLENAMENTO GLOBUS. È PARTICOLARMENTE ADATTO PER TEAM DI PROFESSIONISTI, IN QUANTO È IN GRADO DI RIPRODURRE CENTINAIA DI SERVIZI, ATTACCANDO E IMPOSTANDO AZIONI CON LA MASSIMA PRECISIONE, CON INTERVALLI DI SOLI 1,5 SECONDI. QUESTO MODELLO PUÒ MEMORIZZARE 5 DIVERSI TIPI DI COLPI, CON I LORO PARAMETRI DI POTENZA ED EFFETTO, GRAZIE A UNA SCHEDA ELETTRONICA DEDICATA. IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI RUGBYKICK CONSENTE DI CONTROLLARE LA VELOCITÀ DELLA PALLA GRAZIE A DUE LUCI A LED (ROSSO E VERDE) POSTE AL CENTRO DELLA CONSOLE.

SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G5371

Dimensioni

Altezza massima 145 cm

Altezza minima 130 cm

Larghezza 70 cm

Lunghezza 100 cm

Peso

95 Kg

Altezza di tiro

Da 230 cm a 80 cm

Velocità lancio

Da 10 a 120 Km/h

Alimentazione

N° 2 batterie ricaricabili 12V - 55Ah

PUNTI FORZA

- Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS
- Display digitale con regolazione simultanea delle due ruote di tiro
- Speed Control System che indica con led verde quando la velocità della palla è quella impostata
- Possibilità di memorizzare cinque tipi diversi di tiri per potenza ed effetto
- Testa di tiro snodata, leggera e regolabile per proporre traiettorie variabili
- Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali
- Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro



ACCESSORI

CONTENUTI

- TECARTERAPIA E TECAR BEAUTY	136
- MAGNETOTERAPIA	144
- ELETTROTHERAPIA	147
- ELETTROSTIMOLAZIONE	147
- ULTRASUONOTERAPIA	151
- LASERTERAPIA	152
- RADIOFREQUENZA	153
- PRESSOTERAPIA	154
- SPARAPALLONI	156

ACCESSORI PER DIACARE 7000 - TECAR BEAUTY 7000 MED TECAR BEAUTY 7000 - TECAR BEAUTY ELITE



F 01

F 01. MANIPOLO BIPOLARE PER TRATTAMENTI RESISTIVI

G6650	MANIPOLO BIPOLARE Ø 50 mm
G6651	MANIPOLO BIPOLARE Ø 30 mm



F 02

F 02. MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO ED ELETTRODI

G6652	MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO
G6667	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 70 mm
G6668	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 50 mm
G6669	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 30 mm



F 03

F 03. MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO ED ELETTRODI


G6653	MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO
G6670	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 70 mm
G6671	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 50 mm
G6672	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 30 mm



F 04

F 04. MANIPOLO NEUTRO ATTIVO

G5133	MANIPOLO RESISTIVO DA USARE AL POSTO DELLA PIASTRA NEUTRA
-------	---

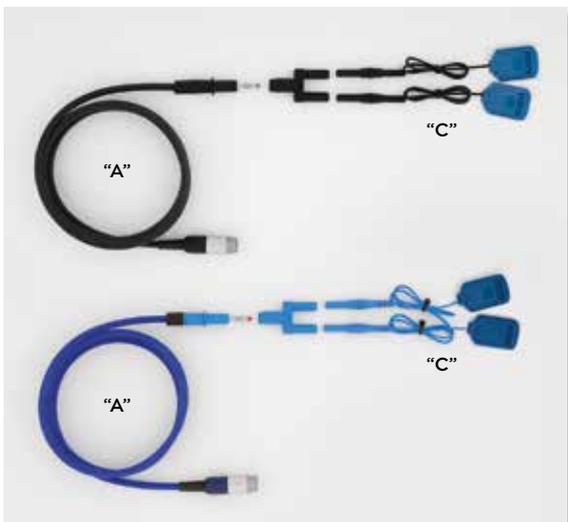

F 05 (in alto) / F 06 (in basso)

F 05. SERIE DI CAVI NEUTRI

G6656	CAVO "A" NEUTRO, 4 mm, COLORE NERO
G6697	ADATTATORE PER CAVI NEUTRI, COLORE NERO
G6692	CAVO "C" NEUTRO COLORE NERO CON PINZA

F 06. SERIE DI CAVI RESISTIVI

G6655	"A" - CAVO RESISTIVO, 4 mm, COLORE AZZURRO
G6698	ADATTATORE PER CAVI RESISTIVI, COLORE AZZURRO
G6693	"C" - CAVO RESISTIVO COLORE AZZURRO CON PINZA

ACCESSORI PER DIACARE 5000 E 5000 RE TECAR BEAUTY 6000 MED E 6000 MED RE



F 01

F 01. MANIPOLO BIPOLARE PER TRATTAMENTI RESISTIVI


G6658	MANIPOLO BIPOLARE Ø 50 mm
G6659	MANIPOLO BIPOLARE Ø 30 mm



F 02

F 02. MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO ED ELETTRODI

G6660	MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO
G6667	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 70 mm
G6668	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 50 mm
G6669	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 30 mm

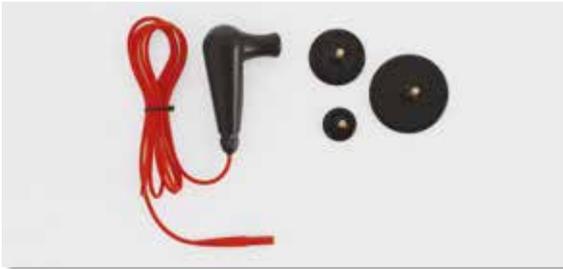

F 03

F 03. MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO ED ELETTRODI


G6661	MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO
G6670	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 70 mm
G6671	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 50 mm
G6672	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 30 mm



F 04

F 04. MANIPOLO NEUTRO ATTIVO


G5035	MANIPOLO RESISTIVO DA USARE AL POSTO DELLA PIASTRA NEUTRA
-------	---

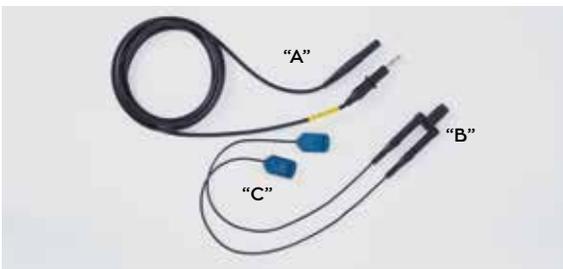

F 05

F 05. SERIE DI CAVI NEUTRI

G6664	"A" - CAVO NEUTRO, 4 mm, COLORE NERO
G6697	ADATTATORE PER CAVI NEUTRI, COLORE NERO
G6692	"C" - CAVO NEUTRO COLORE NERO CON PINZA

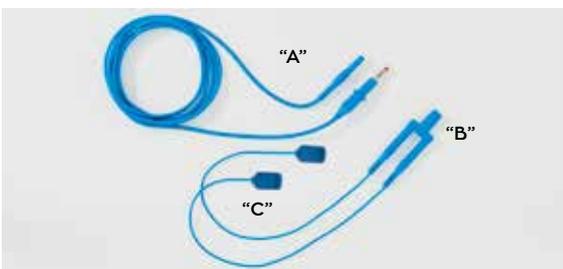

F 06

F 05. SERIE DI CAVI RESISTIVI

G6666	"A" - CAVO RESISTIVO, 4 mm, COLORE AZZURRO
G6698	ADATTATORE PER CAVI RESISTIVI, COLORE AZZURRO
G6693	"C" - CAVO RESISTIVO COLORE AZZURRO CON PINZA

ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



F 01

F 02



F 03



F 04



F 05

F 01. ELETTRODI RESISTIVI CONVESSI

G6366	KIT 3 ELETTRODI RESISTIVI CONVESSI
G6675	ELETTRODO RESISTIVO CONVESSO, Ø 70 mm
G6674	ELETTRODO RESISTIVO CONVESSO, Ø 50 mm
G6673	ELETTRODO RESISTIVO CONVESSO, Ø 30 mm

F 02. ELETTRODI CAPACITIVI CONVESSI

G6365	KIT 3 ELETTRODI CAPACITIVI CONVESSI
G6678	ELETTRODO CAPACITIVO CONVESSO, Ø 70 mm
G6677	ELETTRODO CAPACITIVO CONVESSO, Ø 50 mm
G6676	ELETTRODO CAPACITIVO CONVESSO, Ø 30 mm

F 03. ELETTRODI CAPACITIVI CONCAVI

G6540	KIT 5 ELETTRODI CAPACITIVI CONCAVI
G6686	ELETTRODO CAPACITIVO CONCAVO, 30x100 mm
G6685	ELETTRODO CAPACITIVO CONCAVO, 30x80 mm
G6684	ELETTRODO CAPACITIVO CONCAVO, 30x60 mm
G6683	ELETTRODO CAPACITIVO CONCAVO, 30x40 mm
G6687	ELETTRODO CAPACITIVO CONCAVO, Ø 45 mm

F 04. KIT MANI LIBERE PLUS PER "DIACARE 7000" - "TECAR BEAUTY 7000" - "TECAR BEAUTY 7000 MED" - "TECAR BEAUTY ELITE"

G5976	1 BORSA 1 CAVO RESISTIVO 2 SDOPPIATORI (1 BLU, 1 NERO) 4 CAVETTI CON COCCODRILLI (2 BLU, 2 NERI) 4 ELETTRODI ADESIVI MEDIUM 2 FASCE ELASTICHE
-------	--

F 05. KIT MANI LIBERE PLUS PER "DIACARE 5000" E "TECAR BEAUTY 6000 MED"

G5981	1 BORSA 1 CAVO RESISTIVO 2 SDOPPIATORI (1 BLU, 1 NERO) 4 CAVETTI CON COCCODRILLI (2 BLU, 2 NERI) 4 ELETTRODI ADESIVI MEDIUM 2 FASCE ELASTICHE
-------	--

ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



F 06



F 07



F 08



F 09



F 10



F 11



F 12



F 13



F 14

F 06. PIASTRE NEUTRE FLESSIBILI PER TUTTI I DISPOSITIVI LINEA "DIACARE" E "TECAR BEAUTY"

G6689	PIASTRA GRANDE IN ACCIAIO FLESSIBILE, 200X250 mm
-------	--

G6690	PIASTRA MEDIA IN ACCIAIO FLESSIBILE, 150X210 mm
-------	---

F 07. PIASTRE NEUTRE FLESSIBILI PER TRATTAMENTO "MANI LIBERE" PER TUTTI I DISPOSITIVI LINEA "DIACARE" E "TECAR BEAUTY"

G6691	PIASTRA PICCOLA IN ACCIAIO FLESSIBILE, 75X130 mm, 1 PZ
-------	--

G5983	KIT PIASTRE PICCOLE IN ACCIAIO FLESSIBILE, 75X130 mm, 2 PZ
-------	--

F 08. ELETTRODI ADESIVI PER TRATTAMENTO "MANI LIBERE" PER TUTTI I DISPOSITIVI LINEA "DIACARE" E "TECAR BEAUTY"

G6694	ELETTRODO ADESIVO TECAR, LARGE, 101X202 mm, 1 PZ
-------	--

G6695	ELETTRODO ADESIVO TECAR, MEDIUM, 90X148 mm, 1 PZ
-------	--

G6696	ELETTRODO ADESIVO TECAR, SMALL, 74X88 mm, 1 PZ
-------	--

F 09. KIT PER COPRI PIATTELLI RESISTIVI

G6607	KIT COPRI PIATTELLI RESISTIVI
-------	-------------------------------

G6681	COPRI PIATTELLINO RESISTIVO, Ø 70 mm
-------	--------------------------------------

G6680	COPRI PIATTELLINO RESISTIVO, Ø 50 mm
-------	--------------------------------------

G6679	COPRI PIATTELLINO RESISTIVO, Ø 30 mm
-------	--------------------------------------

F 10. "DYNAMIC HANDLE", MANIGLIA NEUTRA ATTIVA

G6588	DYNAMIC HANDLE
-------	----------------

F 11. CAVO PIASTRA NEUTRO PER "DIACARE 7000" - "TECAR BEAUTY 7000" "TECAR BEAUTY 7000 MED" E "TECAR BEAUTY ELITE"

G6656	CAVO PIASTRA NEUTRO, COLORE NERO
-------	----------------------------------

F 12. CAVO PIASTRA PER "DIACARE 5000" E "TECAR BEAUTY 6000 MED"

G6664	CAVO PIASTRA, COLORE NERO
-------	---------------------------

F 13. CAVO DI ALIMENTAZIONE PER "DIACARE 7000" - "TECAR BEAUTY 7000" "TECAR BEAUTY 7000 MED" E "TECAR BEAUTY ELITE"

G4349	CAVO DI ALIMENTAZIONE, 230V~ 50/60Hz, SHUKO
-------	---

F 14. ALIMENTATORE PER I SEGUENTI DISPOSITIVI: "DIACARE 5000" E "TECAR BEAUTY 6000 MED"

G6663	ALIMENTATORE 48V
-------	------------------

ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



F 15

F 15. KIT "INTIMA"

G6421	KIT "INTIMA" PER "DIACARE 7000" - "TECARBEAUTY 7000" "TECARBEAUTY 7000 MED" - "TECARBEAUTY ELITE"
G6420	KIT "INTIMA" PER "DIACARE 5000" - "TECARBEAUTY 6000 MED"
G6657	MANIPOLO KIT "INTIMA", LINEA 7000
G6407	MANIPOLO KIT "INTIMA", LINEA 5000 E 6000
G6699	SONDA KIT "INTIMA", Ø 20 mm
G6700	SONDA KIT "INTIMA", Ø 9,5 mm
G6418	GEL CONDUTTIVO PER KIT "INTIMA"
G6701	COPRISONDA PER KIT "INTIMA" (144 PEZZI)



F 16

F 16. KIT "FASCIA TOOLS", 4 PZ, PER "DIACARE 7000" E "DIACARE 5000"

G5651	1 ELETTRODO DIABLADE LARGE 1 ELETTRODO DIABLADE SMALL 1 ELETTRODO DIA TRIGGER 1 ELETTRODO DIA SPINE
G6703	ELETTRODO DIABLADE LARGE
G6702	ELETTRODO DIABLADE SMALL
G5655	ELETTRODO DIA TRIGGER
G5656	ELETTRODO DIA SPINE



F 17

F 17. KIT "FASCIA TOOLS" BEAUTY, 2 PZ, PER "TECARBEAUTY 7000 MED" "TECARBEAUTY 7000", "TECARBEAUTY ELITE", "TECARBEAUTY 6000 MED"

G6041	1 ELETTRODO DIABLADE LARGE 1 ELETTRODO DIABLADE SMALL
G6703	ELETTRODO DIABLADE LARGE
G6702	ELETTRODO DIABLADE SMALL

ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



G6488 | SUPPORTO PER DISPOSITIVI E ACCESSORI SOLO PER "DIACARE 5000" E "TECAR BEAUTY 6000 MED" IN PLEXIGLASS

G6489 | SUPPORTO ACCESSORI PER DISPOSITIVI "DIACARE 5000" E "TECAR BEAUTY 6000 MED" IN PLEXIGLASS



G6706 | SUPPORTO SINGOLO PER CCESSORI LINEA TECAR IN PLEXIGLASS

ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



G3371 | VALIGIA IN ALLUMINIO GRIGIA PER DISPOSITIVI "DIACARE 5000" E "TECAR BEAUTY 6000 MED"

G5591 | CARRELLO CON ROTELLE



G6510 | CARRELLO CON ROTELLE "EASY GO"

ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



G5521 | TROLLEY CON SCOMPARTI MULTIPLI PER TRASPORTO DISPOSITIVI

G5520 | TROLLEY PER DISPOSITIVI DIACARE "7000" - "TECAR BEAUTY 7000" - "TECAR BEAUTY 7000 MED" E "TECAR BEAUTY ELITE"



CREME TECAR CONDUTTIVE PER "DIACARE 7000" - "DIACARE 5000"

G3368 | CREMA TECAR CONDUTTIVA, 250 ml

G3369 | CREMA TECAR CONDUTTIVA, 1000 ml

G5396 | CREMA TECAR CONDUTTIVA ALL'ARNICA, 1000 ml



CREME TECAR BEAUTY CONDUTTIVE PER "TECAR BEAUTY 7000" "TECAR BEAUTY 7000 MED" - "TECAR BEAUTY ELITE" "TECAR BEAUTY 6000 MED"

G6333 | CREMA TECAR BEAUTY CONDUTTIVA, 250 ml

G6332 | CREMA TECAR BEAUTY CONDUTTIVA, 1000 ml

G6226 | CREMA TECAR BEAUTY ACIDO IALURONICO, 500 ml

G6227 | CREMA TECAR BEAUTY LINFODRENANTE, 1000 ml

ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA



F 01

F 01. SOLENOIDE "SOFT 4"

G6631 | TAPPETINO "SOFT 4", 250X250 mm, 4 BOBINE, 2 CANALI TOTALI



F 02

F 02. SOLENOIDE FLESSIBILE

G6629 | SOLENOIDE "FLESSIBILE", 400X150 mm, 4 BOBINE



F 03

F 03. SOLENOIDE FLESSIBILE

G6627 | SOLENOIDE "FLESSIBILE", 300X100 mm, 2 BOBINE



F 04

F 04. SOLENOIDE "POCKET PRO"

G6630 | SOLENOIDE "POCKET PRO", 155x95 mm, 2 BOBINE.
IL CODICE SI RIFERISCE A 1 SOLENOIDE MA L'ACQUISTO SI EFFETTUA IN COPPIA

G6050 | CUSTODIA "POCKET PRO"



F 05

F 06

F 05. MAGNUM TEST

G6713 | SEGNALATORE DI CORRETTA EROGAZIONE
DEL CAMPO MAGNETICO, 85X55 mm

F 06. FASCIA ELASTICA VELCRABILE

G6708 | FASCIA ELASTICA VELCRABILE, 80X800 mm, COLORE NERO



F 07

F 07. COPRI SOLENOIDI

G5878 | KIT COPRI SOLENOIDI FLESSIBILI (10 PEZZI)

ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA



F 08



F 09

F 08. ALIMENTATORE


G6711 | ALIMENTATORE LINEA MAGNETO
PER DISPOSITIVI "MAGNUM XL" E "MAGNUM L"

F 09. ALIMENTATORE

G6712 | ALIMENTATORE PER DISPOSITIVI "MAGNUM 3000 PRO"
"MAGNUM 2 PRO DRIVE" - "MAGNUM XL PRO"
"MAGNUM 2500" - "MAGNETOCEMP ELITE"



F 10

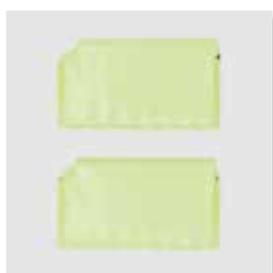

F 11

F 10. ALIMENTATORE

G6710 | ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "MAGNUM 3500 PRO"

F 11. PACCO BATTERIA

G6638 | PACCO BATTERIA - 12V AA NI-MH
PER DISPOSITIVO "MAGNUM 3500 PRO"



F 12



F 13

F 12. PACCO BATTERIA

G6637 | PACCO BATTERIA - 7,2V NI-MH PER DISPOSITIVI
"MAGNUM 2 PRO DRIVE" - "MAGNUM XL PRO"
"MAGNUM 2500" - "MAGNETOCEMP ELITE" "MAGNUM XL"
E "MAGNUM L"

F 13. CAVO SDOPPIATORE

G6709 | CAVO SDOPPIATORE



F 14

F 14. PROLUNGA

G6714 | PROLUNGA PER ACCESSORI LUNGHEZZA 140 cm



F 15

F 15. ADATTATORE USB

G6774 | ADATTATORE USB COMPLETO DI CONVERTITORE 5-12V


ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA

TAPPETO SINGOLO IN MEMORY FOAM



DIMENSIONI: LUNGHEZZA 440 mm, LARGHEZZA 700 mm

G5944	TAPPETO "MAT 100 MEMORY FOAM", 4 SOLENOIDI,
G5945	TAPPETO "E-MAT 100", ESTENSIONE ATTIVA, MEMORY FOAM
G5946	TAPPETO "N-MAT 100", ESTENSIONE NEUTRA, MEMORY FOAM
G6048	FODERA ESTERNA PER "MAT 100 MEMORY FOAM"
G6049	FODERA INTERNA PER "MAT 100 MEMORY FOAM"

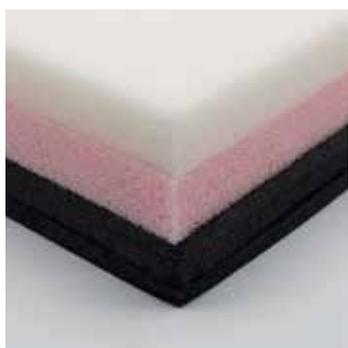

SEZIONE INTERNA CHE EVIDENZIA I DIVERSI STRATI DEL TAPPETO E DEL MATERASSO

MATERASSO "TOTAL BODY" IN MEMORY FOAM



DIMENSIONI: LUNGHEZZA 1760 mm, LARGHEZZA 700 mm, DA COLLEGARE ALLA MAGNETOTERAPIA "GLOBUS"

G5947	MATERASSO "TOTAL BODY 200 MEMORY FOAM", 2 TAPPETI ATTIVI SU 4, 8 SOLENOIDI TOTALI
G5948	MATERASSO "TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM", 4 TAPPETI ATTIVI SU 4, 16 SOLENOIDI TOTALI
G5949	MATERASSO "TOTAL BODY 400 XP MEMORY FOAM", 4 TAPPETI ATTIVI SU 4, 16 SOLENOIDI TOTALI UTILIZZABILE SOLO CON MODELLO "MAGNUM 3500 PRO"

ACCESSORI PER ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE



F 01

F 01. CONFEZIONE ELETTRODI - 4 PZ., 50X50 mm

GO136	MYOTRODE "PLATINUM"
GO464	MYOTRODE "PLUS"
GO466	MYOTRODE "PREMIUM"



F 02

F 02. CONFEZIONE ELETTRODI - 4 PZ., 50X90 mm

GO137	MYOTRODE "PLATINUM"
GO465	MYOTRODE "PLUS"
GO467	MYOTRODE "PREMIUM"



F 03

F 03. CONFEZIONE ELETTRODI DOPPIA ENTRATA - 2 PZ., 50X100 mm

GO458	MYOTRODE "PLATINUM"
-------	---------------------



F 04

F 04. CONFEZIONE 4 ELETTRODI FACCIALI - Ø 32 mm CON CAVETTO

GO451	4 ELETTRODI FACCIALI
-------	----------------------



F 05

F 05. CONFEZIONE 30 ELETTRODI FACCIALI - Ø 26 mm A CLIP

GO871	30 ELETTRODI FACCIALI A CLIP
-------	------------------------------



F 06



F 07

F 06. CONFEZIONE ELETTRODI A CLIP QUADRATI - 4 PZ., 46X47 mm

GO650	4 ELETTRODI CON ATTACCO A CLIP
-------	--------------------------------

F 07. CONFEZIONE ELETTRODI A CLIP RETTANGOLARI - 4 PZ., 45X98 mm

GO651	4 ELETTRODI CON ATTACCO A CLIP
-------	--------------------------------

ACCESSORI PER ELETTROTERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE




F 08

F 08. ELETTRODI IN DAINO

GO452	ELETTRODI IN DAINO MEDI - 4 PZ, 80X60 mm
GO453	ELETTRODI IN DAINO GRANDI - 4 PZ, 80X120 mm



F 09

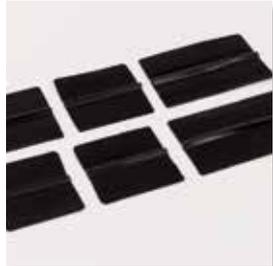

F 10

F 09. ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO

G6715	ELETTRODO A METRO IN SILICONE CONDUTTIVO
-------	--

F 10. ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO

GO463	KIT 6 ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO
-------	--



F 11

F 11. / F 12. FASCE ELASTICHE CONDUTTIVE

GO479	KIT 4 FASCE PER COSCE
GO480	KIT 8 FASCE "FITNESS TOP" PER GAMBE E COSCE



F 12

ALTRE FASCE ELASTICHE

G1225	KIT 2 FASCE ELASTICHE "S", 80X400 mm, COLORE BLU
G1226	KIT 2 FASCE ELASTICHE "M", 80X800 mm, COLORE BLU



F 13



F 14

F 13. FASCIA "EXTENSION BELT"

G6723	FASCIA "EXTENSION BELT", 450 mm (estensione per "WINTEC SMART" e "FAST BAND")
-------	---

F 14. ELETTRODO IONOFRESI

GO890	ELETTRODO MEDIO IN CARBONIO + TASCA, 50x50 mm
GO885	ELETTRODO GRANDE IN CARBONIO + TASCA, 60x85 mm

G6720	TASCA, 50x50 mm	G6719	TASCA, 60x85 mm
-------	-----------------	-------	-----------------



F 15



F 16

F 15. SONDA VAGINALE

G6725	SONDA VAGINALE MONOPAZIENTE
-------	-----------------------------

F 16. SONDA ANALE

G6724	SONDA ANALE MONOPAZIENTE
-------	--------------------------


ACCESSORI PER ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE



F 17

F 17. MANIPOLO G-TRODE

G6726 | MANIPOLO BIPOLARE "G-TRODE" PER DISPOSITIVO "SHAPE & BEAUTY" E "ACTIVA 700"

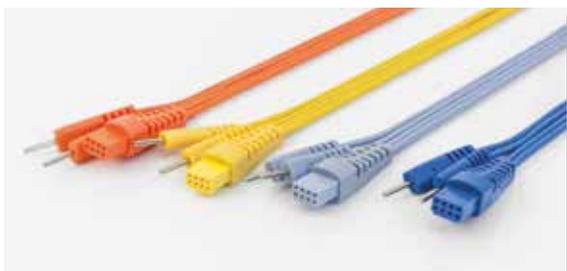

F 18

F 18. CAVI COLORATI PER DISPOSITIVI A 4 CANALI

G1839 | KIT 4 CAVI COLORATI



F 19

F 19. CAVI SDOPPIATI PER DISPOSITIVI A 4 CANALI

GO441 | KIT 2 CAVI SDOPPIATI PER 4 CANALI



F 20

F 20. CAVI PER DISPOSITIVI A 4 CANALI

G6734 | CAVO BIANCO DI RICAMBIO GLOBUS PER 4 CANALI



F 21

F 21. CAVI PER MICROCORRENTI

GO440 | KIT 2 CAVI PER MICROCORRENTI



F 22

F 22. CAVI PER DISPOSITIVI A 2 CANALI, SPINOTTO ROTONDO

G6735 | CAVO DI RICAMBIO "WINTEC" COLORE GRIGIO



F 23

F 23. CAVO PER DISPOSITIVI A 2 CANALI, SPINOTTO RETTANGOLARE

G6736 | CAVO DI RICAMBIO "WINTEC" COLORE BLU



F 24

F 24. ADATTATORI

GO727 | BUSTA DA 4 ADATTATORI PER ELETTRODI A CLIP, Ø 2 mm



F 25

F 25. CAVI PER DISPOSITIVI A 2 CANALI

GO439 | KIT 2 CAVETTI SDOPPIATORI a "Y" (universali)

ACCESSORI PER ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE



F 26



F 27

F 26. PACCO BATTERIE

G6727 | PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVI 2 CANALI

F 27. PACCO BATTERIE

G6640 | PACCO BATTERIE 1600mA PER DISPOSITIVO "ELITE"



F 28



F 29

F 28. PACCO BATTERIE

G6637 | PACCO BATTERIE 1800mA PER DISPOSITIVI 4 CANALI

F 29. PACCO BATTERIE

G6639 | PACCO BATTERIE 2000mA PER DISPOSITIVO "GENESY 3000"



F 30



F 31

F 30. ALIMENTATORE

G6728 | ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "GENESY 1500"

F 31. ALIMENTATORE

G6729 | ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "GENESY 3000"



F 32



F 33

F 32. CARICABATTERIE

G6732 | CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI 2 CANALI

F 33. CARICABATTERIE

G6731 | CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI 4 CANALI



F 34



F 35

F 34. CARICABATTERIE

G6730 | CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI "GENESY 300 PRO" ED "ELITE"

F 35. ALIMENTATORE

G3915 | CARICABATTERIE PER STILO AA/AAA SOLO PER DISPOSITIVO "DUO PRO"



F 36



F 37

F 36. PENNA CERCAPUNTI MOTORI

G6682 | PENNA CERCAPUNTI MOTORI

F 37. GEL

G0484 | BARATTOLO GEL DA 260 ml, CONFEZIONE DA 10 PZ

G0869 | BARATTOLO GEL DA 260 ml, 1 PZ

G4034 | FUSTO GEL DA 1000 ml

G3609 | FUSTO GEL DA 5000 ml

ACCESSORI PER ULTRASUONOTERAPIA



F 01

F 01. MANIPOLI Ø 16 mm

G6741	MANIPOLO TESTA DA Ø 16 mm, PER DISPOSITIVO "MEDISOUND 3000" - SCHEDA SD5
G6742	MANIPOLO TESTA DA Ø 16 mm, PER DISPOSITIVO "MEDISOUND 3000" - SCHEDA SD4



F 02



F 03

F 02. MANIPOLI Ø 42 mm

G6737	MANIPOLO TESTA DA Ø 42 mm, PER DISPOSITIVO "MEDISOUND 3000" E "LIPOZERO G150"
G6738	MANIPOLO Ø 42 mm, TESTA BIANCA, PER DISPOSITIVO "MEDISOUND PRO 2" E "LIPOZERO EXCEL"
G6739	MANIPOLO Ø 42 mm, PER DISPOSITIVO "LIPOZERO G39" - SCHEDA SD4

F 03. MANIPOLO Ø 50 mm

G6740	MANIPOLO TESTA DA Ø 50 mm, 39kHz
-------	----------------------------------



F 04



F 05

F 04. ALIMENTATORE

G6745	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "LIPOZERO G39"
-------	---

F 05. ALIMENTATORE


G6743	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVI "MEDISOUND 3000", "LIPOZERO G800" E "LIPOZERO G150"
-------	---



F 06

F 06. ALIMENTATORE

G6711	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "LIPOZERO EXCEL"
-------	---

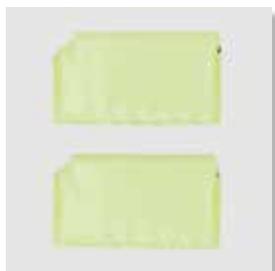

F 07



F 08

F 07. PACCO BATTERIE

G6638	PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVI "MEDISOUND 3000", "LIPOZERO G39" "LIPOZERO G150" E "LIPOZERO G800"
-------	---

F 08. PACCO BATTERIE

G6637	PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVO "LIPOZERO EXCEL"
-------	---



F 09

F 09. GEL

G0484	BARATTOLO GEL DA 260 ml, CONFEZIONE DA 10 PZ
G0869	BARATTOLO GEL DA 260 ml, 1 PZ
G4034	FUSTO GEL DA 1000 ml
G3609	FUSTO GEL DA 5000 ml

ACCESSORI PER LASERTERAPIA



F 02

F 01. MANIPOLI E OTTICHE

G5996	HANDPIECE 1064nm (3W)
G5993	HANDPIECE HP 808nm (12W)
G5995	HANDPIECE HP 980nm (12W)
G5994	MHANDPIECE MP 980nm (6W)
G5992	HANDPIECE MP 808nm (6W)
G5796	HANDPIECE GREEN, 808nm (1W) OTTICA Ø 11 mm INCLUSA
G5748	HANDPIECE BLACK 808nm (2W) OTTICA Ø 11 mm INCLUSA
G5767	HANDPIECE WHITE, 808nm (1W) OTTICA Ø 11 mm INCLUSA
G6090	OTTICA Ø 11 mm
G6092	OTTICA Ø 22 mm



F 03

F 03. OTTICA SMALL

G5547	OTTICA Ø 3 mm "SMALL" SOLO PER PODCARE 2.0
-------	--



F 04



F 05

F 04. OCCHIALI LASER

G6746	OCCHIALI LASER OPERATORE
-------	--------------------------

F 05. OCCHIALI LASER

G6747	OCCHIALI LASER PAZIENTE
-------	-------------------------



F 06



F 07

F 06. ALIMENTATORE

G6729	ALIMENTATORE LASER PER VERSIONE "PRO"
-------	---------------------------------------

F 07. ALIMENTATORE

G6728	ALIMENTATORE LASER
-------	--------------------



F 08



F 09

F 08. PACCO BATTERIA

G6639	PACCO BATTERIA 2000mA PER VERSIONE "PRO"
-------	--

F 09. PACCO BATTERIA

G6637	PACCO BATTERIA 1800mA
-------	-----------------------

ACCESSORI PER RADIOFREQUENZA



F 01

F 01. MANIPOLO "RF CLINIC 100"

G6765

MANIPOLO A DOPPIA SFERA
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"



F 02

F 02. MANIPOLO "RF CLINIC 300"

G6764

MANIPOLO TESTA DA Ø 30 mm
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"



F 03

F 03. MANIPOLO "RF CLINIC 500"

G6763

MANIPOLO TESTA DA Ø 50 mm
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"



F 04

F 04. VALIGETTA

G1364

VALIGETTA IN ALLUMINIO, COLORE NERO
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"




F 05

F 05. ALIMENTATORE

G6710

ALIMENTATORE
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"

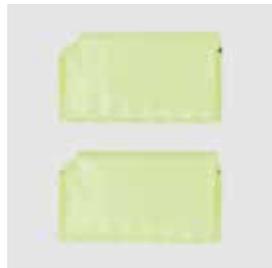

F 06

F 06. PACCO BATTERIA

G6638

PACCO BATTERIA
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"

ACCESSORI PER PRESSOTERAPIA



F 01

F 01. BRACCIALE PRESSCARE

G6752 | BRACCIALE PRESSCARE, 4 SEZIONI



F 02

F 02. GAMBALI PRESSCARE

G6750 | GAMBALE PER "PRESSCARE", 4 SEZIONI, TAGLIA SMALL

G6753 | ESTENSIONE GAMBALE "PRESSCARE", TAGLIA SMALL

G6749 | GAMBALE PER "PRESSCARE", 4 SEZIONI, TAGLIA MEDIUM

G6754 | ESTENSIONE GAMBALE "PRESSCARE", TAGLIA MEDIUM

G6748 | GAMBALE PER "PRESSCARE", 4 SEZIONI, TAGLIA LARGE

G6755 | ESTENSIONE GAMBALE "PRESSCARE", TAGLIA LARGE



F 03

F 03. FASCIA ADDOMINALE/GLUTEI PRESSCARE

G6751 | FASCIA ADDOMINALE/GLUTEI PER "PRESSCARE", 4 SEZIONI



F 04



F 05

F 04. CAVO SDOPPIATORE

G6757 | CAVO SDOPPIATORE
PER L'UTILIZZO DI 3 ACCESSORI CONTEMPORANEAMENTE

F 05. CONNETTORI

G6758 | CONNETTORE SINGOLO
PER "PRESSCARE G300M" E "PRESSCARE G200M"

G6759 | CONNETTORE SINGOLO PER "PRESSCARE G-SPORT 3"



F 06




F 06. BORSA

G6762 | BORSA PER "PRESSCARE G-SPORT 3"

ACCESSORI PER PRESSOTERAPIA

DIMENSIONE ACCESSORI (4 SEZIONI)

GAMBALI TAGLIA "S"	(A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 72 (B) CIRCONFERENZA COSCIA 60 cm con ESTENSIONE 70 cm (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA 37 cm con ESTENSIONE 42 cm
GAMBALI TAGLIA "M"	(A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 82 (B) CIRCONFERENZA COSCIA 67 cm con ESTENSIONE 77 cm (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA 37 cm con ESTENSIONE 42 cm
GAMBALI TAGLIA "L"	(A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 92 (B) CIRCONFERENZA COSCIA 74 cm con ESTENSIONE 84 cm (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA 40 cm con ESTENSIONE 45 cm
BRACCIALE	(A) 84 cm - (B) 63 cm (C) CIRCONFERENZA SPALLA 43 cm con ESTENSIONE 53 cm (D) CIRCONFERENZA POLSO 31 cm con ESTENSIONE 36 cm

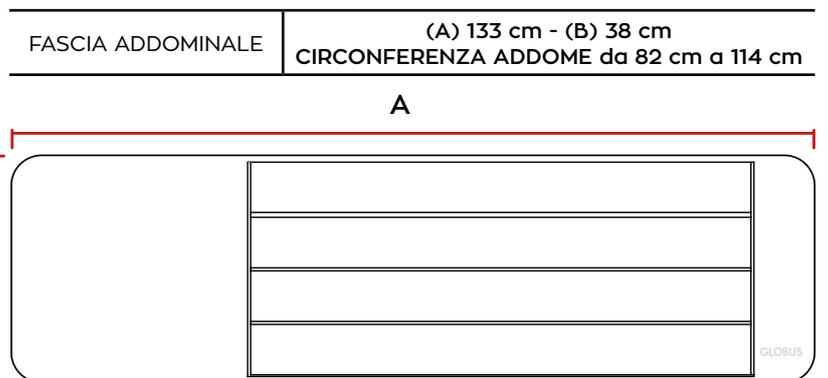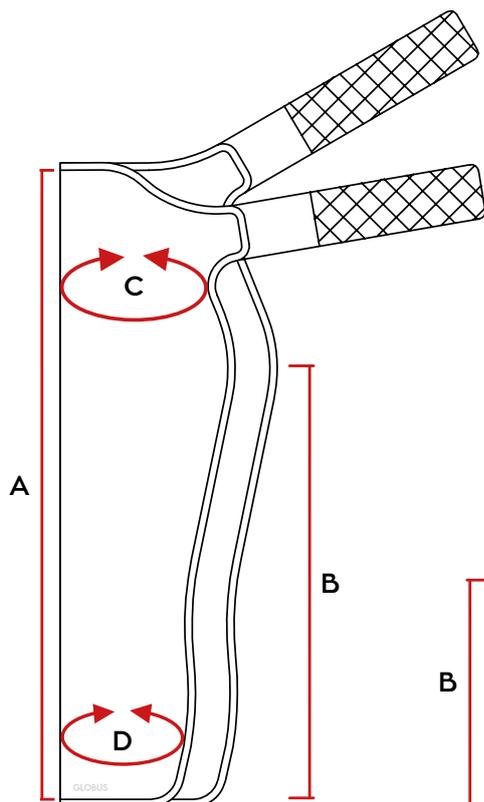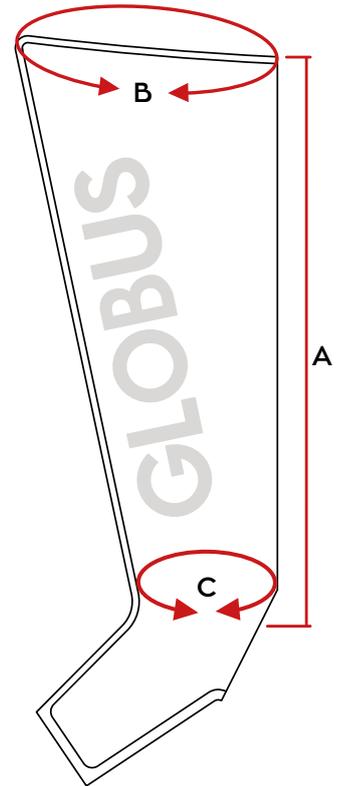

CAVO SDOPPIATORE per utilizzare tre accessori contemporaneamente

CAVO SINGOLO

N.B. Tutte le **ESTENSIONI** sono da considerarsi un accessorio opzionale disponibile su richiesta.

Gli **ACCESSORI**, a seconda del tipo di configurazione, possono essere opzionali o in dotazione.

ACCESSORI PER SPARAPALLONI



F 01

F 01. PISTOLA MISURA VELOCITÀ

G3048 | PISTOLA MISURA VELOCITÀ



F 02

F 02. ALIMENTATORE LINEA "EUROGOAL"

G1488 | ALIMENTATORE PER LINEA "EUROGOAL"



F 03

F 03. CARICABATTERIE LINEA "EUROGOAL"

G1486 | CARICABATTERIE PER LINEA "EUROGOAL"



F 04

F 04. PORTABATTERIE E BATTERIA

G2946 | PORTABATTERIE

G3808 | BATTERIA RICARICABILE 12V - 55Ah



F 05

F 05. KIT BATTERIE LINEA "WINSHOT"

G6019 | KIT BATTERIE PER "WINSHOT 1500" E "WINSHOT 1000"

G2955 | KIT BATTERIE PER "WINSHOT 800" E "WINSHOT 500"

ACCESSORI PER SPARAPALLONI



F 06. TELO DI COPERTURA PER "EUROGOAL"

G3063 | TELO DI COPERTURA

F 06



F 07. PROTEZIONE ANTERIORE "WINSHOT 1500"

G5073 | KIT PROTEZIONE ANTERIORE

F 07



VETERINARIA

CONTENUTI

- TECARTERAPIA	160
• TECARVET 4000 TECARVET 4000 RE	160
• TECARVET 2000	161
- MAGNETOTERAPIA	162
• KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO	162
• MAGNETOVET 4000	166
• MAGNETOVET 200 + CUCCIA TERAPEUTICA	167
- ELETTROTERAPIA	168
• STIMVET 4000	168
• STIMVET 2000	169
• STIMVET 200	170
- ULTRASUONOTERAPIA	172
• ULTRASOUNDVET 4000	172
- LASERTERAPIA	174
• LASERVET 15.0	174
• LASERVET 8.0	175
• LASERVET 3.0	176
• LASERVET 1.0	177
- ACCESSORI	178

TECARVET 4000 | TECARVET 4000 RE

TECARTERAPIA

TECARVET 4000 È UN APPARECCHIO CHE UTILIZZA LA DIATERMIA PER OTTENERE STRAORDINARI EFFETTI TERAPEUTICI SUI PICCOLI ANIMALI COME CANE E GATTO. IL DISPOSITIVO TRASFERISCE ENERGIA SIA IN MODALITÀ CAPACITIVA CHE RESISTIVA. IN QUESTO MODO L'EFFETTO DEL TRATTAMENTO POTRÀ ESSERE DIREZIONATO CON BUONA EFFICACIA SIA SUI TESSUTI BIOLOGICI PROFONDI CHE SU QUELLI PIÙ SUPERFICIALI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 4,3" touch-screen

Potenza

160W, ±20%

Frequenze di emissione

400kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz ± 10%

Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

Elettrodi capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Elettrodi resistivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240V-AC, 50-60Hz, 1,8A

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

1,04 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3865
- 1 Valigetta professionale
- 1 Dispositivo TECARVET 4000
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra)
- 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)
- 1 Barattolo di crema da 250 ml
- 3 Fasce elastiche
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

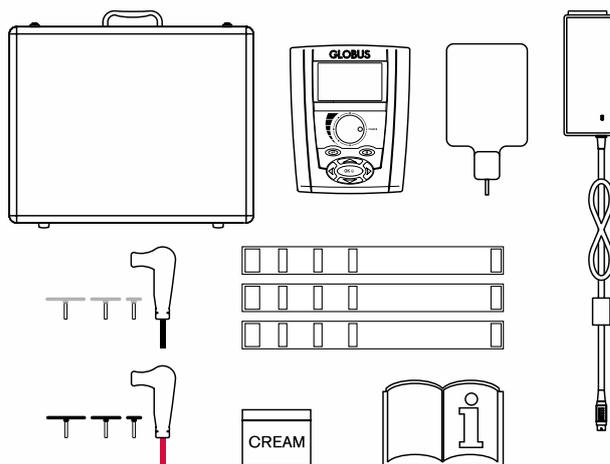

OPZIONE DI ACQUISTO

- Cod. G3973 TECARVET 4000 RE *

* TECARTERAPIA RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET



PUNTI FORZA



TECARVET 2000

TECAR TERAPIA

IL MODELLO TECARVET 2000 RACCHIUDE TUTTA LA QUALITÀ DELLA TECAR TERAPIA GLOBUS IN UNA MACCHINA DI DIMENSIONI E PESO RIDOTTI, PER GARANTIRE LA MASSIMA PORTABILITÀ, MANTENENDONE INVARIATE EFFICACIA E PROFESSIONALITÀ. IL MANIPOLO SPECIALE BIPOLARE RESISTIVO, PERMETTE DI VELOCIZZARE LA PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE E GATTO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Potenza

50W, $\pm 10\%$

Frequenze di emissione

470kHz, $\pm 10\%$

Modalità di trattamento

Resistiva bipolare

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

1,04 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5617
- 1 Valigetta professionale
- 1 Dispositivo TECARVET 2000
- 1 Manipolo bipolare di \varnothing 50 mm
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

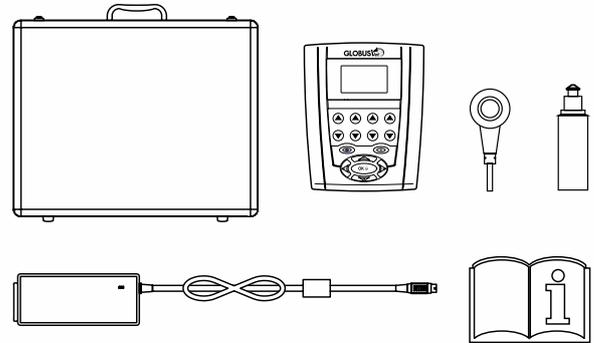

CE



PUNTI FORZA




KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO



MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

IL NUOVO KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO OLTRE AL DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA, CON I NUOVI PROGRAMMI DEDICATI AL CAVALLO, COMPRENDE GLI ACCESSORI PENSATI PER IL SUO TRATTAMENTO: COPERTA E COPRICOLLO TERAPEUTICI, SOLENOIDI FLESSIBILI CON RELATIVI CAVI SDOPPIATORI, UNA PRATICA CUSTODIA PORTA DISPOSITIVO E UNA FASCIA REGOLABILE UTILE PER FISSARE IL DISPOSITIVO AL CAVALLO. COMPLETANO IL KIT UNA COMODA BORSA PER IL TRASPORTO E DOPPIO PACCO BATTERIA. MAGNETOVET 4000 HORSE È IL NUOVO DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA A CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ELEVATA INTENSITÀ, PENSATO APPPOSITAMENTE PER IL TRATTAMENTO DEL CAVALLO. I QUATTRO CANALI DI USCITA CONSENTONO DI COLLEGARE I SOLENOIDI INSERITI NELLA COPERTA E NEL COPRICOLLO TERAPEUTICI, PERMETTENDO DI TRATTARE L'INTERA COLONNA VERTEBRALE DEL CAVALLO.

COPERTA TERAPEUTICA

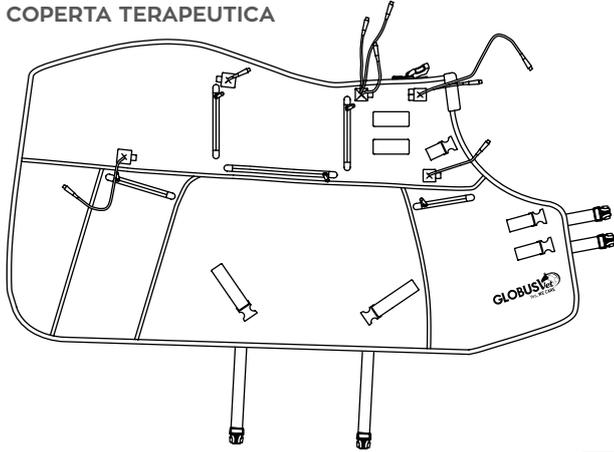


COPRICOLLO TERAPEUTICO

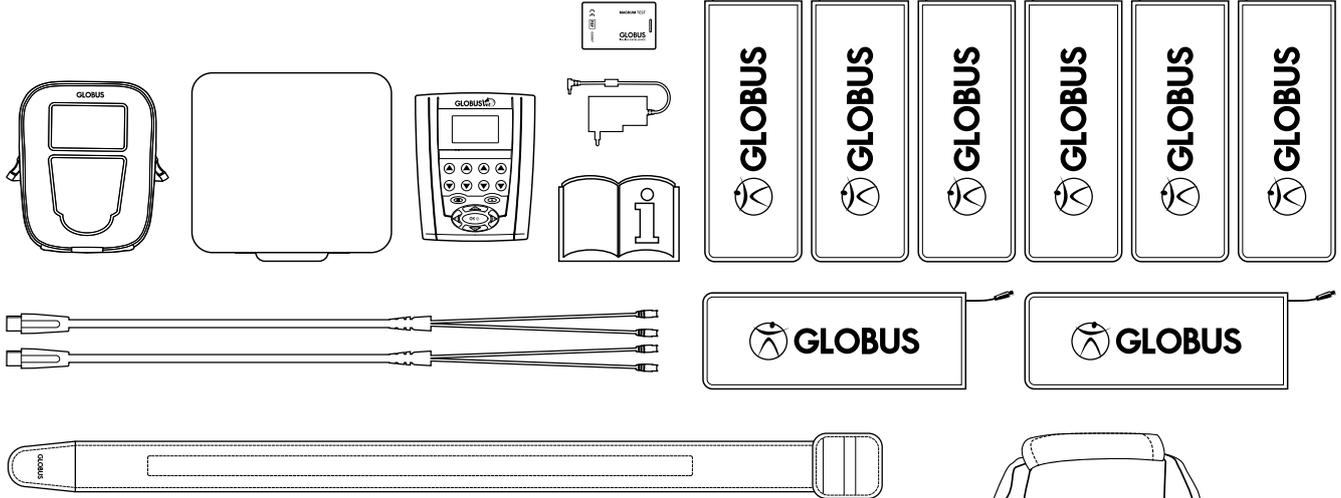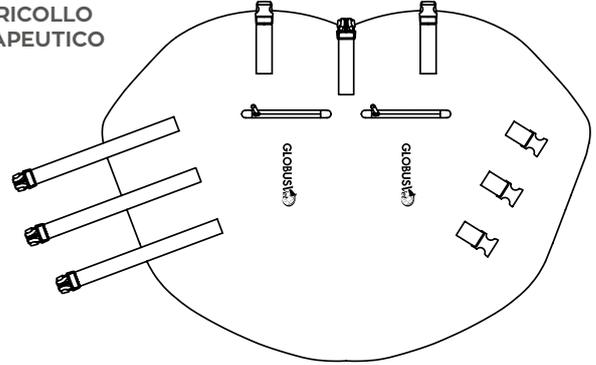

DOTAZIONE DI SERIE

Cod. **G6593**

- 1 Coperta terapeutica
- 1 Copricollo terapeutico
- 1 Custodia con tracolla per MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Borsa antiurto per trasporto dispositivo
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Pacco batteria (già all'interno del dispositivo)
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo
- 8 Solenoidi flessibili 400x150 mm per coperta e/o copricollo
- 2 Cavi sdoppiatori
- 1 Fascia velcrabile per fissaggio custodia
- 1 Borsone per trasporto Kit

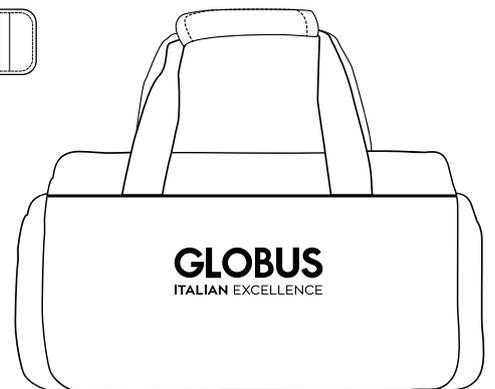

DISPONIBILE SU RICHIESTA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI COMPATIBILI CON MAGNETOVET 4000 HORSE, OLTRE A QUELLI PRESENTI ALL'INTERNO DEL KIT

KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

DISPOSITIVO MAGNETOVET 4000 HORSE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Canali

4

Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex
800 Gauss di media totali (per 4 canali)

Le potenze dichiarate si riferiscono agli accessori con due bobine. Nel caso di accessori con più bobine la potenza viene uniformemente distribuita

Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria 4000mAh incluso

Dimensioni

170x220x60 mm

Peso

1,37 Kg



ELENCO PROGRAMMI CAVALLO

I PROGRAMMI SONO SUDDIVISI PER I DISTRETTI ANATOMICI DI COLLO, DORSO E ARTI

Artrosi

Artrite

Frattura

Ritardo Consolidamento Frattura

Discopatia

Ferita/ulcera

Antiinfiammatorio

Trauma/contusione

Relax muscolare

Attivazione PRE gara

Recupero POST gara

Lesione muscolare

ELENCO PROGRAMMI CANE/GATTO

I PROGRAMMI PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA CUCCIA TERAPEUTICA O DEI SOLENOIDI FLESSIBILI A 2 BOBINE, 300x100 mm

Frattura

Osteoartrite

Discopatia

Cicatrizzazione

Dolore infiammatorio



EASY PROGRAM



FUNZIONE 2+2



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMABILE



PACCO BATTERIA



ALIMENTAZIONE A RETE

KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNETOTERAPIA PER CAVALLO

COPERTA TERAPEUTICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENTE E LAVABILE

Dimensioni

142 cm lunghezza dal garrese (A) alla coda (B)

Peso

1,80 Kg (senza solenoidi)

Taglia

Unica

Cinghie

5 di fissaggio, regolabili
3 di collegamento al copricollo terapeutico

Tasche

8 per inserimento solenoidi flessibili a 4 bobine
2 centrali porta cavi

Maniglie

3 per il posizionamento della coperta

Cavi e prolunghe

Inclusi

Materiale

96% poliestere, 4% polipropilene



COPRICOLLO TERAPEUTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENTE E LAVABILE

Dimensioni

121 cm lunghezza dalle orecchie (A) al garrese (B)

Peso

560 gr (senza solenoidi)

Taglia

Unica

Cinghie

3 di fissaggio, regolabili
3 di collegamento alla coperta terapeutica

Tasche

2 per l'inserimento dei solenoidi flessibili a 4 bobine

Cavi e prolunghe

Inclusi

Materiale

94% poliestere, 3% polipropilene,
3% polietilene espanso





MAGNETOVET 4000

MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 4000 È UN APPARECCHIO PER MAGNETOTERAPIA A CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ELEVATA INTENSITÀ. LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE QUATTRO CANALI DI USCITA CONSENTE DI COLLEGARE MOLTI ACCESSORI E DI TRATTARE NELLO STESSO TEMPO PIÙ PARTI DEL CORPO OPPURE ANCHE DUE ANIMALI CONTEMPORANEAMENTE. LA MAGNETOTERAPIA HA INNUMEREVOLI E COMPROVATI EFFETTI BENEFICI SIA SUL TESSUTO OSSEO CHE ARTICOLARE. GLI IMPULSI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI, INFATTI, STIMOLANO LA RIGENERAZIONE DI NUOVE CELLULE E IL RIMODELLAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Canali

4

Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex
800 Gauss di media totali (per 4 canali)

Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

820 gr

DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G5628
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 4000
- 4 Solenoidi flessibili 300x100 mm
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

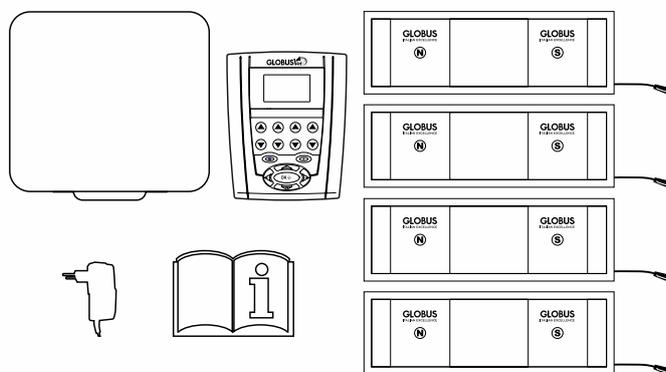

OPZIONE DI ACQUISTO

- Cod. G6039

CUCCIA TERAPEUTICA IN MEMORY FOAM, 4 BOBINE, 70X44 cm PER CANI DI PICCOLA TAGLIA E GATTI. PER CANI DI TAGLIA GRANDE ACQUISTARE 2 CUCCE SINGOLE CHE VERRANNO UNITE DAL VELCRO.

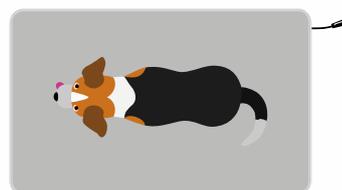

CE

PUNTI FORZA



MAGNETOVET 200 con CUCCIA TERAPEUTICA

MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 È UN DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PORTATILE IN GRADO DI PRODURRE UN CAMPO ELETTROMAGNETICO AD ALTA INTENSITÀ. GLI IMPULSI PRODOTTI HANNO UN EFFETTO TERAPEUTICO E RIGENERATIVO SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI CHE COLPISCONO GLI ANIMALI. PER LA SUA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO IN COMBINAZIONE CON LA CUCCIA TERAPEUTICA, MAGNETOVET 200 È PARTICOLARMENTE INDICATA ANCHE PER I TRATTAMENTI DOMICILIARI DEI DOLORI CRONICI.


PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

SPECIFICHE TECNICHE

Display
Dimensione 2,6", retroilluminato
Canali
2
Intensità erogabile
200 Gauss medi per canale con solenoidi flex
Frequenza
Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz
Duty Cycle
Da 5% a 50% a step di 5
Alimentazione
- Rete - Batteria ricaricabile (non in dotazione)
Dimensioni
100x160x35 mm
Peso
280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6115
· 1 Borsa
· 1 Dispositivo MAGNETOVET 200
· 1 Cuccia Terapeutica mm 700x440
· 2 Solenoidi flessibili 300x100 mm
· 1 Coperta in morbido pile
· 1 Alimentatore
· 1 Manuale operativo

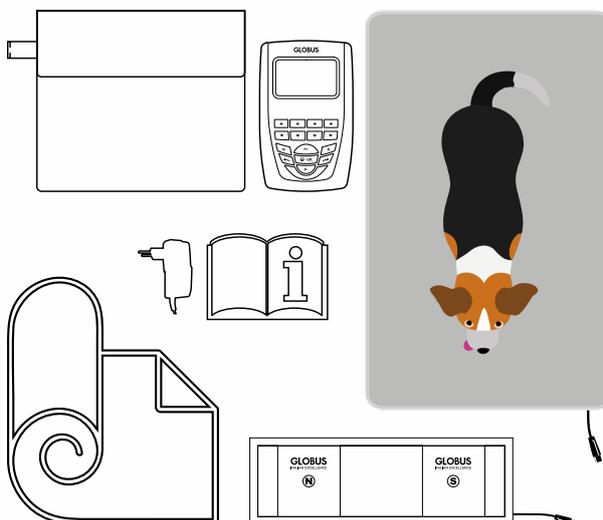

OPZIONE DI ACQUISTO

· Cod. G5620	DOTAZIONE MAGNETOVET 200 SENZA CUCCIA TERAPEUTICA E SENZA COPERTA IN PILE
· Cod. G6039	CUCCIA TERAPEUTICA IN MEMORY FOAM, 4 BOBINE, 70X44 cm PER CANI DI PICCOLA TAGLIA E GATTI. PER CANI DI TAGLIA GRANDE ACQUISTARE 2 CUCCE SINGOLE CHE VERRANNO UNITE DAL VELCRO.



CE

PUNTI FORZA



STIMVET 4000

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI

STIMVET 4000 È UN DISPOSITIVO PROFESSIONALE DI ELETTROTHERAPIA INDICATO IN AMBITO RIABILITATIVO VETERINARIO. IL DISPOSITIVO INCLUDE CORRENTI ADATTE AL RECUPERO DELLA MUSCOLATURA IN CASO DI ATROFIA E DI CORRENTI TENS PER IL TRATTAMENTO ANTALGICO DI DOLORI CRONICI E ACUTI. OLTRE A QUESTO SONO PRESENTI DELLE CORRENTI PER TRATTARE MUSCOLI DENERVATI E LE MICROCORRENTI INDICATE PRINCIPALMENTE NELLE LESIONI CARTILAGINEE E NELLE FERITE. IL DISPOSITIVO È COMPLETO DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER IL TRATTAMENTO DI CANI, GATTI E CAVALLI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

1-150Hz

Ampiezza impulso

50-450µs

Intensità

100mA per canale

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

1,37 Kg

DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G5500
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo STIMVET 4000
- 4 Fasce elastiche
- 2 Cavi grigi per microcorrente e ionofresi
- 4 Cavi colorati per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi quadrati in silicone
- 4 Elettrodi rettangolari in silicone
- 4 Spugnette per ionofresi
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

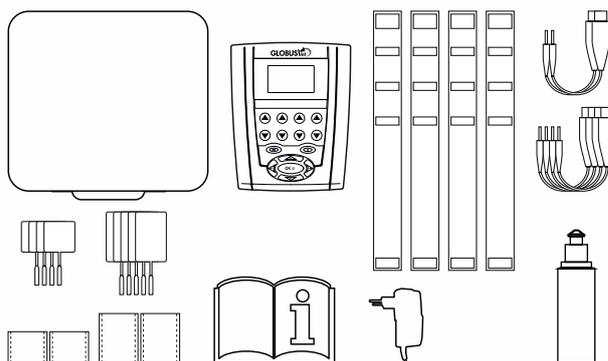

CE



PUNTI FORZA

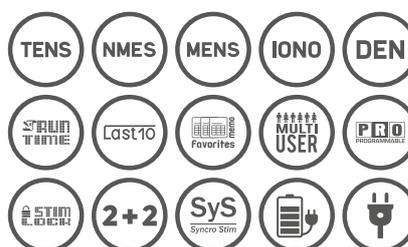

STIMVET 2000

ELETTROTERAPIA 4 CANALI

STIMVET 2000 È UN ELETTROSTIMOLATORE PORTATILE INDICATO PER LA RIABILITAZIONE MUSCOLARE E IL TRATTAMENTO ANTALGICO DI CANI, GATTI E CAVALLI. IL DISPOSITIVO È ADATTO ANCHE PER CANI SPORTIVI O DA LAVORO CHE DEVONO AUMENTARE LE LORO CAPACITÀ ATLETICHE. STIMVET 2000 INCLUDE ANCHE ALCUNI PROGRAMMI DI MICROCORRENTE UTILI PER CICATRIZZARE FERITE.


PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

SPECIFICHE TECNICHE


Display
Dimensione 2,6", retroilluminato
Canali
4 indipendenti (8 elettrodi)
Frequenza
1-150Hz
Ampiezza impulso
50-450µs
Intensità
100mA per canale
Alimentazione
- Rete - Batteria ricaricabile
Dimensioni
100x160x35 mm
Peso
450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5614
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo STIMVET 2000
- 4 Fasce elastiche
- 2 Cavi grigi per microcorrente
- 4 Cavi colorati per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi quadrati in silicone
- 4 Elettrodi rettangolari in silicone
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

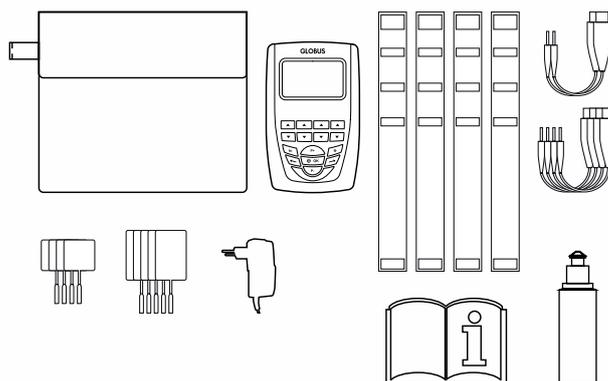

PUNTI FORZA

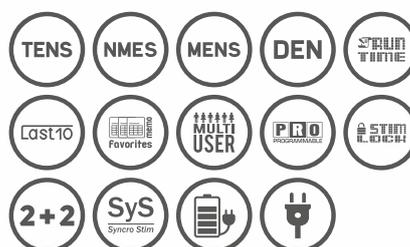

STIMVET 200

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI

STIMVET 200 È UN ELETTROSTIMOLATORE PORTATILE INDICATO PER LA RIABILITAZIONE MUSCOLARE E IL TRATTAMENTO ANTALGICO DI CANI E GATTI. I PROGRAMMI DI RINFORZO MUSCOLARE SONO ADATTI SIA PER SOGGETTI CHE DEVONO RECUPERARE UNA SITUAZIONE ATROFICA SIA PER CANI SPORTIVI O DA LAVORO CHE DEVONO AUMENTARE LE LORO CAPACITÀ ATLETICHE. LE CORRENTI TENS, INVECE, SONO INDICATE PER GLI STATI DOLOROSI CRONICI E ACUTI E PERMETTONO DI FAR STAR MEGLIO L'ANIMALE RIDUCENDO L'ASSUNZIONE DI FARMACI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE E GATTO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

1-150Hz

Ampiezza impulso

50-450µs

Intensità

80mA per canale

Alimentazione

Batteria ricaricabile

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5608

· 1 Borsa

· 1 Dispositivo STIMVET 200

· 4 Fasce elastiche

· 2 Cavi grigi per microcorrente

· 4 Cavi colorati per collegamento elettrodi


· 4 Elettrodi quadrati in silicone

· 4 Elettrodi rettangolari in silicone

· 1 Confezione di gel da 260 ml

· 1 Alimentatore


· 1 Manuale operativo

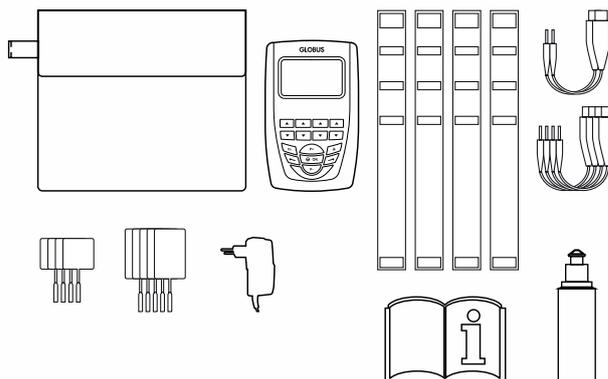

CE



PUNTI FORZA

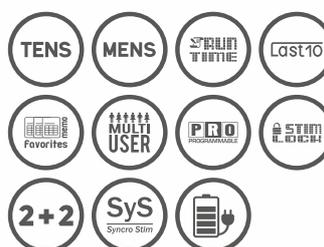



ULTRASOUNDVET 4000

ULTRASUONOTERAPIA

LA TERAPIA CON ULTRASOUNDVET 4000 È EFFICACE NEL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE TENDINEE, MUSCOLARI E LEGAMENTOSE DEL CANE, DEL GATTO E DEL CAVALLO. È ALTRESÌ UTILIZZATA IN PRESENZA DI ADERENZE CICATRIZIALI E RIGIDITÀ ARTICOLARE. QUESTA TERAPIA FISICA STRUMENTALE FORNISCE UNA STIMOLAZIONE MECCANICA TERMICA E ATERMICA PER FAVORIRE LA GUARIGIONE DEI TESSUTI DANNEGGIATI DEI MUSCOLI, TENDINI, CAPSULE ARTICOLARI, LEGAMENTI E OSSA.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Uscite

1 con manipolo di Ø 42 mm

Frequenza

1MHz e 3MHz

Potenza

3W/cm², ±20%

Duty Cycle

Da 10% a 100% a step di 10%

Emissione

Continua e pulsata

Modalità

A contatto diretto e a immersione

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni


170x220x60 mm

Peso

820 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3869
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 4000
- 1 Manipolo Ø 42 mm - IP 68
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

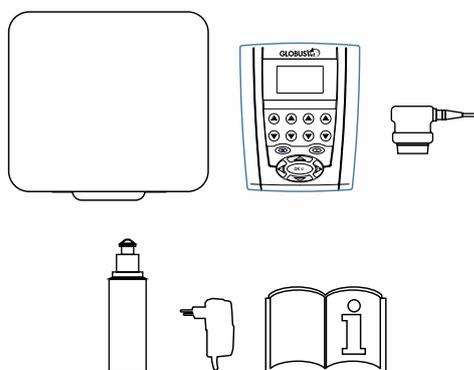

CE



PUNTI FORZA





LASERVET 15.0

LASERTERAPIA

LASERVET 15.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE PER LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA PULSATA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE TRATTAMENTI VETERINARI IN TEMPI RAPIDI. LE PATOLOGIE TRATTATE SONO DIVISE PER ANIMALE CON GRANDE ATTENZIONE AGLI EQUINI. L'AZIONE DEL LASER È RIVOLTA ALLA RIGENERAZIONE TISSUTALE, AL TRATTAMENTO POST -TRAUMATICO E ANTI-IFIAMMATORIO E ALLA RIDUZIONE DEL DOLORE SIA CRONICO CHE ACUTO.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza di picco

15W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, Ø 11 mm e Ø 22 mm

Ottica, Ø 60 mm (opzionale)

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete

- Batteria ricaricabile

Dimensioni e peso

220x170x60 mm

Peso

1,12 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6036

· 1 Borsa


· 1 Dispositivo LASERVET 15.0

· 1 Handpiece HP 808nm con ottiche Ø 11 mm e Ø 22 mm

· 2 Occhiali protettivi

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

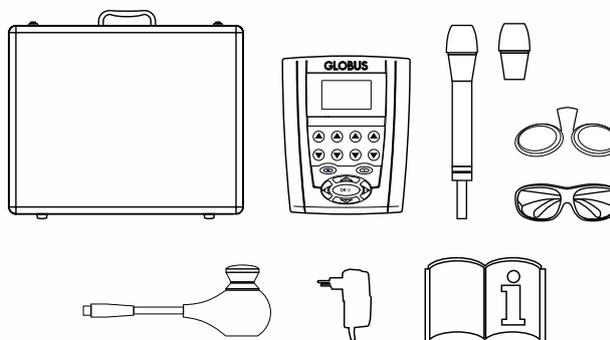

OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G6348 Handpiece HP 980nm

· Cod. G5996 Handpiece 1064nm

· Cod. G6089 Ottica Ø 60 mm

CE



PUNTI FORZA



LASERVET 8.0

LASERTERAPIA

LASERVET 8.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE E PALMARE PER LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA PULSATA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE TRATTAMENTI VETERINARI. L'AZIONE DEL LASER È RIVOLTA ALLA RIGENERAZIONE TISSUTALE, AL TRATTAMENTO POST-TRAUMATICO E ANTI-IFIAMMATORIO E ALLA RIDUZIONE DEL DOLORE SIA CRONICO CHE ACUTO.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza di picco

8W \pm 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

Emissione

Continua e pulsata

Ottiche disponibili

Ottica, \varnothing 11 mm

Ottiche, \varnothing 22 mm e \varnothing 60 mm (opzionali)

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni


100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G6035
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 8.0
- 1 Handpiece MP 808nm con ottica \varnothing 11 mm
- 2 Occhiali protettivi
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

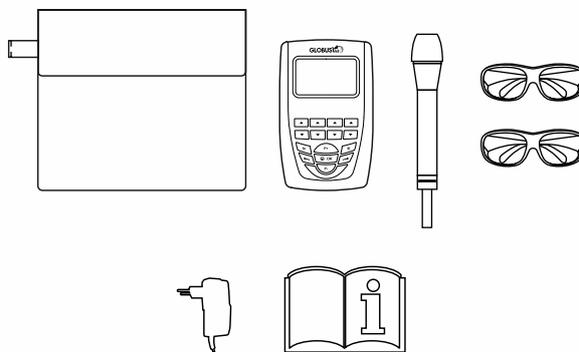

OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6347 Handpiece MP 980nm
- Cod. G5996 Handpiece 1064nm
- Cod. G6089 Ottica \varnothing 60 mm
- Cod. G6092 Ottica \varnothing 22 mm

CE



PUNTI FORZA



LASERVET 3.0

LASERTERAPIA

IL TRATTAMENTO CON LASERVET 3.0 ACCELERA LA GUARIGIONE DEI TESSUTI LESI E MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE. È IDEALE PER STIMOLARE LA CICATRIZZAZIONE DELLE FERITE CUTANEE ED È PARTICOLARMENTE EFFICACE PER IL TRATTAMENTO DI DIVERSE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE CARATTERIZZATE DA INFIAMMAZIONE E DOLORE. LA LASERTERAPIA VELOCIZZA LA SCOMPARSA DEL DOLORE, SIA USATA DA SOLA E SIA INSIEME AD ALTRE MODALITÀ TERAPEUTICHE.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza di picco

3W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottica disponibile

Ottica, Ø 11 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6192

· 1 Borsa


· 1 Dispositivo LASERVET 3.0

· 1 Handpiece Black 808nm con ottica Ø 11 mm

· 2 Occhiali protettivi

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

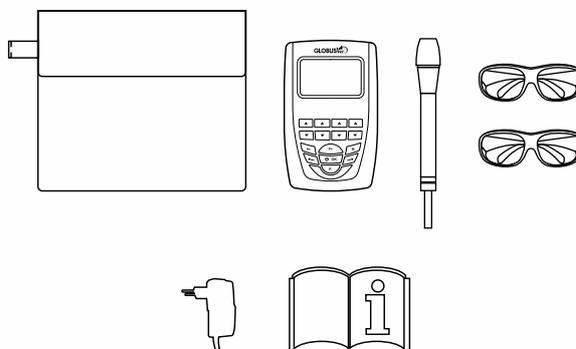

CE



PUNTI FORZA



LASERVET 1.0

LASERTERAPIA

LASERVET 1.0 È L'UNICO LASER IN CLASSE 4 DEL CATALOGO GLOBUSVET. IL DISPOSITIVO PUÒ RAGGIUNGERE 1 WATT DI POTENZA ED È COMPLETO DI PROGRAMMI PREINSERITI PER CANI, GATTI E CAVALLI. INOLTRE C'È LA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE E MEMORIZZARE NUOVI PROGRAMMI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza di picco

1W \pm 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Ottica disponibile

Ottica, \varnothing 11 mm

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni


100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G5629
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 1.0
- 1 Handpiece White 808nm con ottica \varnothing 11 mm
- 2 Occhiali protettivi
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

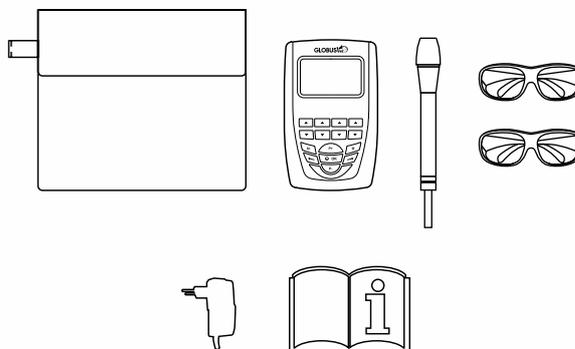

PUNTI FORZA



ACCESSORI VETERINARIA

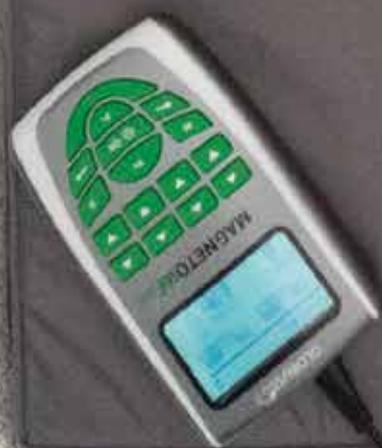

CUCCIA TERAPEUTICA PER MAGNETOTERAPIA

INDICATO PER **ARTROSI E DOLORI ARTICOLARI**

TECARTERAPIA

G6661	MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO
G6689	PIASTRA NEUTRA FLESSIBILE 250X200 mm
G6660	MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO
G6659	MANIPOLO BIPOLARE, Ø 30 mm
G6658	MANIPOLO BIPOLARE, Ø 50 mm
G6672	ELETTRODO CAPACITIVO, Ø 30 mm
G6671	ELETTRODO CAPACITIVO, Ø 50 mm
G6670	ELETTRODO CAPACITIVO, Ø 70 mm
G6669	ELETTRODO RESISTIVO, Ø 30 mm
G6668	ELETTRODO RESISTIVO, Ø 50 mm
G6667	ELETTRODO RESISTIVO, Ø 70 mm
G3368	CREMA TECAR, 250 ml
G3369	CREMA TECAR, 1000 ml
G6664	CAVO PER PIASTRA NEUTRA
G6663	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "TECARVET 4000"
G6638	PACCO BATTERIA PER DISPOSITIVO "TECARVET 2000"
G1364	VALIGETTA IN ALLUMINIO NERA PER DISPOSITIVO "TECARVET 2000"
G3370	DISPENSER E TAPPO PER BARATTOLO CREMA
G3371	VALIGETTA IN ALLUMINIO GRIGIA PER DISPOSITIVO "TECARVET 4000"
G6489	SUPPORTO ACCESSORI LINEA "TECARVET"
G6488	SUPPORTO DISPOSITIVI E ACCESSORI LINEA "TECARVET"

MAGNETOTERAPIA

G6589	MAGNETOVET 4000 HORSE
G6619	COPERTA TERAPUTICA CON SOLENOIDI
G6530	COPERTA TERAPUTICA SENZA SOLENOIDI
G6620	COPRICOLLO TERAPUTICO COMPLETO DI SOLENOIDI
G6531	COPRICOLLO TERAPUTICO SENZA SOLENOIDI
G6591	GAMBALE TERAPEUTICO ANTERIORE COMPLETO DI SOLENOIDI
G6256	GAMBALE TERAPEUTICO ANTERIORE SENZA SOLENOIDI
G6592	GAMBALE TERAPEUTICO POSTERIORE COMPLETO DI SOLENOIDI
G6255	GAMBALE TERAPEUTICO POSTERIOR SENZA SOLENOIDI
G6632	SOLENOIDE FLESSIBILE, 300X100 mm, 2 BOBINE
G6629	SOLENOIDE FLESSIBILE, 400X150 mm, 4 BOBINE
G6631	TAPPETINO "SOFT 4" DA 250X250 mm, 2 CANALI, 4 BOBINE
G6039	ESTENSIONE CUCCIA TERAPEUTICA DA 440X700 mm, 4 BOBINE
G6134	COPERTA GLOBUSVET IN MORBIDO PILE
G5878	KIT COPRI SOLENOIDI FLESSIBILI, 10 PZ
G6533	CUSTODIA PER DISPOSITIVO MAGNETOVET 4000 HORSE
G6532	FASCIA PER CUSTODIA MAGNETOVET 4000 HORSE
G6713	MAGNUM TEST, SEGNALE DI CORRETTA EROGAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO
G6728	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "MAGNETOVET 200"
G6710	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "MAGNETOVET 4000"
G6637	PACCO BATTERIA PER DISPOSITIVO "MAGNETOVET 200"
G6638	PACCO BATTERIA PER DISPOSITIVO "MAGNETOVET 4000"
G6709	CAVO SDOPPIATORE

ALTRO

G5927	ZAINO GLOBUS, DIMENSIONI 30x45x15 mm (LxHxP)
G5521	TROLLEY CON SCOMPARTI MULTIPLI PER TRASPORTO DISPOSITIVI

ELETTROTHERAPIA

G0136	ELETTRODI MYOTRODE PLATINUM, 50X50 mm, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0137	ELETTRODI MYOTRODE PLATINUM, 50X90 mm, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0464	ELETTRODI MYOTRODE PLUS, 50X50 mm, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0465	ELETTRODI MYOTRODE PLUS, 50X90 mm, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0451	ELETTRODI, Ø 32 mm, A CAVETTO, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G6715	ELETTRODO A METRO IN SILICONE CONDUTTIVO
G0463	KIT 6 ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO
G0890	ELETTRODO IN CARBONIO PER IONOFRESI MEDIO, CON TASCA, 50X50 mm
G0885	ELETTRODO IN CARBONIO PER IONOFRESI GRANDE, CON TASCA, 60X85 mm
G6719	TASCA PER ELETTRODO IONOFRESI GRANDE, 60X85 mm
G6720	TASCA PER ELETTRODO IONOFRESI MEDIO, 50X50 mm
G1839	KIT CAVI COLORATI PER DISPOSITIVI A 4 CANALI, CONFEZIONE N° 4 PZ
G6734	CAVO DI RICAMBIO, COLORE BIANCO PER DISPOSITIVI A 4 CANALI
G0439	KIT DI 2 CAVETTI SDOPPIATORI, UNIVERSALI
G0441	KIT DI 2 CAVI SDOPPIATI, PER DISPOSITIVI A 4 CANALI
G0484	GEL GLOBUS, 260 ml, CONFEZIONE N° 10 PZ.
G0869	GEL GLOBUS, 260 ml - N° 1 PZ.
G4034	GEL GLOBUS, 1000 ml - N° 1 PZ.
G3609	GEL GLOBUS, 5000 ml - N° 1 PZ.
G6682	PENNA CERCAPUNTI MOTORI
G1225	FASCE ELASTICHE TAGLIA "S", 400X80 mm, CONFEZIONE N° 2 PZ.
G1226	FASCE ELASTICHE TAGLIA "M", 800X80 mm, CONFEZIONE N° 2 PZ.
G4249	ADATTATORE PER AGOPUNTURA, COLORE NERO
G4250	ADATTATORE PER AGOPUNTURA, COLORE ROSSO
G6639	PACCO BATTERIA, PER DISPOSITIVO "STIMVET 4000"
G6637	PACCO BATTERIA, PER DISPOSITIVO "STIMVET 200"
G6731	CARICABATTERIA PER DISPOSITIVO "STIMVET 200"
G6729	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "STIMVET 4000"

ULTRASUONOTERAPIA

G6739	MANIPOLO Ø 42 mm, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000" - SCHEDA SD4
G6737	MANIPOLO Ø 42 mm, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000" - SCHEDA SD5
G6741	MANIPOLO Ø 16 mm, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000" - SCHEDA SD5
G6742	MANIPOLO Ø 16 mm, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000" - SCHEDA SD4
G0484	GEL GLOBUS, 260 ml, CONFEZIONE N° 10 PZ.
G0869	GEL GLOBUS, 260 ml - N° 1 PZ.
G4034	GEL GLOBUS, 1000 ml - N° 1 PZ.
G3609	GEL GLOBUS, 5000 ml - N° 1 PZ.
G6638	PACCO BATTERIA PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000"
G6743	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000"

LASERTERAPIA

G6348	HANDPIECE, HP 980nm	G6089	OTTICA, Ø 60 mm
G6347	HANDPIECE, MP 980nm	G6092	OTTICA, Ø 22 mm
G6194	HANDPIECE, HP 808nm	G6090	OTTICA, Ø 11 mm
G6282	HANDPIECE, MP 808nm		
G5996	HANDPIECE, 1064nm		
G6208	HANDPIECE BLACK 808nm		
G6275	HANDPIECE WHITE 808nm		
G6746	OCCHIALI PROTETTIVI PER OPERATORE - IPL		
G6728	ALIMENTATORE PER LASERVET 1.0 / 3.0 / 8.0		
G6729	ALIMENTATORE PER LASERVET 15.0		
G6637	PACCO BATTERIA PER LASERVET 1.0 / 3.0 / 8.0		
G6639	PACCO BATTERIA PER LASERVET 15.0		

Legenda

PUNTI FORZA



LINEA KINEO



ISOTONICO NIT (NO INERZIA)

Il metodo isotonico NIT introduce una modalità di allenamento isotonico che, eliminando l'inerzia, permette di fissare un carico costante per tutto il range di movimento. Nell'allenamento senza inerzia il carico è costante durante tutto il movimento indipendentemente dalla velocità, si ha un'attivazione muscolare completa dall'inizio alla fine del movimento e il carico fisso permette di eseguire al massimo ogni tuo allenamento con la massima sicurezza e senza perdere mai il contatto.



ISOTONICO WIT (CON INERZIA)

Nell'innovativo sistema Kineo viene utilizzato, un sistema robotico che permette di lavorare con il metodo Isotonico e con un totale controllo del carico e dei parametri di lavoro permettendo di usare carichi diversi nelle 2 fasi del movimento, concentrica ed eccentrica, per un allenamento più funzionale ed efficace.



ELASTICO

Il metodo Elastico adatta la resistenza dell'esercizio in base al tuo range di movimento in modo funzionale: carico minimo nei punti sfavorevoli, carico più elevato in quelli ottimali. Impostare un elastico con Kineo è semplice: definisci il carico iniziale e finale. Verrà automaticamente creato il tuo elastico personalizzato.



SMART VISCOSO

Il metodo VISCOSO di Kineo utilizza il principio dell'allenamento dentro l'acqua come modalità di lavoro nei comuni esercizi di rinforzo. Il valore del carico viscoso è determinato da 2 parametri: il livello di viscosità impostato e la velocità di movimento durante l'esercizio. Kineo consente di utilizzare 6 livelli di viscosità che simulano un allenamento in fluidi diversi, come acqua, olio, miele o altro, che comportano differenti livelli di impegno muscolare.



CARICO VARIABILE

Nell'allenamento isotonico tradizionale (pesi, bilancieri, macchine), il carico di lavoro è costituito da un peso che resta sempre uguale durante l'esercizio. Kineo invece, consente di programmare un carico che varia con un andamento (curva) che riflette la reale capacità di forza del soggetto. Inoltre protegge e salvaguarda le articolazioni negli angoli critici di lavoro, mentre invece produce la massima richiesta di forza ed il massimo effetto allenante negli angoli di lavoro più favorevoli.



ISOMETRICO

Questo metodo consiste nel produrre una contrazione muscolare, anche massimale, senza che vi sia accorciamento della muscolatura e movimento dell'articolazione interessata. Kineo è in grado di programmare esercizi isometrici su qualsiasi angolo di lavoro per uno sviluppo della forza più completo. Il sistema di Biofeedback inoltre permette di controllare la forza espressa (in tempo reale) per raggiungere il Target di allenamento. Per superare i limiti del metodo isometrico tradizionale Kineo ha introdotto anche la misurazione della forza isometrica in rapporto al tempo impiegato per svilupparla. Questo metodo viene utilizzato prevalentemente nella riabilitazione funzionale perché è sicuro, modulabile, non produce movimento e stress articolare, migliora il reclutamento delle fibre muscolari.



ISOCINETICO

Il metodo Isocinetico è caratterizzato da un movimento a velocità costante, indipendentemente dalla forza applicata: ciò consente di svolgere il processo riabilitativo in totale sicurezza. Con Kineo è stata implementata le funzionalità del metodo isocinetico con esercizi isocinetici in catena cinetica aperta e chiusa e con carico differenziato tra fase concentrica e fase eccentrica.

LINEA DIACARE | TECAR BEAUTY



ATLANTE DEI TRATTAMENTI

Ampia libreria di programmi preimpostati divisi per distretto anatomico e completi di immagini esemplificative.



TRATTAMENTO MANI LIBERE

Il programma permette di favorire l'assorbimento del principio attivo di un farmaco o di una crema.



MULTIFREQUENZA

Differenti frequenze di lavoro selezionabili per trattare il paziente in modo puntuale a diverse profondità.



VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

Il programma permette di favorire l'assorbimento del principio attivo di un farmaco o di una crema.



SCANSIONE AUTOMATICA DELLE FREQUENZE

Il programma permette, all'interno dello stesso trattamento, di trasferire in modo uniforme l'energia a differenti profondità.



TRATTAMENTI IN ATERMIA

Biostimolazione dei tessuti senza generazione di calore per curare patologie che non possono essere trattate con alte temperature.



TRATTAMENTI PULSATI

Programmi con emissione pulsata di diverso duty cycle per mantenere alta l'energia trasferita nei tessuti conservando, nello stesso tempo, un buon controllo della temperatura.



FASCIA TOOLS

Sono speciali elettrodi ergonomici, disegnati per la mobilizzazione ed il trattamento avanzato di tutte le affezioni dei tessuti molli.



METODO RESISTIVO

Utilizza un manipolo in acciaio non schermato per lavorare sui tessuti più resistenti e profondi quali ossa, muscoli molto contratti e legamenti.



CAPACITIVO

Utilizza un manipolo in acciaio con schermatura concentrando gli ioni sotto il manipolo stesso ad una profondità massima di 2/3 cm. I tessuti trattabili tramite il manipolo capacitivo della tecar sono i più superficiali e molli, quali tessuto muscolare, connettivo lasso o sistema linfatico.



BIPOLARE

Utilizza un manipolo unico con i due poli incorporati.



DISPLAY A COLORI



RICARICA

Funzione che permette di acquistare il dispositivo ad un prezzo vantaggioso, ricaricandolo in minuti secondo le necessità di utilizzo.



DISPLAY TOUCH SCREEN



ALIMENTAZIONE A RETE

LINEA REHAB | BEAUTY | SPORT | VET

PER **MAGNETOTERAPIA | ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE | ULTRASUONOTERAPIA | LASERTERAPIA**



TENS

La Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), è una stimolazione che viene effettuata somministrando piccoli impulsi elettrici nella zona dolorante. La stimolazione raggiunge le terminazioni nervose, inibendo la trasmissione della sensazione di dolore.



NMES

La Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES), è una corrente adatta a stimolare la muscolatura con l'obiettivo di migliorarne il tono e il trofismo muscolare.



MENS

Le Microcurrent Electrical Nerve Stimulation (MENS), sono degli impulsi elettrici minuscoli e impercettibili, in grado di alleviare il dolore, stimolare i tessuti e favorire la guarigione di vari tipi di lesioni e patologie osteo-articolari.



IONO

La ionoforesi è una tecnica che permette di utilizzare una corrente continua per la somministrazione di un farmaco per via transcutanea.



3S

La Serial Sequential Stimulation è una nuova metodologia di stimolazione che, in campo medico/fisioterapico, permette di stimolare i muscoli coinvolti, in modo sequenziale.



ACTION NOW

Consente di attivare la contrazione muscolare attraverso un comando esterno gestito da un operatore.



RUN TIME

Questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l'ampiezza dell'impulso durante il trattamento.



LAST 10

Lo stimolatore memorizza (come nei cellulari) gli ultimi dieci programmi effettuati in modo da renderli rapidamente disponibili per una successiva esecuzione.



FUNZIONE PREFERITI

I terapisti possono memorizzare fino a 30 programmi per ciascuno degli utenti registrati.



MULTI USER

Questa funzione speciale rende più agevole l'uso dello stimolatore in quanto permette di memorizzare nella stessa macchina le impostazioni personali di utenti diversi.



EASY PROGRAM

Questa funzione permette di avviare un trattamento di magnetoterapia, modificandone i parametri, con pochi semplici click.



PROGRAMMABILE

L'utente può creare alcuni programmi con parametri personalizzati.



STIM LOCK

Permette all'utilizzatore di bloccare l'apparecchio e fa sì che vengano eseguiti solo i trattamenti che sono stati salvati.



FUNZIONE 1+1

Permette di usare 2 programmi differenti nello stesso momento.



FUNZIONE 2+2

Permette di usare programmi differenti e stimolare 2 parti del corpo o 2 persone contemporaneamente.



MY TRAINER

Questa funzione, in alcune forme d'onda (EMS, TENS, MENS), visualizza le immagini del posizionamento elettrodi direttamente sul display.



AUTO STIM

Questa funzione consente di eseguire in automatico un programma già effettuato, ripristinando il valore dell'intensità utilizzato nel programma precedente.



SYNCR0 STIM

Questa funzione permette di aumentare o diminuire con un solo tasto l'intensità di stimolazione su tutti i canali contemporaneamente.



WORK TIME

Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio in termini di stimolazione.



OPZIONE NOLEGGIO

Permette di bloccare il dispositivo mantenendo in memoria solo il numero di trattamenti da eseguire. Funzione adatta per il noleggio del dispositivo.



BATTERIA RICARICABILE

Il dispositivo è fornito di batteria ricaricabile e caricabatteria per avere sempre il dispositivo utilizzabile ovunque ci si trovi.



ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Il dispositivo può anche funzionare a rete.

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

DOMINO S.R.L.

Via Vittorio Veneto, 52
31013 Codognè - (TV) - ITALIA
Telefono (+39) 0438 7933
globuscorporation.com

Materiale informativo riservato agli operatori del settore.

Immagini, caratteristiche e dati riportati in questo depliant non sono vincolanti e soggetti a modifica da parte del produttore senza obbligo di preavviso.

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma prodotti, sui trattamenti e i nostri video, consultate il sito:

www.globuscorporation.com

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

KINEO

MEDICAL

BEAUTY

SPORT

VET

