

# LASERVET 1.0

## TERAPIA LÁSER

LASERVET 1.0 ES EL ÚNICO LÁSER DE CLASE 4 DEL CATÁLOGO GLOBUSVET. EL DISPOSITIVO PUEDE ALCANZAR 1 VATIO DE POTENCIA E INCLUYE PROGRAMAS PREDETERMINADOS PARA PERROS, GATOS Y CABALLOS. ADEMÁS, EXISTE LA POSIBILIDAD DE PROGRAMAR Y ALMACENAR NUEVOS PROGRAMAS.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

#### Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

#### Potencia de pico

1 W  $\pm$ 20%

#### Configurado para la longitud de onda

808 nm

#### Emisión

Pulsada y continua

#### Tamaño área objetivo

Óptica Ø 11 mm

#### Frecuencia

Hasta 10000 Hz

#### Alimentación

Red y batería recargable

#### Tamaño y peso


100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo LASERVET 1.0
- 1 Manípulo láser White 808 nm con óptica Ø 11 mm
- 1 Gafa protectora para el terapeuta
- 1 Kit con tres gafas protectoras de uso veterinario, tallas S, M, L
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso

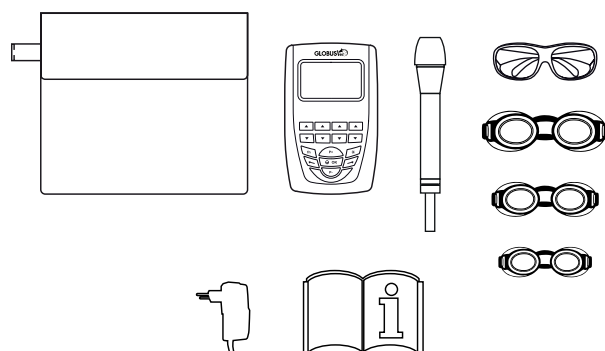

ÚLTIMOS 10



MULTI USER



PROGRAMMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

# LASERVET 1.0

## TERAPIA LÁSER

MÁS DE 40 PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA PERROS, GATOS, CABALLOS. LOS TRATAMIENTOS INCLUYEN PROTOCOLOS PARA:

**Patologías musculoesqueléticas** como artrosis, tendinopatías, contusiones, bursitis, contracturas y elongaciones musculares, etc.

**Patologías del sistema tegumentario** como heridas superficiales y profundas

**Patologías de otros sistemas** como otitis, sinusitis, estomatitis, etc.

