

# LASERVET 3.0

## LASERTERAPIA

IL TRATTAMENTO CON LASERVET 3.0 ACCELERA LA GUARIGIONE DEI TESSUTI LESI E MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE. È IDEALE PER STIMOLARE LA CICATRIZZAZIONE DELLE FERITE CUTANEE ED È PARTICOLARMENTE EFFICACE PER IL TRATTAMENTO DI DIVERSE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE CARATTERIZZATE DA INFIAMMAZIONE E DOLORE. LA LASERTERAPIA VELOCIZZA LA GUARIGIONE E LA SCOMPARSA DEL DOLORE, SIA USATA DA SOLA E SIA INSIEME AD ALTRE MODALITÀ TERAPEUTICHE.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza di picco

3W  $\pm 20\%$

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

#### Emissione

Pulsata e continua

#### Dimensioni target area

Ottica  $\varnothing 11$  mm

#### Frequenza

Fino a 10000Hz

#### Alimentazione

Rete e batteria ricaricabile

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 3.0
- 1 Handpiece Black 808nm con ottica  $\varnothing 11$  mm
- 1 Occhiale protettivo per il terapeuta
- 1 Kit con tre occhialini protettivi ad uso veterinario taglie S, M, L
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

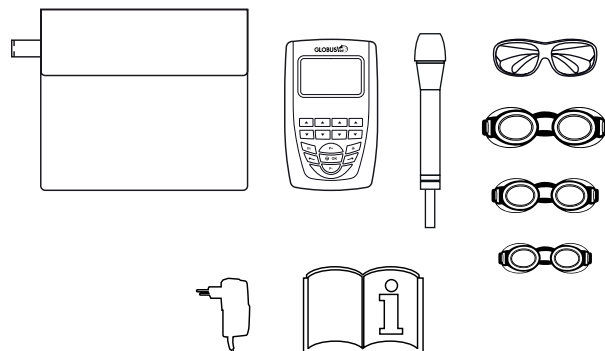

- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMABILE
- PACCO BATTERIA
- ALIMENTAZIONE A RETE

# LASERVET 3.0

## LASERTERAPIA

Rev. It\_10\_2025

**PIÙ DI 130 PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER CANI, GATTI, CAVALLI, PICCOLI MAMMIFERI, UCCELLI E RETTILI. I TRATTAMENTI INCLUDONO PROTOCOLLI PER:**

**Patologie muscolo-scheletriche** come artrosi, tendinopatie, contusioni, borsiti, contratture e stiramenti muscolari, fratture, displasia, neuropatie ecc..

**Patologie dell'apparato tegumentario** come ferite cutanee, granulomi, sacculite, fistole perianali, pododermatiti, abrasioni ecc...

**Patologie di altri apparati** come otiti, sinusiti, stomatiti ecc...

