

PRESSCARE G250

PRESOTERAPIA | 2 SALIDAS - 2 PROGRAMAS DE INFLADO

DISPOSITIVO DE PRESOTERAPIA PRÁCTICO Y LIGERO, IDEAL PARA ALIVIAR LA PESADEZ EN LAS PIERNAS, FAVORECE LA CIRCULACIÓN Y LA RECUPERACIÓN TRAS JORNADAS INTENSAS. GRACIAS A SU TAMAÑO COMPACTO, PRESSCARE G250 ES EL COMPAÑERO PERFECTO PARA EL BIENESTAR Y LA RELAJACIÓN DIARIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salidas

2

Programas

2 modos de inflado

Presión

40-160 mmHg (incrementos de 10)

Timer

Ajustable de 10 a 30 minutos (incrementos de 5)

Alimentación

Red

Dimensiones (LxAxA)

172x133x71 mm

Peso

645 gr

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- 1 Dispositivo PRESSCARE G250
- 2 Perneras, talla S/M/L
- 1 Fuente de alimentación
- 1 Manual operativo



VARIANTES DEL PRODUCTO

- G7951 PRESSCARE G250 - S
- G7952 PRESSCARE G250 - M
- G7953 PRESSCARE G250 - L



PUNTOS FUERTES



Compact



5 Chambers



2 Preset programs



13 Intensity levels



Pressure range
40-160 mmHg



Personalized timing



Mains power



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PRESSCARE G250

PRESOTERAPIA | 2 SALIDAS - 2 PROGRAMAS DE INFLADO

Rev. Es_05_2026

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

MODE A - ACTIVACIÓN SUAVE (Warm Up)
Inflado progresivo de una cámara cada vez para un masaje suave que favorece la relajación de las piernas.
Ideal para: comodidad diaria, recuperar la sensación de ligereza entre sesiones de entrenamiento muy seguidas, masaje reactivador antes de una competición.

MODE B - MASAJE PROFUNDO
Inflado secuencial de todas las cámaras y posterior desinflado simultáneo. La compresión resulta más intensa y envolvente, pensada para una acción más profunda y un efecto remodelador.
Ideale para: masaje más intenso y profundo.

SECUENCIA DE INFLADO




TAMAÑO DE LOS ACCESORIOS

PERNERAS: Accesorios de 5 cámaras, ambidextras, con conectores integrados, disponibles en tres tallas S/M/L.

- A - Longitud **INGUINAL-TALÓN**
- B - Circunferencia **MUSLO**
- C - Circunferencia **TOBILLO**

TALLA	A (cm)	B (cm)	C (cm)
PERNERAS "S"	75	76	47
PERNERAS "M"	86	80	48
PERNERAS "L"	97	84	49

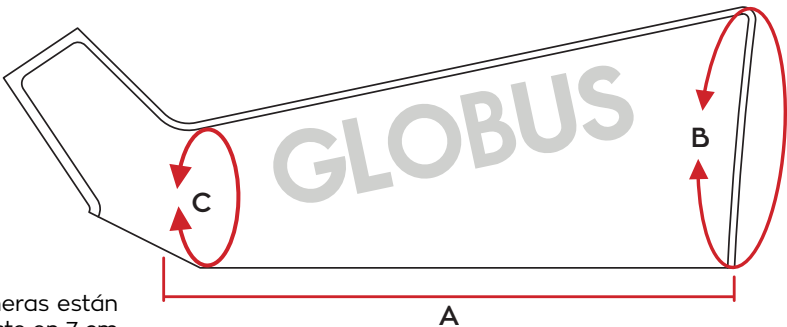

EXTENSIÓN DE PERNERAS: Las extensiones de perneras están disponibles en 3 tallas (S/M/L). Para aumentar el ajuste en 7 cm en el tobillo y 9 cm en el muslo.

BANDA ABDOMINAL: Accesorio de 5 cámaras para tratamientos en abdomen, caderas y glúteos.

TALLA ÚNICA	A (cm)	B (cm)
	125	35

EXTENSIÓN PARA BANDA ABDOMINAL: Gracias al velcro, se puede fijar a la banda abdominal para mejorar su ajuste. Dimensiones: 40 x 35 cm.

